




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	SELECT TL3 toiletløfter, manuel, til vægafløb R9023112
Farve	VVS:617989012 NRF:6191183 EAN:5708590372822 HMI: 138237 FDA: IKX/D319729 Antracitgrå
Produktbeskrivelse	 SELECT toiletløftere fås i flere modeller og farver til både vægafløb eller gulvafløb. De fås i elektrisk eller manuelt højdejusterbare versioner, med eller uden sideprofiler og til almindelige toilet-kummer eller douchetoiletter. Alle udviklet med fokus på hygiejne og nem rengøring. SELECT TL3 toiletløfter, til vægafløb. Inkl. cisterne med dobbeltskyl 3/6L (kan omstilles til 2/4L). Manuelt højderegulerbar 200 mm med håndsvingsbetjening. Toilet-kumme, toiletsæde og toiletstøtter skal bestilles separat. Materialer: Rustfrit stål og PMMA/ABS. Ekskl. monteringsskruer til væg.
Justerbarhed Reguleringshøjde Produktkapacitet	Højderegulerbar 200 mm Maksimal brugervægt: 200 kg. Maksimal belastning: 235 kg (brugervægt + tilbehør). Når toiletløfteren belastes med 235 kg, belastes hver monteringsskrue med 65 kg. <i>Toiletløfteren er testet statisk med 600 kg, der hvor toilettet påsættes. Dette er i henhold til krav i de anvendte hjælpemiddelstandarder. Bemærk at de fleste toiletter, som kan påmonteres løfteren, er testet til 400 kg.</i>
Materialer	Toiletløfteren er fremstillet i rustfrit stål, med afdækningskåbe i PMMA/ABS.
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.

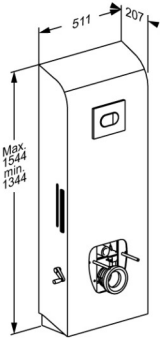

PRESSALIT®

Produkt	SELECT TL3 toiletløfter, manuel, til vægafløb
Varenummer	R9023112
Rengøring	Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade. Klorbaserede desinfektionsmidler kan bruges til desinfektion af overflader i henhold til produktspecifikationen og sikkerhedsforanstaltninger for disse produkter. Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen. DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvættsprit 70% IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.






PRESSALIT®

Produkt	SELECT TL3 toiletløfter, manuel, til væg afløb
Varenummer	R9023112

Montering i forskellige vægtyper

	Beton >B25 V8605 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12, med grå dækknapper. Skal bestilles separat.	
	Mursten >= Mz12 V8605 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12, med grå dækknapper. Skal bestilles separat.	
	Kalksten >= Hlz12 V8605 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12, med grå dækknapper. Skal bestilles separat.	
	Gasbeton P4 V8655 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø10 x 70, dübel GB14, med grå dækknapper. Skal bestilles separat.	
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, med træforstærkning V8605 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12, med hvide dækknapper. Dübler skal ikke anvendes. Skal bestilles separat.	

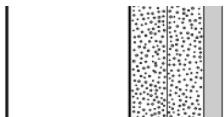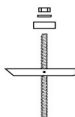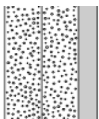

Produkt Varenummer	SELECT TL3 toiletløfter, manuel, til væg afløb R9023112		
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med 22 mm krydsfinér Befæstigelse til væg (4 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.		
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med stålplader 2 mm Befæstigelse til væg (4 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.		
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast Det anbefales ikke at montere produktet i denne vægtype, da der er risiko for personskade forbundet hermed.		