




| | |
|---|---|
| Produkt Produktnummer | PLUS Stützklappgriff, 850 mm Ausladung, rechtsbedient R372485000 |
| Farbe | VVS:615877500 NRF:6191134 EAN:5708590368603 HMI: 138170 Weiß |
| Produkt- beschreibung |  <p>Alle PLUS Stützklappgriffe sind mit einer integrierten Federbelastung ausgestattet, die eine kontrollierte Bewegung zwischen der waagerechten und senkrechten Position gewährleistet.</p> <p>PLUS Stützklappgriff mit Federbelastung, 850 mm. Höhenverstellbar um 150 mm. Hochklappbar. Rechtsbedient. Nur für TL3 und TL4 Toilet-Lifter geeignet. Die Armlehne hat eine ovale form, und der Abschluss des Griffes stützt und bietet komfortablen Halt. Materialien: Aluminium mit einer 10µm Eloxalschicht. Greiffläche aus weichem SEBS-Kunststoff mit glasfaserverstärktem Nylonkern. Excl. Befestigungsmaterial.</p> |
| Verstellung Höhenverstellung | Höhenverstellbar 150 mm |
| Produktkapazität | Maximale Belastung: 150 kg. |
| Materialien | Der Stützklappgriff besteht vorwiegend aus Aluminium mit einer 10 µm Eloxalschicht und ist am Ende mit einer rutschfesten, griffigen Oberfläche aus weichem SEBS-Kunststoff mit glasfaserverstärktem Nylonkern versehen. Auch der Scharnierarm ist mit weichem SEBS-Kunststoff überzogen. Interne Komponenten und Halterungen sind vorwiegend in Edelstahl ausgeführt. Die Scharnierhülse ist mit Endkappen aus ABS versehen. |



| | |
|--|---|
| Produkt Produktnummer | PLUS Stützklappgriff, 850 mm Ausladung, rechtsbedient R372485000 |
| Ergonomie | <p>Eine weiche, rutschsichere Oberfläche, die sich angenehm anfühlt.</p> <p>Die ovale Form des Stützklappgriffes stützt und bietet einen guten, komfortablen Halt.</p> <p>Der Abschluss des Stützklappgriffes ist ein guter Halt, wenn man sich hinstezt bzw, autsteht. Zugleich erhält man ein gutes Gefühl dafür, wo der Stützklappgriff endet.</p> |
| Funktionen | <p>Der Stützklappgriff ist hochklappbar.</p> <p>An der Unterseite lässt sich verschiedenes Zubehör montieren.</p> |
| Garantie | <p>Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.</p> |

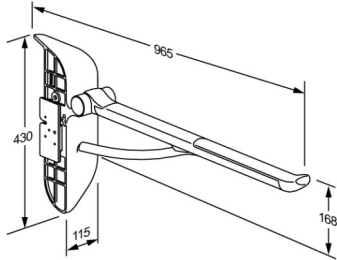

| | |
|------------------------------------|---|
| Produkt | PLUS Stützklappgriff, 850 mm Ausladung, rechtsbedient |
| Produktnummer | R372485000 |
| Reinigung | <p>Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.</p> <p>Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist.</p> <p>DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% Oxyplus-acid 2% (Diversey) WipeClean UniversalCleaning Chlorine Disinfection Wipes</p> <p>NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abtrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können.</p> <p>ENTKALKUNG DER ALUMINIUMTEILE: Pressalit empfiehlt, eventuelle Kalkablagerungen auf der Wandschiene und anderen Aluminiumteilen mit einer Mischung aus 3 Teilen 30%-iger Essigsäure und 7 Teilen Wasser zu entfernen. Nach Reinigung der Aluminiumteile mit dem Essigwasser, muss mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch nachgetrocknet werden.</p> <p>Diese Produkt ist gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert worden.</p> |
| Konformitäts- erklärung | |



| | |
|----------------------|---|
| Produkt | PLUS Stützklappgriff, 850 mm Ausladung, rechtsbedient |
| Produktnummer | R372485000 |
| | <p>Verwendungszweck Der Stützklappgriff bietet Personen, die sich beim WC-Besuch hinsetzen, aufstehen oder sich seitlich vom Rollstuhl umsetzen, sicheren Halt.</p> <p>Betriebsbedingungen Zum Gebrauch in Nassräumen wie Badezimmern oder Waschräumen, zuhause, in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern. Bei professioneller Verwendung beträgt die erwartete Lebensdauer 10 Jahre. <i>Die Lebensdauer wurde gemäß ISO 17966:2016 getestet.</i></p> <p>Für die Wartung beachten Sie bitte die Gebrauchsanweisung, die dem Produkt beigelegt ist und die ebenfalls auf der Webseite unter „Downloads“ gefunden werden kann.</p> |