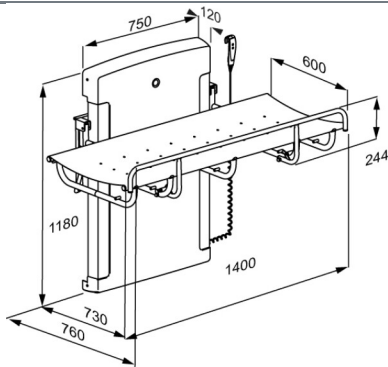




PRESSALIT®

Article Numéro article	SCT 1000 table de douche réglable en hauteur électriquement R8583114000
Couleur	VVS: 777543640 EAN: 5708590377636 HMI: 140128 Blanc
Description	 <p>Pressalit propose plusieurs tables de douche et de change haut de gamme, mobiles, à hauteur variable ou fixe. Elles sont conçues pour apporter une surface stable pour doucher et changer les personnes à mobilité réduite, enfants et adultes. Ces tables peuvent être utilisées dans les écoles, les établissements de santé, les hôpitaux mais aussi au domicile privé. Elles sont toutes conçues pour être résistantes, confortables et faciles à nettoyer. Leur design et la flexibilité assurent des conditions de travail optimales pour l'aidant ainsi qu'un haut niveau de confort et de sécurité pour l'utilisateur.</p> <p>SCT 1000 table de douche à moteur électrique, réglable en hauteur de 400 mm; de 480 mm - 880 mm, avec télécommande filaire. Rabattable. Incluant barrière latérale. Cotes extérieures 760 mm x 1400 mm. Livré sans vis de montage.</p>
Réglage	Réglable en hauteur
Hauteur de réglage	400 mm
Capacité du produit	Poids maximum de l'utilisateur (MUM) : 200 kg. Charge maximale (SWL) : 200 kg. Lorsque la table de douche est chargée de 200 kg, chaque vis de montage est chargé de 27 kg. <i>La table a été testée statiquement avec 500 kg car la norme IEC 60601-1 exige des tests avec un facteur de sécurité de 2,5.</i>
Vitesse en montant	Vitesse en montant: 11 mm/s Vitesse en descendant: 9 mm/s
Niveau sonore	50 dB



Article	SCT 1000 table de douche réglable en hauteur électriquement
Numéro article	R8583114000
Matériaux	Acier inoxydable laqué par poudrage, toile recouverte de PVC (sans phtalates).
Ergonomie	<p>Il est facile pour l'aide-soignant de régler la hauteur du lit afin d'obtenir la position de travail optimale. Une fonction qui contribue à sécuriser le bain et le change tout en minimisant le risque d'accident du travail.</p> <p>La table de douche peut être rabattue à la verticale pour occuper le moins de place possible quand elle n'est pas utilisée.</p>
Fonctions	<p>Les boutons-poussoirs rouges de la télécommande filaire indiquent clairement "montée" et "descente". La télécommande filaire est livrée avec un système de fixation murale.</p> <p>Grâce au système de compensation à gaz intégré, la table de douche peut être repliée contre le mur après usage pour réduire au minimum l'encombrement.</p> <p>La barrière latérale peut être dépliée/repliée sans effort.</p> <p>Le rideau de douche (option) protège l'aide-soignant contre les éclaboussures.</p>
Raccordement électrique (V)	230
Vérin	LA40 Careline (Linak), 4000 N, IPX6
Boîte de contrôle	CA63 Careline (Linak), IPX6
Télécommande filaire	HB30 (Linak), IP66
Consommation d'électricité	<p>Consommation d'électricité en charge maximale: 420 W</p> <p>Consommation d'électricité en veille: 0,5 W</p>
Garantie	<p>Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 3 ans à partir de la date de facturation. REMARQUE Si le produit est placé dans un environnement chargé en sel ou en chlorure, la garantie sera réduite de 3 ans à 1 an. Le sel et le chlorure ont un effet corrosif sur les composants du produit et diminuent la durée de vie du produit.</p>



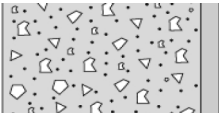
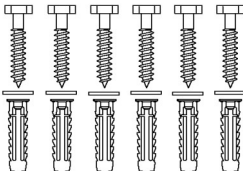

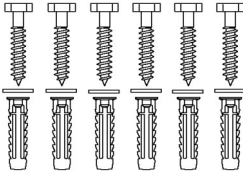
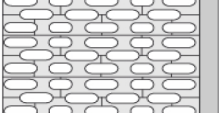
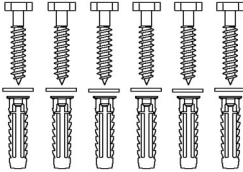
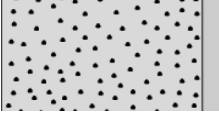
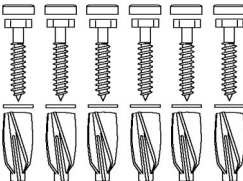
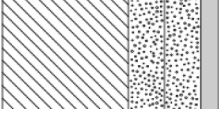
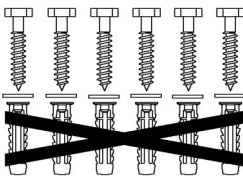
Article	SCT 1000 table de douche réglable en hauteur électriquement
Numéro article	R8583114000
Nettoyage	<p>Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs, corrosifs et contenant du chlore, car cela pourrait endommager la surface.</p> <p>Les nettoyants suivants ont été testés par Pressalit et peuvent être utilisés, s'ils sont dilués conformément aux indications notées sur l'emballage.</p> <p>NETTOYANTS DÉSINFECTANTS : Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% Accel PREvention Wipes Lingettes OxiGenesis from ENVIROX</p> <p>NETTOYANTS NON-DÉSINFECTANTS : Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Il importe d'insister qu'il faut toujours essuyer le produit avec un chiffon doux plissé dans l'eau propre immédiatement après le nettoyage, car certains matériaux seront progressivement tachetés et perdront leur couleur initiale, et le laquage de surface sera rongé.</p>



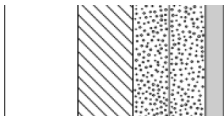
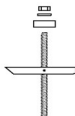

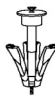
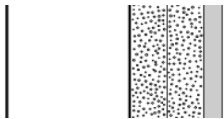
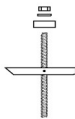

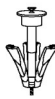
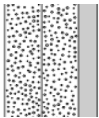

PRESSALIT®

Article	SCT 1000 table de douche réglable en hauteur électriquement
Numéro article	R8583114000

Installation dans de différents types de mur

	Béton >B25 V8608 - Kit vis de montage, 6 vis cervicales Ø10 x 70, chevilles SX12. Doit être commandé séparément.	
	Brique pleine >= Mz12 V8608 - Kit vis de montage, 6 vis cervicales Ø10 x 70, chevilles SX12. Doit être commandé séparément.	
	Parpaing plein >= Hlz12 V8608 - Kit vis de montage, 6 vis cervicales Ø10 x 70, chevilles SX12. Doit être commandé séparément.	
	Béton cellulaire P4 V8658 - Kit vis de montage, 6 vis cervicales Ø10 x 70, chevilles GB14. Doit être commandé séparément.	
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée de bois V8608 - Kit vis de montage, 6 vis cervicales Ø10 x 70, chevilles SX12. N'utilisez pas les chevilles. Doit être commandé séparément.	



Article Numéro article	SCT 1000 table de douche réglable en hauteur électriquement R8583114000		
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée de contreplaqué 22 mm Vis de montage (6 pièces) doivent être acheté séparément. Pour les cloisons sèches imperméables, les chevilles bascule KD8 de fischer ou similaire peuvent être utilisées.		 
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée d'acier 2 mm Vis de montage (6 pièces) doivent être acheté séparément. Pour les cloisons sèches imperméables, les chevilles bascule KD8 de fischer ou similaire peuvent être utilisées.		 
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable Montage dans ce type de mur n'est pas recommandé - risque de blessure mortelle pour des personnes.		

C'est la responsabilité de l'installateur d'assurer l'usage des fixations murales appropriées.