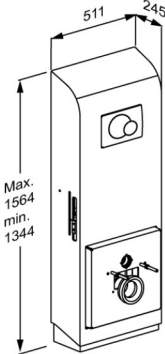




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	SELECT TL5 elektrisk toiletløfter med kipfunktion, til vægafløb R9221000
Farve	VVS:617989900 NRF:1617110 EAN:5708590390963 FDA:IKX/D319729 Hvid
Produktbeskrivelse	 SELECT toiletløftere fås i flere modeller og farver til både vægafløb eller gulvafløb. De fås i elektrisk eller manuelt højdejusterbare versioner, med eller uden sideprofiler og til almindelige toilet-kummer eller douchetoiletter. Alle udviklet med fokus på hygiejne og nem rengøring. SELECT TL5 toiletløfter med kipfunktion, til vægafløb. Inkl. cisterne med dobbeltskyl 3/6L (kan omstilles til 2/4L). Elektrisk højderegulérbar 220 mm med betjeningspanel på toiletstøtte. Kipfunktionen er begrænset til højdejusteringen. Det betyder, at toilettets fastgørelsesplade vil vippe, når den løftes til øverste position, og genplaceres, når enheden sænkes. Den maksimale hældning er 8 grader. Toilet-kumme, toiletsæde og toiletstøtter (påkrævet til højderegulering) skal bestilles separat. Ekskl. monteringsskruer til væg.
Justerbarhed	Højderegulérbar
Reguleringshøjde	220 mm
Produktkapacitet	Maksimal brugervægt (MUM): 150 kg. Maksimal belastning (SWL): 235 kg (brugervægt + tilbehør). Når toiletløfteren belastes med 235 kg, belastes hver monteringsskrue med 65 kg. <i>Toiletløfteren er testet statisk med 587,5 kg, der hvor toilettet påsættes. Dette er i henhold til krav i de anvendte hjælpemiddelstandarder. Bemærk at de fleste toiletter, som kan påmonteres løfteren, er testet til 400 kg.</i>
Hastighed opad	Hastighed op: 7 mm/s Hastighed ned: 7 mm/s
Støjniveau	50 dB
Materialer	Toiletløfteren er fremstillet i rustfrit stål og pulverlakeret stål, med afdækningskåbe i PMMA/ABS.



Produkt	SELECT TL5 elektrisk toiletløfter med kipfunktion, til vægafløb
Varenummer	R9221000
Ergonomi	Den integrerede vippefunktion understøtter en naturlig fremadgående bevægelse, hvilket gør overgangen fra siddende til stående stilling nemmere og mere sikker for brugere med nedsat mobilitet. Ved at vippe brugeren ind i en optimal position forbedrer TL5 stabiliteten og mindsker den fysiske belastning under forflytninger. Dette øger både brugerens uafhængighed og forbedrer plejepersonalets arbejdsforhold. Den er designet til voksne brugere og kan også anvendes af børn under opsyn af en voksen.
Funktioner	• Kipfunktion • Elektrisk højderegulérbar • Betjeningspanel på toiletstøtte • Dobbelt skyllesystem
Strømforsyning (V)	230
Aktuator (motor)	LA40
Styreboks	CA63
Strømforbrug (max. belastning)	Strømforbrug, maksimal belastning: 420 W Strømforbrug, standby: 0,5 W
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.



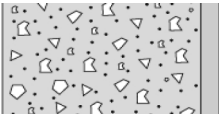
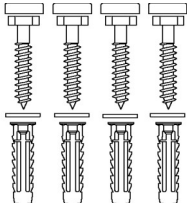
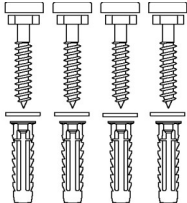
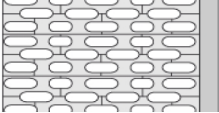
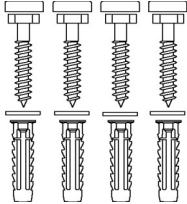
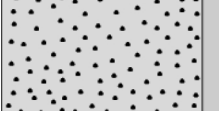
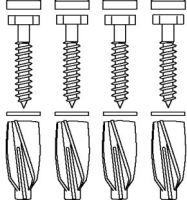
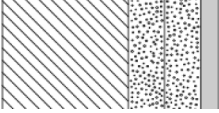
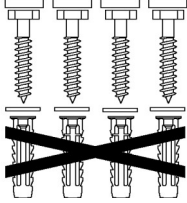
Produkt	SELECT TL5 elektrisk toiletløfter med kipfunktion, til væg afløb
Varenummer	R9221000
Rengøring	Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade. Klorbaserede desinfektionsmidler kan bruges til desinfektion af overflader i henhold til produktspecifikationen og sikkerhedsforanstaltninger for disse produkter. Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen. DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvættsprit 70% IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.
WEEE	Kontakt Pressalit eller Pressalits distributør som vil sørge for, at elektrisk affald bortskaffes i henhold til WEEE-direktivet.



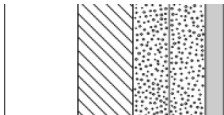
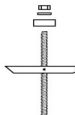
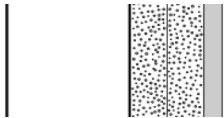
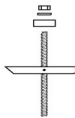
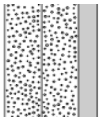
PRESSALIT®

Produkt	SELECT TL5 elektrisk toiletløfter med kipfunktion, til væg afløb
Varenummer	R9221000

Montering i forskellige vægtyper

	Beton >B25 V8605 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12, med grå dækknapper. Skal bestilles separat.	
	Mursten >= Mz12 V8605 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12, med grå dækknapper. Skal bestilles separat.	
	Kalksten >= Hlz12 V8605 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12, med grå dækknapper. Skal bestilles separat.	
	Gasbeton P4 V8655 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø10 x 70, dübel GB14, med grå dækknapper. Skal bestilles separat.	
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, med træforstærkning V8605 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12, med hvide dækknapper. Dübler skal ikke anvendes. Skal bestilles separat.	



Produkt Varenummer	SELECT TL5 elektrisk toiletløfter med kipfunktion, til væg afløb R9221000		
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med 22 mm krydsfinér Befæstigelse til væg (4 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.		 
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med stålplader 2 mm Befæstigelse til væg (4 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.		 
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast Det anbefales ikke at montere produktet i denne vægtype, da der er risiko for personskade forbundet hermed.		