



PRESSALIT®

Product Varunummer	PLUS toalettarmstöd, 850 mm R360085108
Färg	NRF:6191074 RSK:7828183 EAN:5708590367941 HMI: 123553 FDA: ILS/D135866 Mörkblå (RAL 5011)
Beskrivning	 Alla toalettstöd PLUS har en integrerad dämparfunktion som säkerställer att stödet sänks kontrollerat från vertikalt till horisontellt läge. Lämplig för användning med vägghängda toaletter där avståndet från vägg till front är 700 mm, och för golvstående toaletter. <i>Ersätter utgående modeller R3085 och RF085.</i> PLUS toalettarmstöd med fjäderbelastning. Total längd 850 mm. Ergonomisk design, som ger skön vila åt armarna och ett optimalt stöd när man skal resa eller sätta sig. Fast höjd. Uppfällbart. Material: Aluminium med greppfast tvåkomponentsplast. Exkl. monteringskruvar.
Justerbar Produktkapacitet	Fast höjd Maximal belastning: 150 kg. När toalettarmstöden belastas med 150 kg, belastas varje monterings skruv med 161 kg. <i>PLUS toalettarmstöd är testad statiskt med respektive 700 kg (tät på väggen), 425 kg (på midten) och 225 kg (på yterpunktet).</i>
Material Ergonomi Funktioner	Toalettarmstöden är främst framställt i 10-mikrometer anodiserad aluminium. Greppen är belagda med en glidyta av termoplastisk elastomer (TPE) som omsluter en glasförstärkt nylonkärna. Interna komponenter och fästelement är främst gjorda av rostfritt stål. Stabilt stöd i form av ergonomiska toalettarmstöd ger ökad trygghet till den sittande brukaren och underlättar samtidigt den dagliga förflyttningen från och till hjälpmedel. Ett bra toalettarmstöd ger skön vila åt armarna och ett optimalt stöd när man ska resa eller sätta sig. Toalettarmstöden är försedda med ett gångjärn som gör det möjligt att fälla upp toalettarmstöden mot väggen. Uppfällbara toalettarmstöd ger gott om plats i rummet när de inte används.



PRESSALIT®

Product	PLUS toalettarmstöd, 850 mm
Varunummer	R360085108
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.
Rengöring	Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen. DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% Oxyplus-acid 2% (Diversey) WipeClean UniversalCleaning Chlorine Disinfection Wipes INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.



PRESSALIT®

Product	PLUS toalettarmstöd, 850 mm
Varunummer	R360085108
	Avsedd användning Toalettarmstödet används som stöd för en person som ska sätta sig på eller resa sig från en toalett, eller vid sidoförflyttning från rullstol. Användningsmiljö För användning inomhus i våtrumsmiljö, till exempel ett badrum, i privata hem, på vårdhem och sjukhus. Vid yrkesmässig användning är den förväntade livslängden 10 år. <i>Livscykeltest har utförts enligt ISO 17966:2016.</i> För underhåll hänvisas till användnings – underhållsinstruktion som är anslutna till produkten, detta finns på hemsidan under "Downloads". Link til eBVD: https://www.ebvd.org/BMI/Document/Export/4222/0/Pdf Denna produkt har fått följande bedömning: Byggvarubedömningen: Accepteras



PRESSALIT®

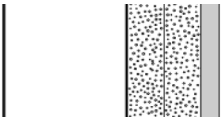
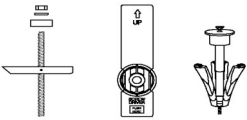
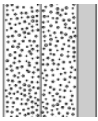
Product	PLUS toalettarmstöd, 850 mm
Varunummer	R360085108

Montage i olika väggtyper

	Betong >B25 V8604 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø8 x 70 försänkt, plugg SX10. Måste beställas separat.	
	Mursten >= Mz12 V8604 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø8 x 70 försänkt, plugg SX10. Måste beställas separat.	
	Cementsten >= H12 V8604 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø8 x 70 försänkt, plugg SX10. Måste beställas separat.	
	Lättbetong P4 V8654 - Monteringsset, 4 st. bultar M8 x 35 försänkt, plugg FTP M 8. Måste beställas separat.	
	Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä V8604 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø8 x 70 försänkt, plugg SX10. Använd inte plugg. Måste beställas separat.	



PRESSALIT®

Product Varunummer	PLUS toalettarmstöd, 850 mm R360085108
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfanér Monteringsskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande. 
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm Monteringsskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande. 
	Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2 Montering av produkter i denna typ av vägg rekommenderas inte, finns en stor risk att kroppsskada uppstår. 

pressalit.com