




PRESSALIT®

Product Varunummer	PLUS duschsits 450, elektrisk höjdreglerbart och manuellt sido reglerbar R7664035
Färg	NRF:6317154 EAN:5708590360287 HMI: 124227 Röd (RAL 3003)
Beskrivning	 PLUS duschstolar erbjuds i flera färger. De finns både som fasta, elektriskt justerbara och manuellt justerbara, med och utan hål, och med möjlighet till rygg och armstöd. De är lämpliga för väggmontering eller för montering på Pressalit PLUS väggskenor. PLUS duschsits 450, uppfällbart, med rygg- och armstöd. Höjdreglerbart 500 mm, eldriven med manöverdosa och manuellt sido reglerbar. Uppfällbara armstöd kan höjdregleras oberoende av sits och ryggstöd. Material: Mjuk och skön PUR-skum med tråkärna, monterade på aluminiumprofil. Armstöd med greppfast tvåkomponentsplast är tålig och lätt att rengöra. Till eftermontering på existerande vågrät PLUS väggskena (medföljer ej).
Justerbar Höjdjustering Produktkapacitet	Höjd- och sidoreglerbar 500 mm Max brukarvikt (sits): 150 kg Max belastning armstöd: 55 kg När duschsitsen belastas med 150 kg, belastas varje fästskruv med 35 kg.
Uppåtgående hastighet Ljudnivå	<i>PLUS duschsitsar testas statiskt med säkerhetsfaktor 2,5. Detta är i enlighet med kraven i gällande standarder hjälpmedlet.</i> Hastighet upp: 10 mm/s Hastighet ner: 10 mm/s 48 dB
Material	Duschsätet är framställt i anodiserad aluminium och polyuretanskum som är gjutet runt en plywoodkärna och gjuten med en yta av klar PU-lack. Ändarna på ryggstödet och sätet är förseglade med ändpluggar i ABS.

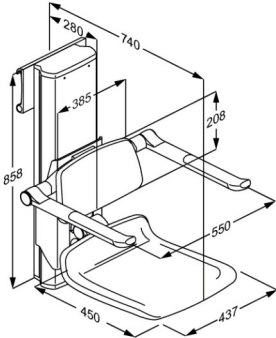

PRESSALIT®

Product Varunummer	PLUS duschsits 450, elektrisk höjdglerbart och manuellt sido reglerbar R7664035
Ergonomi Funktioner Anslutnings ström (V) Motor Kontrollbox Manöverdosa Strömförbrukning (max.belastning)	Ergonomisk sits - säte 450 x 437 mm.. Sitsen är utförd i ett mjukt och halkfritt material som aldrig känns kallt samtidigt som det ger en god sittkomfort. Armstödens ovala form gör dem lätta och bekväma att hålla, och ger bra stöd. Både sits och armstöd kan fällas upp mot väggen efter användning. Sits, rygg- och armstöd kan justeras parallellt via ett enkelt och säkert klicksystem. Armstöden kan dessutom höjdgleras oberoende av sits och ryggstöd. Med elektrisk manövrering är det möjligt för vårdgiveren att ställa in sitsen till en bra arbetshöjd medan brukaren sitter på sitsen. 230 LA40 (Linak) 6000N, IPX6 SMPS14 (Linak) IPX6 HB3 (Linak) IP66 Strömförbrukning vid maximal belastning: 60 W Strömförbrukning vid standby: 0,5 W
Garanti	Pressalit förpliktat sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.



PRESSALIT®

Product Varunummer	PLUS duschsits 450, elektrisk höjdglerbart och manuellt sido reglerbar R7664035
Rengöring	Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen. DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:Erisan OXY+ Tvättsprit 70% CaviCide surface disinfectant decontaminant cleaner Rodalon Desinfektionsspray Terralin protect (SCHÜLKE+) Dismonzon Plus (BODE Chemie GmbH) INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Wetrok Caledor (Wetrok) Petrosol Citro (Büfa) Viktigt: PUR-yltor på PLUS duschsitsar och PLUS ryggstöd innehåller en antibakteriell beläggning som kan skadas om den används av annat än såpa och vatten för rengöring. Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå. Kontakta Pressalit eller Pressalits distributör som kommer att ombesörja återvinning av elektronikskrot i enlighet med WEEE-direktivet.
WEEE	

pressalit.com