




PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	MSCT 4 Dusch- und Ankleidewagen, manuell höhenverstellbar R9504717000
Farbe	Weiß
Produktbeschreibung	<p>VVS: 777542610 EAN: 5708590389844 HMI: 147806 FDA: INW/D546021</p>  <p>Pressalit bietet eine große Auswahl hoch qualitativer Dusch- und Pflegeliegen in verschiedenen Ausführung. Wir bieten zum Beispiel sowohl Elektrisch höhenverstellbare Dusch- und Pflegeliegen, Nicht höhenverstellbare Dusch- und Pflegeliegen und Mobile, höhenverstellbare Dusch- und Pflegeliegen. Sie bilden eine sichere Basis für die Pflege und das Umkleiden von Erwachsenen und Kindern in den vielfältigsten Einrichtungen</p> <p>Die Liegen können in können in Schulen, Institutionen, Krankenhäusern und in Privathaushalten verwendet werden. Sie zeichnen sich durch eine robuste Oberfläche aus, die sowohl komfortabel als auch sehr leicht zu reinigen ist. Die höhenverstellbare Funktion und die Flexibilität gewährleisten optimale Arbeitsbedingungen für den Helfer sowie ein hohes Maß an Komfort und Sicherheit für den Benutzer.</p> <p>MSCT 4 Duschwagen, 700 x 1700 mm, vier umklappbare Seiten. Manuell höhenverstellbar per Fußpedal. 500 mm Hubbereich von 550 bis 1050 mm. Matratze muss separat bestellt werden.</p>
Verstellung Höhenverstellung Produktkapazität	Höhenverstellbar 500 mm Maximales Anwendergewicht (MUM): 200 kg. Maximale Belastung (SWL): 250 kg. <i>Die Pflegeliege ist mit 375 kg statisch getestet, gemäß den Anforderungen der Norm ISO 17966, die eine Prüfung mit einem Sicherheitsfaktor von 1,5 erfordert.</i>
Materialien	Materialien: Kunststoff, Compact Density Fiberboards (CDF) und lackierter Edelstahl.

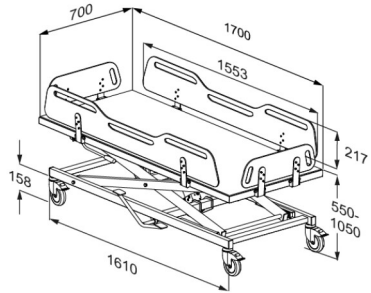

Produkt	MSCT 4 Dusch- und Ankleidewagen, manuell höhenverstellbar
Produktnummer	R9504717000
Ergonomie	<ul style="list-style-type: none">• Die ergonomisch geformten Seitengitter der mobilen Ankleideliège haben ein praktisches niedriges Mittelstück, welches dem Pflegepersonal einen besseren Zugang und eine bessere Arbeitsumgebung bietet, während die zu pflegende Person auf den Duschwagen versetzt, gewechselt und angezogen werden kann.• Durch die einhändig bedienbaren Seitengitter kann der Betreuer während des gesamten Vorgangs sowohl Augenkontakt als auch physischen Kontakt mit dem Benutzer aufrechterhalten. Die klappbaren Seitengitter bieten einen einfachen Zugang von allen vier Seiten des Duschwagens.• Die verschiedenen Griffmöglichkeiten am Seitengitter ermöglichen es dem Benutzer sich beim Wenden daran festzuhalten. Das gibt dem Benutzer Sicherheit und fördert das Wohlbefinden und die Selbstständigkeit bei der Pflege im Duschwagen.• Die leicht zu reinigenden, glatten Kontaktflächen verhindern, dass sich Schmutz ablagert und Bakterien ansammeln.
Funktionen	<ul style="list-style-type: none">• Der Ankleideliège kann für einen einfachen Transport und mehrere Benutzer von Raum zu Raum bewegt werden.• Intuitive, benutzerfreundliche Dropdown-Seitengitter mit einhändiger Bedienmöglichkeit.
Garantie	Für alle Pressalit-Hilfsmittel gewähren wir innerhalb von drei Jahren ab Rechnungsdatum Garantie auf Material- und Herstellungsfehler. Im Falle eines nachweisbaren Mangels erfolgt eine kostenlose Nachbesserung oder Ersatzlieferung nach unserem Ermessen.



Produkt	MSCT 4 Dusch- und Ankleidewagen, manuell höhenverstellbar
Produktnummer	R9504717000
Reinigung	<p>Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.</p> <p>Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist.</p> <p>DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% Accel PREvention Wipes Lingettes</p> <p>NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abtrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können.</p>