




Product Artikelnummer	PLUS opklapbaar zitje, handmatig in hoogte verstelbaar R5500112
Kleur	VVS: 777531712 NRF: 7501063 EAN: 5708590328249 HMI: 130162 FDA: INN/D135865 Antracietgrijs
Beschrijving	 <p>PLUS opklapbaar zitje. Handmatig 240 mm in hoogte verstelbaar. De zitting is opklapbaar. Voor montage op verticale rail (niet inbegrepen). Opklapbaar zitje niet voor direct gebruik onder de douche.</p> <p>PLUS opklapbaar zitje. Handmatig 240 mm in hoogte verstelbaar. Materiaal: Aluminium, thermohardende kunststof, kunststof Voor montage op verticale rail (niet inbegrepen).</p>
Verstelbaarheid Afstelhoogte Product capaciteit	In hoogte verstelbaar 240 mm Maximale belasting: 265 kg. Wanneer de zitting is belast met 265 kg, is elke wandbevestiging belast met 23 kg. <i>De zitting is statisch getest met veiligheidsfactor 1,5, wat een vereiste is volgens de toegepaste normen voor ondersteunende hulpm</i>
Materialen Ergonomy Functie	De opklapbare zitting is gemaakt van thermohardende kunststof, en de montage en ophangbeugel zijn gemaakt van 10 my geanodiseerd aluminium. De afdekkappen zijn gemaakt van ABS kunststof. Ergonomisch gevormde zitting, welke een goed en comfortabel zitcomfort biedt. De zitting is geschikt bij situaties waar extra stoelen benodigd zijn en de ruimte beperkt is, bijvoorbeeld keukens, liften en corridors van luchthavens. De zitting kan omhoog worden opgeklapt wanneer deze niet wordt gebruikt. Blijft uit zichzelf staan wanneer deze is opgeklapt.
Garantie	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode van vijf jaar na de factuurdatum.

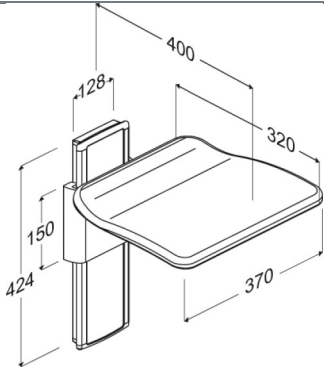

Product	PLUS opklapbaar zitje, handmatig in hoogte verstelbaar
Artikelnummer	R5500112
Reiniging	<p>Het product kan worden gereinigd met een milde zeepreiner. Gebruik geen reinigingsmiddelen die chloor bevatten en evenmin bijtende of schurende middelen die het oppervlak kunnen beschadigen.</p> <p>De volgende reinigingsmiddelen zijn door Pressalit getest en goedgevonden voor zover de aanbevolen concentratie op de verpakking wordt aangehouden.</p> <p>DESINFECTEERMIDDELEN: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättssprit 70%</p> <p>NIET-DESINFECTERENDE MIDDELEN: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Het oppervlak moet direct na het schoonmaken worden afgenomen met een zachte met schoon water bevochtigde, doek daar sommige oppervlakken ander kunnen verkleuren of vlekken ontstaan en het oppervlak daardoor aangetast raakt.</p> <p>ONTKALKING VAN ALUMINIUM ONDERDELEN: Pressalit raadt aan om kalkaanslag op de muurrails en andere aluminium onderdelen te verwijderen met een oplossing van 30% schoonmaakazijn en 70 % leidingwater. Wanneer de aluminium onderdelen met deze oplossing zijn schoon gemaakt, moeten de onderdelen worden afgeveegd met met schoon water bevochtigde uitgewrongen doek.</p>