




<b>Produkt</b> <b>Produktnummer</b>	Matratze für CT 4000 und CT 4100 R8487378
<b>Farbe</b>	VVS: 777541708 EAN: 5708590360560 HMI: 125838  Marineblau  
<b>Produkt- beschreibung</b>	<p>Matratze für Pflegeliege mit den Abmessungen 813 x 1829 mm, Abmessung der Matratze: 805 x 1820 mm, inkl. Befestigungsschrauben. Die Befestigungsschrauben sorgen dafür, dass die Matratze fest an der Pflegeliege befestigt ist - sowohl beim Hochklappen der Liegefläche als auch beim Transfer zur und von der Pflegeliege.</p> <p>Matratze für Pflegeliege mit den Abmessungen 813 x 1829 mm, Abmessung der Matratze: 805 x 1820 mm, inkl. Befestigungsschrauben. Die Befestigungsschrauben sorgen dafür, dass die Matratze fest an der Pflegeliege befestigt ist - sowohl beim Hochklappen der Liegefläche als auch beim Transfer zur und von der Pflegeliege.</p>
<b>Materialien</b>	Der Matratzenbezug besteht aus 100% Polyester mit Polyurethan, zugelassen gemäß Oeko-Tex 100, Klasse I. Er ist feuerhemmend und für Hausstaubmilben undurchlässig. Die Schaumfüllung besteht aus Polyurethan-Weichschaum auf Polyesterbasis, der ebenfalls feuerhemmend ist und gemäß Oeko-tex 100, Klasse I zugelassen ist.
<b>Ergonomie</b>	Der Matratze kann umgedreht werden und besteht aus einem angenehmen hypoallergenen Material mit einer Oberfläche, die leicht abzuwischen und sauber zu halten ist.
<b>Funktionen</b>	Der Matratze kann leicht entfernt werden, dies schafft Flexibilität bei der Verwendung und gewährleistet optimale Möglichkeiten für eine effektive Reinigung über und unter der Matratze.

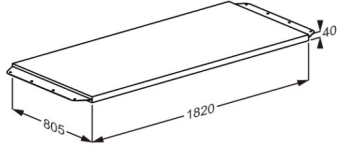

<b>Produkt</b>	Matratze für CT 4000 und CT 4100
<b>Produktnummer</b>	R8487378
<b>Reinigung</b>	<p>Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.</p> <p>Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist.</p> <p><b>DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL:</b> Sprit (husholdningssprit) Tvättspirit 70% Safe Zone Plus Selgiene Extreme Accel PREvention Wipes Lingettes OxiGenesis from ENVIROX</p> <p>Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abtrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können.</p>