



PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	PLUS Duschsitz 450 mit Pflegeöffnung, manuell höhenverstellbar R7425112
Farbe	VVS:777515612 NRF:6317121 EAN:5708590359748 HMI: 124344 FDA: INN/D135865 Anthrazitgrau
Produkt- beschreibung	<div data-bbox="1050 495 1353 831" data-label="Image"> </div> <p>PLUS Duschsitze werden in verschiedenen Farben angeboten. Sie sind sowohl in fester Höhe, elektrisch höhen- verstellbar als auch manuell verstellbar, mit und ohne Pflegeöffnung sowie wahlweise mit Rücken- und Armlehnen erhältlich. Sie eignen sich zur Montage an der Wand oder zur Montage an Pressalit PLUS Wandschienen.</p> <p>PLUS Duschsitz 450 mit Pflegeöffnung und Rückenlehne. Um 380 mm höhenverstellbar, werkzeuglos einhängbar. Hochklappbare Sitz. Materialien: weicher und komfortabler PUR-Schaum mit Holzkern, montiert auf einem Aluminiumprofil. Exkl. Wandbefestigungen. <i>Ersetzt R7421</i></p>
Verstellung Höhenverstellung Produktkapazität	Höhenverstellbar 380 mm Maximales Anwendergewicht: 200 kg. Bei einer Belastung der Duschsitz mit 200 kg, wird jede Montageschraube folglich mit bis zu 24 kg. <i>PLUS Duschsitze wurden statisch mit einem Sicherheitsfaktor 1,5 getestet. Dies entspricht den Anforderungen der geltenden Normen.</i>
Materialien	Der Duschsitz besteht vorwiegend aus Aluminium mit einer 10 µm Eloxalschicht. Sitz und Rückenlehne sind aus PUR-Schaumstoff hergestellt. Beide sind mit einer Oberflächenbeschichtung versehen und mit PUR-Klarlack geschützt. Sitz beinhaltet Sperrholzkern. Interne Komponenten und Halterungen sind vorwiegend in Edelstahl ausgeführt. Die Kanten der Rückenlehne und Sitzträger sind mit Abdeckungen aus ABS-Polymer versiegelt.



PRESSALIT®

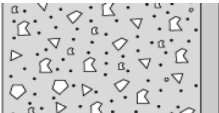
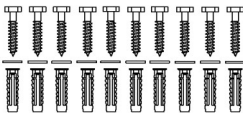

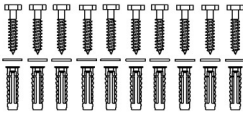
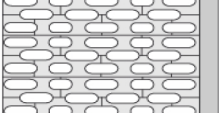
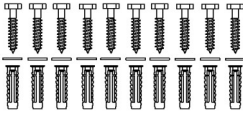
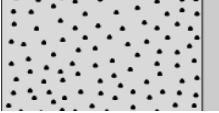
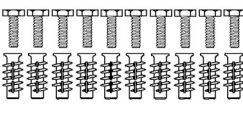
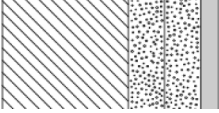
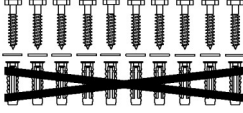
Produkt Produktnummer	PLUS Duschsitz 450 mit Pflegeöffnung, manuell höhenverstellbar R7425112
Ergonomie Funktionen	<p>Ergonomischer Sitz - Sitzfläche 450 x 437 mm. Das weiche und rutschfeste Material fühlt sich nie kalt an und bietet zugleich einen guten Sitzkomfort.</p> <p>Der Duschsitz ist hochklappbar, so dass nach Bedarf zusätzliche Bewegungsfläche geschaffen werden kann. Mit Hilfe eines einfachen und sicheres Klicksystems lasse sich Sitzfläche und Rückenlehne gleichzeitig einstellen.</p>
Garantie Reinigung	<p>Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.</p> <p>Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.</p> <p>Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist.</p> <p>DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Erisan OXY+ Tvättsprit 70% CaviCide surface disinfectant decontaminant cleaner Rodalon Desinfektionsspray Terralin protect (SCHÜLKE+) Dismonzon Plus (BODE Chemie GmbH)</p> <p>NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Wetrok Caledor (Wetrok) Petrosol Citro (Büfa) Wichtig: PUR-Oberflächen von PLUS Duschsitz und PLUS Rückenlehne erhalten ein anti-bakterielles Coating, das durch andere Reinigung als Wasser und Seife zerstört werden kann.</p> <p>Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abgetrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können.</p> <p>ENTKALKUNG DER ALUMINIUMTEILE: Pressalit empfiehlt, eventuelle Kalkablagerungen auf der Wandschiene und anderen Aluminiumteilen mit einer Mischung aus 3 Teilen 30%-iger Essigsäure und 7 Teilen Wasser zu entfernen. Nach Reinigung der Aluminiumteile mit dem Essigwasser, muss mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch nachgetrocknet werden.</p>



PRESSALIT®

Produkt	PLUS Duschsitz 450 mit Pflegeöffnung, manuell höhenverstellbar
Produktnummer	R7425112

Montage in verschiedenen Wandtypen

	Beton >B25 V8612 - Befestigungsmaterial, 10 Stck. Schlüsselschrauben Ø8 x 70, Dübeln SX10. Muss separat bestellt werden.	
	Vollziegel >= Mz12 V8612 - Befestigungsmaterial, 10 Stck. Schlüsselschrauben Ø8 x 70, Dübeln SX10. Muss separat bestellt werden.	
	Kalklochsandstein >= Hlz12 V8612 - Befestigungsmaterial, 10 Stck. Schlüsselschrauben Ø8 x 70, Dübeln SX10. Muss separat bestellt werden.	
	Porenbeton P4 V8662 - Befestigungsmaterial, 10 Stck. Senkkopfbolzen M8 x 35, Dübeln FTP M 8. Muss separat bestellt werden.	
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit 40-50 mm Holz-Hinterfüterung V8612 - Befestigungsmaterial, 10 Stck. Schlüsselschrauben Ø8 x 70, Dübeln SX10. Bei Holz-Hinterfüterung ist nur die Schraube zu verwenden (ohne Dübel). Muss separat bestellt werden.	



PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	PLUS Duschsitz 450 mit Pflegeöffnung, manuell höhenverstellbar R7425112
	<p>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten</p> <p>Befestigungsmaterial (10 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.</p>
	<p>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit integrierten Stahlplatten 2 mm</p> <p>Befestigungsmaterial (10 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.</p>
	<p>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) ohne Hinterfütterung</p> <p>Befestigungsmaterial (10 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.</p>

pressalit.com

Pressalit A/S
 Pressalitvej 1
 DK-8680 Ry
 Tel.: +45 8788 8788
 Fax: +45 8788 8789
 E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®