




# PRESSALIT®

<b>Product</b> <b>Varunummer</b>	PLUS duschsits 450, manuellt höjdregerbar R7114112
<b>Färg</b>	VVS:777514012 NRF:6317064 EAN:5708590358956 FDA:INN/D135865  Antracitgrå
<b>Beskrivning</b>	 <p>PLUS duschstolar erbjuds i flera färger. De finns både som fasta, elektriskt justerbara och manuellt justerbara, med och utan hål, och med möjlighet till rygg och armstöd. De är lämpliga för väggmontering eller för montering på Pressalit PLUS väggskenor.</p> <p>PLUS duschsits 450, uppfällbart. Höjdregerbart 240 mm, utan användning av verktyg. Material: Mjuk och skön PUR-skum med tråkärna, monterade på aluminiumprofil. Till eftermontering på existerande lodrät PLUS väggskena (medföljer ej). <i>Ersätter R7400</i></p>
<b>Justerbar</b> <b>Höjjustering</b> <b>Produktkapacitet</b>	Höjdregerbar 240 mm  Max brukarvikt: 200 kg När duschsitsen belastas med 200 kg, belastas varje fästskruv med 47 kg.  <i>PLUS duschsitsar testas statistiskt med säkerhetsfaktor 1,5. Detta är i enlighet med kraven i gällande standarder hjälpmiddel.</i>
<b>Material</b> <b>Ergonomi</b> <b>Funktioner</b>	Duschsätet är framställt i anodiserad aluminium och polyuretanskum som är gjutet runt en plywoodkärna och gjuten med en yta av klar PU-lack. Ändarna på sätet är förseglade med ändpluggar i ABS.  Ergonomisk sits - säte 450 x 437 mm. Sitsen är utförd i ett mjukt och halkfritt material som aldrig känns kallt samtidigt som det ger en god sittkomfort.  Sits kan fällas upp mot väggen efter användning.
<b>Garanti</b>	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.

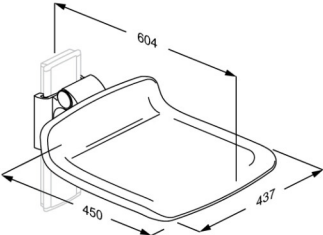

<b>Product</b>	PLUS duschsits 450, manuellt höjreglerbar
<b>Varunummer</b>	R7114112
<b>Rengöring</b>	<p>Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten.</p> <p>Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen.</p> <p><b>DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:</b>Erisan OXY+ Tvättspirit 70% CaviCide surface disinfectant decontaminant cleaner Rodalon Desinfektionsspray Terralin protect (SCHÜLKE+) Dismonzon Plus (BODE Chemie GmbH)</p> <p><b>INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:</b> Wetrok Caledor (Wetrok) Petrosol Citro (Büfa)</p> <p>Viktigt: PUR-ytor på PLUS duschsitsar och PLUS ryggstöd innehåller en antibakteriell beläggning som kan skadas om den används av annat än såpa och vatten för rengöring.</p> <p>Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.</p>