




PRESSALIT®

Article Numéro article	PLUS strapontin rabattable, montage fixe R5510000
Couleur	VVS:777531000 NRF:7501001 RSK:7973939 EAN:5708590306339 HMI: 130159 NBS:N13:448 FDA:INN/D135865 Blanc
Description	 Le strapontin rabattable, avec son siège ergonomique, est idéal quand on a besoin d'une place assise supplémentaire dans un espace réduit. Il s'agit typiquement de pièces où l'on peut avoir besoin de se reposer, par exemple la cuisine, l'ascenseur, un long couloir ou le coin habillage/déshabillage de la salle de bains. Les strapontins ne sont pas pour usage dans la zone de douche. PLUS strapontin rabattable, pour montage fixe. Matériaux : aluminium, résine thermodurcissable, matière synthétique. Livré sans vis de montage.
Réglage Capacité du produit	Montage fixe Poids maximum de l'utilisateur : 435 kg. Lorsque le siège est chargé de 435 kg, chaque vis de montage est chargée de 199 kg. <i>Les PLUS strapontin rabattable ont été testés statiquement avec un facteur de sécurité de 1,5, ce qui est exigé par les normes appliquées.</i>
Matériaux	Le strapontin est fait en résine thermodurcissable et en aluminium anodisé 10 microns. Les composants internes et les fixations sont principalement faits d'acier inoxydable.
Garantie	Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 5 ans à partir de la date de facturation.

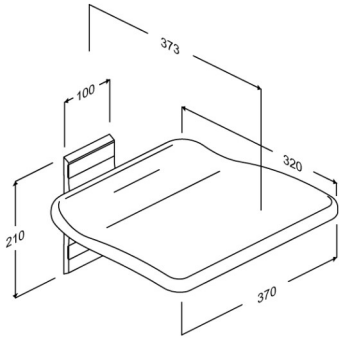

PRESSALIT®

Article	PLUS strapontin rabattable, montage fixe
Numéro article	R5510000
Nettoyage	Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs, corrosifs et contenant du chlore, car cela pourrait endommager la surface. Les nettoyants suivants ont été testés par Pressalit et peuvent être utilisés, s'ils sont dilués conformément aux indications notées sur l'emballage. NETTOYANTS DÉSINFECTANTS : Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% NETTOYANTS NON-DÉSINFECTANTS : Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Il importe d'insister qu'il faut toujours essuyer le produit avec un chiffon doux plissé dans l'eau propre immédiatement après le nettoyage, car certains matériaux seront progressivement tachetés et perdront leur couleur initiale, et le laquage de surface sera rongé. DÉTARTAGE DE L'ALUMINIUM : Pressalit recommande d'enlever le tartre à l'aide d'un chiffon imbibé d'une solution de 3 volumes de vinaigre pour 7 volumes d'eau et de sécher avec un chiffon rincé à l'eau claire et bien essoré.



PRESSALIT®

Article	PLUS strapontin rabattable, montage fixe
Numéro article	R5510000

Installation dans de différents types de mur

	Béton >B25 V8604 - Kit vis de montage, 4 vis fraisées Ø8 x 70, chevilles SX10. Doit être commandé séparément. 
	Brique pleine >= Mz12 V8604 - Kit vis de montage, 4 vis fraisées Ø8 x 70, chevilles SX10. Doit être commandé séparément. 
	Parpaing plein >= Hlz12 V8604 - Kit vis de montage, 4 vis fraisées Ø8 x 70, chevilles SX10. Doit être commandé séparément. 
	Béton cellulaire P4 V8654 - Kit vis de montage, 4 boulons fraisés M8 x 35, chevilles FTP M 8. Doit être commandé séparément. 
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée de bois V8604 - Kit vis de montage, 4 vis fraisées Ø8 x 70, chevilles SX10. N'utilisez pas les chevilles. Doit être commandé séparément. 



Article Numéro article	PLUS strapontin rabattable, montage fixe R5510000		
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée de contreplaqué 22 mm Vis de montage (4 pièces) doivent être acheté séparément. Pour les cloisons sèches imperméables, les chevilles bascule KD8 de fischer ou similaire peuvent être utilisées.		 
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée d'acier 2 mm Vis de montage (4 pièces) doivent être acheté séparément. Pour les cloisons sèches imperméables, les chevilles bascule KD8 de fischer ou similaire peuvent être utilisées.		 
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable Montage dans ce type de mur n'est pas recommandé - risque de blessure mortelle pour des personnes.		