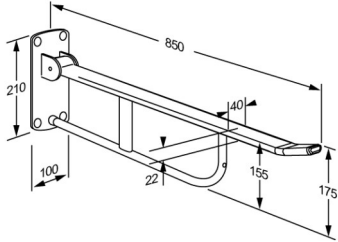




Product Varunummer	VALUE II toalettarmstöd, fast höjd R1109000
Färg	VVS:615891100 NRF:6191057 RSK:8487434 EAN:5708590367576 HMI: 123560 Vit
Beskrivning	 <p>VALUE II toalettarmstöd, fast höjd, uppfällbara, total längd 850 mm. Den ergonomiska designen ger ett fast och skönt grepp och det är lätt att känna var stöden slutar. Inkl. monteringskruvar för massiv sten. Pluggs måste beställas separat.</p> <p>VALUE II toalettarmstöd, fast höjd, uppfällbara, total längd 850 mm. Den ergonomiska designen ger ett fast och skönt grepp och det är lätt att känna var stöden slutar. Material: Rilsan-belagt stål, tryckformat aluminium, plast. Inkl. monteringskruvar för massiv sten. Pluggs måste beställas separat.</p>
Justerbar	Fast höjd
Produktkapacitet	Max belastning: 120 kg. När toalettarmstödet belastas med 120 kg, belastas varje fästskruv med 242 kg.
Material	Toalettarmstöden är tillverkad av rostfritt stål med en Rilsan-belagd yta som är skön att röra vid, lätt att rengöra och skyddar mot rost.
Ergonomi	Den ergonomiska designen ger ett fast och skönt grepp och det är lätt att känna var stöden slutar. Bred stödyta för hand och arm. En bra hjälp när du sitter, står eller flyttning till och från toaletten.
Funktioner	Stöden kan fällas upp när den inte används.
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.

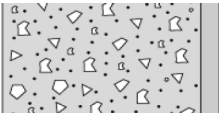
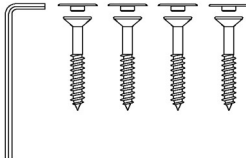

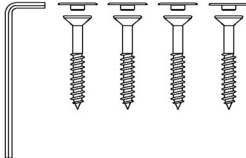
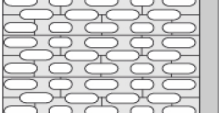
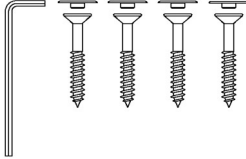
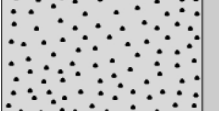
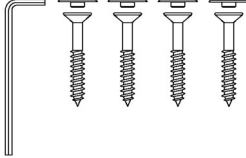
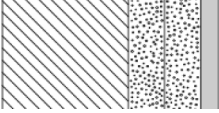
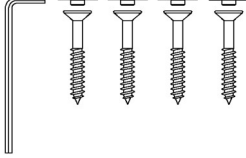


Product	VALUE II toalettarmstöd, fast höjd
Varunummer	R1109000
Rengöring	<p>Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. För rengöring av ytan kan klorinbaserade desinficeringsmedel användas enligt produktspecifikationen och säkerhetsföreskrifterna för de här produkterna.</p> <p>Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen.</p> <p>DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättspit 70% WipeClean UniversalCleaning Chlorine Disinfection Wipes Klorilli (Kilto Clean)</p> <p>INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.</p>
Överensstämmelses deklaration	Denne produkt är tillverkad i enlighet med förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter.

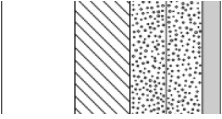
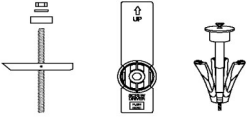
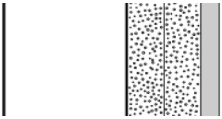
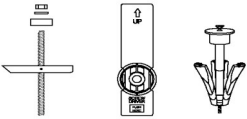
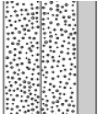



Product	VALUE II toalettarmstöd, fast höjd
Varunummer	R1109000

Montage i olika väggtyper

	Betong >B25 V8593 - 4 st. skruvar Ø10 x 80 försänkt, med vita täckknappar er inkluderat. Pluggs måste beställas separat.	
	Mursten >= Mz12 V8593 - 4 st. skruvar Ø10 x 80 försänkt, med vita täckknappar er inkluderat. Pluggs måste beställas separat.	
	Cementsten >= H1z12 V8593 - 4 st. skruvar Ø10 x 80 försänkt, med vita täckknappar er inkluderat. Pluggs måste beställas separat.	
	Lättbetong P4 V8593 - 4 st. skruvar Ø10 x 80 försänkt, med vita täckknappar er inkluderat. Pluggs måste beställas separat.	
	Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä V8593 - 4 st. skruvar Ø10 x 80 försänkt, med vita täckknappar er inkluderat. Pluggs måste beställas separat.	



Product Varunummer	VALUE II toalettarmstöd, fast höjd R1109000
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfänér Monteringskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande. 
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm Monteringskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande. 
	Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2 Montering av produkter i denna typ av vägg rekommenderas inte, finns en stor risk att kroppsskada uppstår. 

Inkl. skruvar till vägg. Det är installatörens ansvar att säkerställa att korrekta pluggs användas. Se monteringsanvisning.