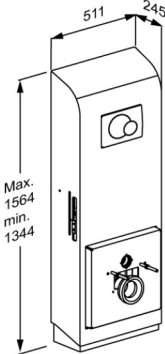




Produkt Produktnummer	SELECT TL5 Elektrisch Toilet-Lifter mit Neigungsfunktion, für Wandablauf R9221000
Farbe	VVS: 617989900 NRF: 1617110 EAN: 5708590390963 FDA: IKX/D319729 Weiß
Produkt- beschreibung	 SELECT Toilettenlifte sind in verschiedenen Modellen und Farben sowohl für den Wand- als auch für den Bodenablauf erhältlich. Es gibt sie in elektrisch oder manuell höhenverstellbarer Ausführung, mit oder ohne Seitenprofil und für Standard-WC-Becken und Dusch-WCs. Bei der Entwicklung wurde besonderer Wert auf Hygiene und leichte Reinigung gelegt. SELECT TL5 WC-Lifter, für Wandablauf. Inkl. eingebauter Spülkasten mit Doppelspülung 3/6 Liter (kann auf 2/4 Liter eingestellt werden). Um 220 mm elektrisch höhenverstellbar mit integriertem Bedienelement am Stützklappgriff. Die Kippfunktion ist an die Höhenverstellung gebunden. Das bedeutet, dass die Toilettenaufsatzplatte kippt, wenn sie in die obere Position angehoben wird, und sich zurückstellt, wenn das Gerät abgesenkt wird. Die maximale Neigung beträgt 8 Grad. WC-Keramik, Toilettensitz und Stützklappgriffe (für der Höhenverstellung notwendig) müssen separat bestellt werden. Exskl. Wandbefestigungen.
Verstellung Höhenverstellung Produktkapazität	Höhenverstellbar 220 mm Maximales Anwendergewicht: 150 kg (MUM). Maximale Belastung (SWL): 235 kg (Anwender + Zubehör). Bei einer Belastung des WC-Lifters mit 235 kg, wird jede Montageschraube folglich mit bis zu 65 kg belastet. <i>Der WC-Lifter wurde statisch mit einer Belastung von 587,5 kg, an der Montagestelle der Toilette, getestet. Dies entspricht den Anforderungen der geltenden Normen. Bitte beachten Sie, dass die meisten Toiletten, die am WC-Lifter montiert werden können, auf 400 kg getestet wurden.</i>



Produkt	SELECT TL5 Elektrisch Toilet-Lifter mit Neigungsfunktion, für Wandablauf
Produktnummer	R9221000
Aufwärtsgeschwindigkeit	Geschwindigkeit aufwärts: 7 mm/s Geschwindigkeit abwärts: 7 mm/s
Geräusch	50 dB
Materialien	Der Toilet-Lifter besteht aus Edelstahl und lackierter Stahl, die Abdeckverkleidung aus PMMA / ABS-Kunststoff
Ergonomie	Die integrierte Neigungsfunktion unterstützt eine natürliche Vorwärtsbewegung und macht den Übergang vom Sitzen zum Stehen für Nutzer mit eingeschränkter Mobilität einfacher und sicherer. Indem der Benutzer in eine optimale Position geneigt wird, verbessert der TL5 die Stabilität und verringert die körperliche Belastung bei Transfers. Dies fördert sowohl die Selbstständigkeit des Benutzers als auch die Arbeitsbedingungen des Pflegepersonals. Er ist für erwachsene Benutzer konzipiert und kann unter Aufsicht von Erwachsenen auch von Kindern genutzt werden.
Funktionen	• Kippfunktion • Elektrisch höhenverstellbar • Bedienelement am Stützklappgriff • Doppelspülsystem
Stromanschluss (V)	230
Motor	LA40
Steuerkasten	CA63
Stromverbrauch (max. Belastung)	Stromverbrauch, maximal Belastung: 420 W Stromverbrauch, standby: 0,5 W
Garantie	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.



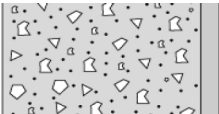
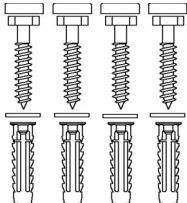
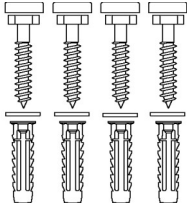
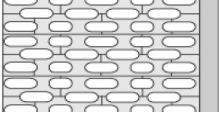
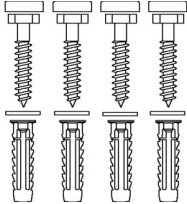
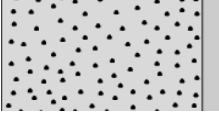
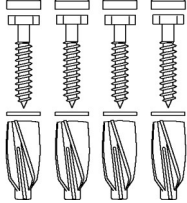
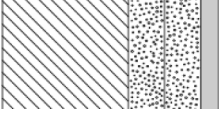
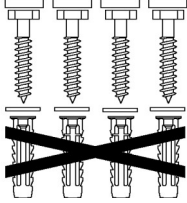
Produkt	SELECT TL5 Elektrisch Toilet-Lifter mit Neigungsfunktion, für Wandablauf
Produktnummer	R9221000
Reinigung	Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden oder ätzenden Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Zur Desinfektion der Oberflächen können chlorbasierte Desinfektionsmittel verwendet werden. Beachten Sie dabei die Produktspezifikationen und Sicherheitshinweise des Produkts. Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist. DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättssprit 70% NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abtrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können.
WEEE	Bitte kontaktieren Sie, im Falle des Entsorgungswunsches von Elektroschrott, die lokale Pressalit Tochtergesellschaft, die sich um die umweltgerechte Entsorgung, nach WEEE Vorschriften, kümmern wird.



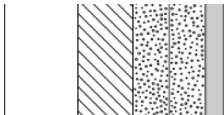
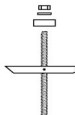
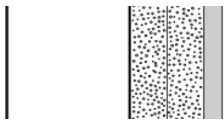
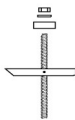
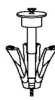
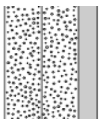
PRESSALIT®

Produkt	SELECT TL5 Elektrisch Toilet-Lifter mit Neigungsfunktion, für Wandablauf
Produktnummer	R9221000

Montage in verschiedenen Wandtypen

	Beton > B25 V8605 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln SX12, mit graue Abdeckung. Muss separat bestellt werden.	
	Vollziegel >= Mz12 V8605 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln SX12, mit graue Abdeckung. Muss separat bestellt werden.	
	Kalklochsandstein >= Hlz12 V8605 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln SX12, mit graue Abdeckung. Muss separat bestellt werden.	
	Porenbeton P4 V8655 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln GB14, mit graue Abdeckung. Muss separat bestellt werden.	
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit 40-50 mm Holz-Hinterfütterung V8605 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln SX12, mit weisse Abdeckung. Bei Holz-Hinterfütterung ist nur die Schraube zu verwenden (ohne Dübel). Muss separat bestellt werden.	



Produkt Produktnummer	SELECT TL5 Elektrisch Toilet-Lifter mit Neigungsfunktion, für Wandablauf R9221000	
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten Befestigungsmaterial (4 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.	  
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit integrierten Stahlplatten 2 mm Befestigungsmaterial (4 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.	  
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) ohne Hinterfütterung Montage an dieser Wandart wird nicht empfohlen, da akute Gefahr für Personenschäden besteht.	