



PRESSALIT®

Toiletzitting Dania met deksel, 50 mm verhoogd
Met stabilisatie buffers en voorzien van speciale scharnieren
aangepast aan de verhoogde toiletzitting. Inclusief spatscherm

Artikelnummer

R43000
VVS: 615697000
NRF: 6191645
EAN: 5708590186696
HMI: 88826
NBS: N13:300
DB: 2296032

Toiletzitting Dania, met stabilisatie buffers, met deksel, verhoogd 50 mm, incl. spatscherm. Met verhoogd scharnier met doorlopende scharnierpen






Kleur

Wit

Kenmerken

Toiletzitting Dania, met stabilisatie buffers, met deksel, verhoogd 50 mm, incl. spatscherm.
Met verhoogd scharnier met doorlopende scharnierpen

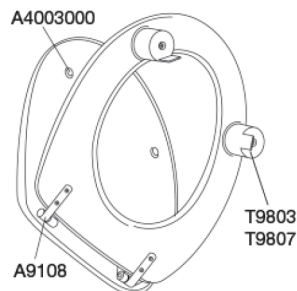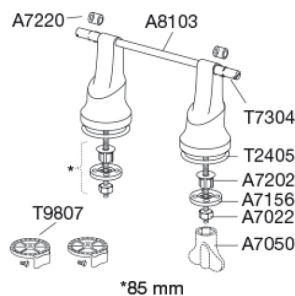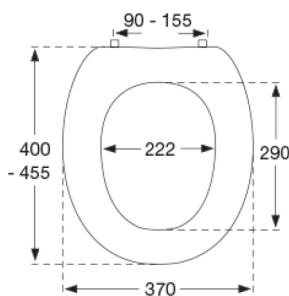

Materialen

Toiletzitting:

Het materiaal bestaat uit door-en-door gekleurd thermohardende kunststof (UF A 10 = ureaformaldehyde) en bevat geen stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. UF-plastic bestaat uit ongeveer 70% ureaformaldehyde, 30% cellulose en 5% mineralen, pigmenten, smeermiddel en vocht. Vrij formaldehyde verdampt tijdens het productieproces. Pressalit toiletzittingen zijn na uitharding ($< 0,01 \text{ mg/m}^3$) gemeten en geven aanzienlijk minder af dan de toegestane EU-grens van $0,08 \text{ mg/m}^3$.

Buffers:

EVA (copolymeer van ethyleen en vinylacetaat).

Scharnieren:

Roestvast staal en thermoplast.

Product capaciteit

Dit product is statisch getest tot 225 kg. Aangezien de Europese norm voor technische hulpmiddelen voor gehandicapten, BS/EN 12182:2012, een statische test met veiligheidsfactor 1,5 vereist, is de nominale maximum belasting voor dit product dus 150 kg.

Gewicht

4,4 kg



PRESSALIT®

Toiletzitting Dania met deksel, 50 mm verhoogd
Met stabilisatie buffers en voorzien van speciale scharnieren
aangepast aan de verhoogde toiletzitting. Inclusief spatscherm

Gewicht per stuk 4,7 kg

Gewicht per colli 4,7 kg

Aantal per colli 1

Aantal per pallet 0

Reiniging Gebruik een milde zeepoplossing om de toiletzitting schoon te maken. Zorg ervoor dat de zitting en scharnieren niet vochtig worden achtergelaten. Voor het desinfecteren van de zitting, b.v. ethanol 85% kan worden gebruikt. Zorg ervoor dat het product wordt afgeveegd met een zachte doek die is uitgewrongen in schoon water en onmiddellijk na desinfectie wordt afgedroogd met een zachte, droge doek. Vermijd contact van de zitting en scharnieren met schurende, bijtende of chloorhoudende stoffen. reinigingsmiddelen op basis van, omdat deze schade kunnen veroorzaken of vliegroeist kunnen veroorzaken. Zorg er daarom bij het schoonmaken van het closet dat de zitting en het deksel rechtop blijven staan totdat al het schoonmaakmiddel is weggespoeld.

Garantie Pressalit verleent 10 jaar garantie op uw closetzitting tegen overlegging van het aankoopbewijs. Neem in geval van een klacht contact op met de dealer of winkel waar u het artikel hebt gekocht. Bij reclamaties over materiaal- en/of fabricagefouten en/of beperkingen in de functionaliteit die optreden binnen 10 jaar bij correct gebruik en reiniging van de closetzitting (wij behouden ons het recht voor dit te onderzoeken in onze fabriek), zendt Pressalit reserveonderdelen of vervangt de closetzitting door hetzelfde of een soortgelijk model. Als de kleur niet langer beschikbaar is, behoudt Pressalit zich het recht voor de closetzitting te vervangen door een soortgelijk model in de kleur wit. Bij vervanging of levering van een reserveonderdeel wordt de garantieperiode niet verlengd of vernieuwd. Is vervanging niet mogelijk, dan heeft Pressalit het recht om in plaats daarvan de koopsom terug te betalen.

Aanpassingen in het assortiment, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

pressalit.com
