




Product Artikelnummer	VALUE muurframe voor wastafel, in hoogte verstelbaar met gasdrukcilinder R1210000
Kleur	Wit
Beschrijving	<p>VVS:654011300 NRF:6191663 EAN:5708590176710 HMI: 25575 NBS:N13:30,335 FDA:ILW/D142473</p>  <p>Montageplaat incl. muurframe voor wastafel, met gasdrukcilinder in hoogte verstelbaar 320 mm (aanbeveling R2065/R2067 flexibel aan-/afvoer systeem). Incl. Bevestigingsset voor bakstenen muur</p> <p>Montageplaat incl. muurframe voor wastafel,, in hoogte 320 mm verstelbaar met gasdrukcilinder (aanbeveling R2065/R2067 flexibel aan-/afvoersysteem). Incl. bevestigingsbouten voor wastafel, incl. Bevestigingsset voor baksteen wand</p>
Verstelbaarheid	In hoogte verstelbaar
Afstelhoogte	315 mm
Product capaciteit	<p>Maximale belasting: 80 kg. Geschikt voor wastafels die tot 22 kg wegen. Wanneer de wastafel is geladen met 80 kg, zal elke wandbevestiging met 20 kg zijn belast.</p> <p><i>Het wastafel muurframe moet het gewicht van het wastafel kunnen dragen, alsmede het gewicht van de persoon die tegen de wastafel leunend of die de wastafel gebruikt om uit zittende positie te stijgen.</i></p> <p>De wastafel is niet bedoeld om een persoon te vervoeren, en de testmethoden die van toepassing zijn op het muurframe van het wastafel weerspiegelen dit: ISO 17966 schrijft een statische test voor aan de voorzijde van de wastafel bij 75% van het maximale gebruikersgewicht, d.w.z. Wanneer de maximale belasting op een wastafel muurframe wordt gegeven als 80 kg en de wastafel 22 kg weegt, is het – volgens ISO 17966 – het equivalent van een gebruiker met een gewicht van 77 kg leunend op de voorzijde van de wastafel.</p>



Product Artikelnummer	VALUE muurframe voor wastafel, in hoogte verstelbaar met gasdrukcilinder R1210000
Materialen	Basismateriaal: staal Oppervlakte materiaal: Rilsan
Functie	In hoogte 320 mm verstelbaar mm.
Garantie	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode vanaf vijf jaar na de factuurdatum.
Reiniging	<p>Het product kan worden gereinigd met een milde zeepreinigder. Gebruik geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen, aangezien dit kan leiden tot beschadiging van het oppervlak. Desinfecteermiddelen op chloorbasis voor het desinfecteren van oppervlakken mogen worden gebruikt volgens de productspecificatie en veiligheidsmaatregelen voor deze producten.</p> <p>De volgende reinigingsmiddelen zijn door Pressalit getest en goedgevonden voor zover de aanbevolen concentratie op de verpakking wordt aangehouden.</p> <p>DESINFECTEERMIDDELEN: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70%</p> <p>NIET-DESINFECTERENDE MIDDELEN: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Het oppervlak moet direct na het schoonmaken worden afgenomen met een zachte met schoon water bevochtigde, doek daar sommige oppervlakken anders kunnen verkleuren of vlekken ontstaan en het oppervlak daardoor aangetast raakt.</p>
Conformiteits verklaring	Het product is geproduceerd in overeenstemming met relevante eisen in: - Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen - Machinerichtlijn 2006/42/EEG

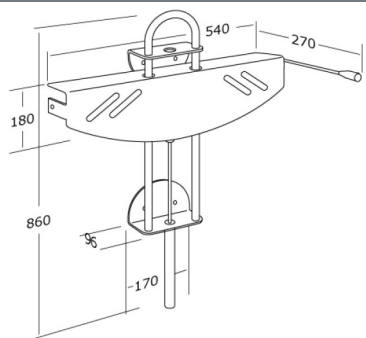

PRESSALIT®

Product	VALUE muurframe voor wastafel, in hoogte verstelbaar met gasdrukcilinder
Artikelnummer	R1210000

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®