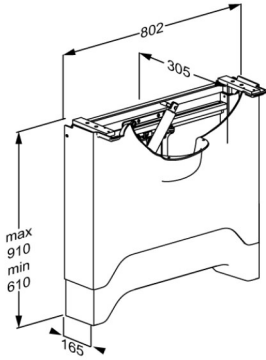




Produkt Varenummer	MATRIX elektrisk vaskophæng, højrevendt, højde- og sideværts regulérbart R485019000
Farve	Hvid
Produktbeskrivelse	<p>VVS: 654022900 NRF: 6132473 EAN: 5708590381053 HMI: 138118</p>  <p>MATRIX vaskophæng er skræddersyet til MATRIX håndvaske. De fås i elektrisk og manuelt højdejustérbare og sideværts justerbare versioner, såvel som fastmonterede versioner, alle med en hygiejnisk installationsinddækning til at skjule VVS-installationerne.</p> <p>MATRIX ANGLE DEEP vaskophæng, højre, vægmonteret, med hvid installationsinddækning, inkl. til- og afløbssystem og vandlås (R2058). Elektrisk højderegulérbart 300 mm med trykknapper (i vask), og manuelt sideværts regulérbart 500 mm. Inkl. monteringsbolte til håndvask (Kan kun anvendes med MATRIX ANGLE DEEP håndvaske, R2150/R2151). Materialer: Pulverlakeret rustfrit stål, PMMA, ABS og polystyren. Ekskl. monteringskruger til væg.</p>
Justerbarhed	Højde- og sideværts regulérbart
Reguleringshøjde	300 mm
Produktkapacitet	<p>Maksimal brugervægt (MUM): 160 kg. Maksimal belastning (SWL): 150 kg. Passer til vaske der vejer op til 30 kg. Når vasken belastes med 150 kg, belastes hver vægmonteringskruger med 60 kg. <i>Vaskophæng skal kunne bære vaskens vægt, samt vægten af en person der støtter sig til vasken, eller bruger vasken til at trække sig op ved.</i> Hverken vask eller vaskophæng er personbærende, og de testmetoder der er foreskrevet for vaskophæng afspejler dette: ISO 17966 foreskriver at vaskophæng testes statisk, på vaskens forkant, med 75% af maksimal brugervægt, dvs at når maksimalbelastningen på et vaskophæng er 150 kg og vasken vejer 30 kg, så svarer det, iflg. ISO 17966, til at en bruger der vejer 160 kg støtter sig til vasken.</p>
Hastighed opad	Hastighed op: 11,75 mm/s Hastighed ned: 11,75 mm/s



PRESSALIT®

Produkt	MATRIX elektrisk vaskophæng, højrevendt, højde- og sideværts regulérbart
Varenummer	R485019000
Støjniveau	50 dB
Materialer	Pulverlakeret rustfrit stål, PMMA, ABS og polystyren.
Strømforsyning (V)	230
Aktuator (motor)	LA40 HB
Styreboks	CA63
Strømforbrug (max. belastning)	Strømforbrug, maksimal belastning: 66 W Strømforbrug, standby: 0,5 W
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.

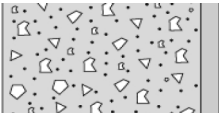
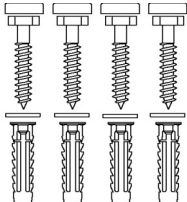

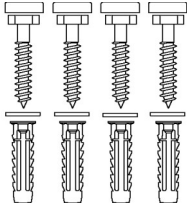
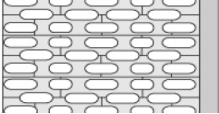
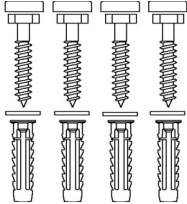
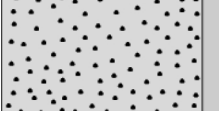
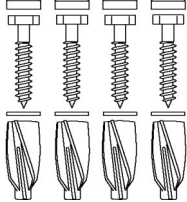
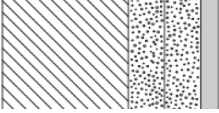
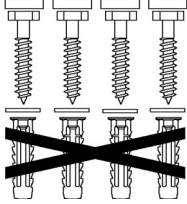


Produkt	MATRIX elektrisk vaskophæng, højrevendt, højde- og sideværts regulérbart
Varenummer	R485019000
Rengøring	<p>Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade. Klorbaserede desinfektionsmidler kan bruges til desinfektion af overflader i henhold til produktspecifikationen og sikkerhedsforanstaltninger for disse produkter.</p> <p>Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen.</p> <p>DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvættsprit 70%</p> <p>IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.</p>
WEEE	Kontakt Pressalit eller Pressalits distributør som vil sørge for, at elektrisk affald bortskaffes i henhold til WEEE-direktivet.
Overensstemmelses- erklæring	Dette produkt er fremstillet i henhold til relevante krav i: - Rådets forordning (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr - Maskindirektivet 2006/42/EØF - RoHS-direktivet 2011/65/EU.

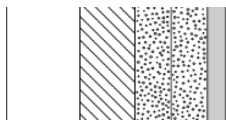
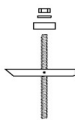

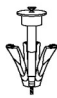
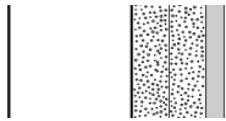
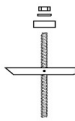

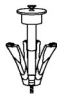
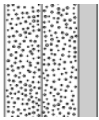
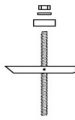




Produkt	MATRIX elektrisk vaskophæng, højrevendt, højde- og sideværts regulérbart
Varenummer	R485019000

Montering i forskellige vægtyper

	Beton >B25 V8605 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12, med grå dækknapper. Skal bestilles separat.	
	Mursten >= Mz12 V8605 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12, med grå dækknapper. Skal bestilles separat.	
	Kalksten >= Hz12 V8605 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12, med grå dækknapper. Skal bestilles separat.	
	Gasbeton P4 V8655 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø10 x 70, dübel GB14, med grå dækknapper. Skal bestilles separat.	
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, med træforstærkning V8605 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12, med hvide dækknapper. Dübler skal ikke anvendes. Skal bestilles separat.	



Produkt Varenummer	MATRIX elektrisk vaskophæng, højrevendt, højde- og sideværts regulérbart R485019000	
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med 22 mm krydsfinér Befæstigelse til væg (4 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.	  
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med stålplader 2 mm Befæstigelse til væg (4 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.	  
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast Befæstigelse til væg (4 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.	  

Det er installatørens ansvar at sikre, at korrekt vægbefæstigelse anvendes.