




Produkt	VALUE Stützklappgriff 850 mm, mit Bedienpanel, linksbedient
Produktnummer	R102685000
Farbe	VVS:615892602 NRF:1617150 EAN:5708590391069 Weiß 
Produktbeschreibung	VALUE und VALUE II Stützklappgriffe mit Montageprofil sind für die Verwendung mit SELECT TL5 WC-Liftern entwickelt. Die elektrische Höhenverstellung des WC-Liftern ist nur mit dem Bedienpanel auf dem Stützklappgriff möglich. VALUE Stützklappgriff mit Bedienpanel, 850 mm. Höhenverstellbar um 150 mm. Hochklappbar. Linksbedient. Nur für TL5 Toilet-Lifter geeignet. Montageprofil mitgeliefert. Rechts vom Benutzer montiert. Materialien: Rilsan-beschichteter Stahl, Aluminiumdruckguss, Endkappen in Nylon (PA). Excl. Befestigungsmaterial.
Verstellung	Höhenverstellbar
Höhenverstellung	150 mm
Produktkapazität	Maximale belastbarkeit: 120 kg
Materialien	Der Stützklappgriff besteht aus Stahl, mit einer Rilsan® (ein Hochleistungs-Polyamid auf Bio Basis) Beschichtung. Die Oberfläche ist ausgezeichnete gegen Korrosion geschützt und leicht zu reinigen. Die Endkappen werden aus PA Nylon (teilkristalliner Thermoplast) mit herausragender Verschleißfestigkeit hergestellt und das Befestigungsprofil besteht aus einem Aluminiumdruckguss.
Ergonomie	Eine gute Hilfe beim Sitzen, Stehen oder Transferieren auf der Toilette.
Garantie	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.



Produkt	VALUE Stützklappgriff 850 mm, mit Bedienpanel, linksbedient
Produktnummer	R102685000
Reinigung	Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden oder ätzenden Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Zur Desinfektion der Oberflächen können chlorbasierte Desinfektionsmittel verwendet werden. Beachten Sie dabei die Produktspezifikationen und Sicherheitshinweise des Produkts. Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist. DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättssprit 70% WipeClean UniversalCleaning Chlorine Disinfection Wipes Klorilli (Kiilto Clean) NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abtrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können.
WEEE	Bitte kontaktieren Sie, im Falle des Entsorgungswunsches von Elektroschrott, die lokale Pressalit Tochtergesellschaft, die sich um die umweltgerechte Entsorgung, nach WEEE Vorschriften, kümmern wird.

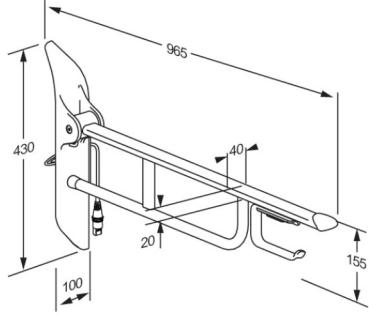

PRESSALIT®

Produkt	VALUE Stützklappgriff 850 mm, mit Bedienpanel, linksbedient
Produktnummer	R102685000

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®

8. juli 2026