




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	MCT 5 mobilt skifteleje , manuelt højderegulérbart R9502721000
Farve	Hvid
Produktbeskrivelse	EAN:5708590389882 FDA:INW/D546021  Pressalit tilbyder et bredt program af mobile, fleksible, højdejusterbare og vægmonterede bruse- og skiftelejer i høj kvalitet. De er designet til at yde en stabil platform for omklædning, vask og pleje af voksne og børn. Lejerne kan anvendes i både skoler, institutioner, hospitaler og i private hjem, de har alle holdbare og slidstærke overflader som er både komfortable og meget rengøringsvenlige. Design og fleksibilitet sikrer optimale arbejdsbetingelser for hjælperen samt et højt komfort- og sikkerhedsniveau for brugeren. MCT 5 mobilt skifteleje, 700 x 2100 mm, to nedfældbare sider. Manuelt højderegulérbart med fodpedal (hydraulisk). 500 mm højderegulering fra 550 til 1050 mm. Madras skal bestilles separat.
Justerbarhed Reguleringshøjde Produktkapacitet	Højderegulérbar 500 mm Maksimal brugervægt (MUM): 200 kg. Maksimal belastning (SWL): 205 kg. <i>Briksen er testet statisk med 307,5 kg, i henhold til kravene i ISO 17966 standarden, som kræver test med en sikkerhedsfaktor på 1,5.</i>
Materialer	Kunststof, Compact Density Fiberboards (CDF) og lakeret stål.

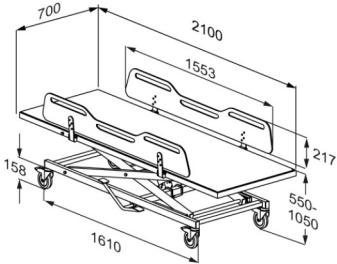

Produkt	MCT 5 mobilt skifteleje , manuelt højderegulérbart
Varenummer	R9502721000
Ergonomi	• De ergonomisk designede sengeheste har en praktisk sænket midterdel, som giver bedre adgang og arbejdsmiljø for plejeren både ved forflytning, skiftning og påklædning af brugeren. • Énhånds betjente sengeheste gør det muligt for plejeren at opretholde øjenkontakt såvel som fysisk kontakt med brugeren under hele processen. De nedfældbare sengeheste giver også let adgang fra alle fire sider af lejet. • De udskårne greb i sengehestene gør det muligt for brugerne selv at hjælpe til, når de vendes, hvilket motiverer fysisk træning. • Let at rengøre, med glatte kontaktflader der ikke samler snavs og bakterier.
Funktioner	• Lejet kan nemt flyttes fra rum til rum, og bruges af flere brugere. • Intuitive, brugervenlige og nedfældbare sengeheste med énhånds betjening.
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 3 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl. BEMÆRK Hvis produktet placeres i salt- eller klorholdige omgivelser, reduceres garantien fra de normale 3 år til 1 år. Salt og klor kan have en ætsende virkning på produktets komponenter og vil nedsætte produktets forventede levetid.



Produkt	MCT 5 mobilt skifteleje , manuelt højderegulérbart
Varenummer	R9502721000
Rengøring	Produktet rengøres med en fugtig klud, der er vredet op i en mild sæbeblanding, som f.eks. et universalrengøringsmiddel. Efter rengøring er det vigtigt at aftørre produktet med en tør, blød klud. Dette trin er afgørende for at forhindre misfarvning af materialerne. Derudover er det en hjælp til at forhindre en potentiel forringelse af overfaldemalingen. Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen. DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvættsprit 70% Accel PREvention Wipes Lingettes OxiGenesis from ENVIROX IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.
Overenstemmelses- erklæring	Dette produkt er fremstillet i henhold til relevante krav i rådets forordning (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr.



PRESSALIT®

Produkt	MCT 5 mobilt skifteleje , manuelt højderegulérbart
Varenummer	R9502721000

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®