




# PRESSALIT®

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Product</b><br><b>Artikelnummer</b>              | VALUE IV douchezitting, vaste montage.<br>R1620000112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Kleur</b>                                        | VVS: 777525312<br>NRF: 6314097<br>RSK: 8162781<br>EAN: 5708590377711<br>HMI: 124483<br>DB: 2296038<br>FDA: INN/D135865<br>Antracietgrijs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Beschrijving</b>                                 |  <p>VALUE IV opklapbare douchezitting en rugleuning verzorgen een eenvoudige oplossing voor gebruikers die moeten gaan zitten tijdens het douchen.</p> <p>VALUE IV douchezitting. Vaste montage. De zitting is opklapbaar.<br/>Materialen: gegoten aluminium, Rilsan-gecoat roestvrijstaal en vacuüm-gegoten polyethyleen (PE).<br/>Inclusief bevestigingsbouten voor bakstenen muur. De pluggen zijn afhankelijk van het wandtype en moeten apart besteld worden.</p> |
| <b>Verstelbaarheid</b><br><b>Product capaciteit</b> | Vaste montage<br><br>Maximale belasting: 135 kg.<br>Wanneer de zitting belast is met 135 kg, is elke wandbevestiging belast met 125 kg.<br><br><i>Dit product is statisch getest met een veiligheidsfactor van 1,5 wat een vereiste is volgens de toegepaste normen voor ondersteunende hulpmiddelen..</i>                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Materialen</b>                                   | Het wandprofiel is gemaakt van gegoten aluminium en het frame is gemaakt van roestvrijstaal met Rilsan-coating. Rilsan biedt een goede bescherming tegen corrosie en is comfortabel om aan te raken en eenvoudig te reinigen. De zitting is gemaakt van vacuüm-gegoten polyethyleen (PE).                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Garantie</b>                                     | Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode vanaf vijf jaar na de factuurdatum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

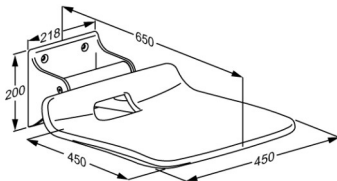

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Product</b>       | VALUE IV douchezitting, vaste montage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Artikelnummer</b> | R1620000112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Reiniging</b>     | <p>Het product kan worden gereinigd met een milde zeepreiniger.<br/>Gebruik geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen, aangezien dit kan leiden tot beschadiging van het oppervlak.<br/>Desinfecteermiddelen op chloorbasis voor het desinfecteren van oppervlakken mogen worden gebruikt volgens de productspecificatie en veiligheidsmaatregelen voor deze producten.</p> <p>De volgende reinigingsmiddelen zijn door Pressalit getest en goedgevonden voor zover de aanbevolen concentratie op de verpakking wordt aangehouden.</p> <p><b>DESINFECTEERMIDDELEN:</b><br/>Clinimax Difficil-S<br/>Erisan OXY+<br/>Sprit (husholdningssprit)<br/>Suma Bac D10<br/>Virkon<br/>Rodalon Desinfektionsspray<br/>Lysoformin Spezial<br/>CaviCide<br/>Sufanios Premium<br/>Tvättsprit 70%<br/>WipeClean UniversalCleaning<br/>Chlorine Disinfection Wipes<br/>Klorilli (Kiilto Clean)</p> <p><b>NIET-DESINFECTERENDE MIDDELEN:</b><br/>Suma Star free D1<br/>Taski 100<br/>Taski 200<br/>Milizid Citro</p> <p>Het oppervlak moet direct na het schoonmaken worden afgenomen met een zachte met schoon water bevochtigde, doek daar sommige oppervlakken anders kunnen verkleuren of vlekken ontstaan en het oppervlak daardoor aangetast raakt.</p> |



# PRESSALIT®

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| <b>Product</b>       | VALUE IV douchezitting, vaste montage. |
| <b>Artikelnummer</b> | R1620000112                            |

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

# PRESSALIT®