




<b>Produkt</b> <b>Varenummer</b>	PLUS brusesæde 450, manuelt højderegulérbart R7114112
<b>Farve</b>	VVS:777514012 NRF:6317064 EAN:5708590358956 FDA:INN/D135865  Antracitgrå
<b>Produktbeskrivelse</b>	 <p>PLUS brusesæder tilbydes i flere farver. De fås både som fastmonterede, elektrisk regulérbare og manuelt regulérbare, med og uden hul, samt med tilvalg af ryg- og armlæn.</p> <p>De er velegnede til vægmontering eller til montering på Pressalit PLUS vægskinner.</p> <p>PLUS brusesæde 450. Manuelt højderegulérbart 240 mm, uden brug af værktøj. Sædet er opklappeligt.</p> <p>Materialer: Blødt og komfortabelt PUR-skum med trækerne, monteret på aluminiumprofil.</p> <p>Til eftermontering på lodret PLUS vægskinne (medfølger ikke). <i>Erstatter R7400</i></p>
<b>Justerbarhed</b> <b>Reguleringshøjde</b> <b>Produktkapacitet</b>	Højderegulérbar 240 mm  Maksimal brugervægt: 200 kg. Når sædet belastes med 200 kg, belastes hver monteringskrue med 47 kg. <p><i>PLUS brusesæder er testet statisk med en sikkerhedsfaktor på 1,5 i henhold til de anvendte hjælpemiddelstandarder.</i></p>
<b>Materialer</b> <b>Ergonomi</b>	Brusesædet er hovedsagelig fremstillet af aluminium anodiseret 10 my. Sædet består af polyurethanskum der er støbt omkring en kerne af krydsfinér, og omstøbt med en overflade af klar PU-lak. Afslutningerne på sædet er forseglet med endepropper i ABS. <p>Ergonomisk designet sæde - siddeflade 450 x 437 mm. Sædet er lavet af et blødt og skridsikkert materiale, der aldrig føles koldt, samtidig med at det giver en god siddekomfort.</p>



<b>Produkt</b>	PLUS brusesæde 450, manuelt højderegulerbart
<b>Varenummer</b>	R7114112
<b>Funktioner</b>	Sædet kan klappes op, når det ikke er i brug.
<b>Garanti</b>	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.
<b>Rengøring</b>	<p>Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade.</p> <p>Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen.</p> <p><b>DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:</b> Erisan OXY+ Tvættsprit 70% CaviCide surface disinfectant decontaminant cleaner Rodalon Desinfektionsspray Terralin protect (SCHÜLKE+) Dismonzon Plus (BODE Chemie GmbH)</p> <p><b>IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:</b> Wetrok Caledor (Wetrok) Petrosol Citro (Büfa)</p> <p>Vigtigt: PUR-overflader på PLUS brusesæder og PLUS ryglæn indeholder en anti-bakteriel coating, som kan blive ødelagt såfremt der anvendes andet end vand og sæbe til rengøring.</p> <p>Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.</p> <p><b>AFKALKNING AF ALUMINIUMDELE:</b> Pressalit anbefaler at man fjerner kalkaflejringer fra aluminiumdele ved hjælp af en opløsning af 3 dele 30% eddikesyre og 7 dele vand. Når aluminiumdelene er vasket af i denne opløsning, tørres de efter med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand.</p>

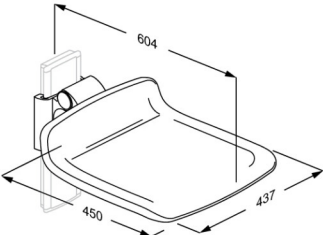

PRESSALIT®

<b>Produkt</b>	PLUS brusesæde 450, manuelt højderegulerbart
<b>Varenummer</b>	R7114112

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

PRESSALIT®