




Product Artikelnummer	VALUE toiletsteun, 850 mm R1085000
Kleur	VVS:615892502 NRF:6191056 RSK:7828178 EAN:5708590346861 HMI: 138199 FDA:ILS/D135866 Wit
Beschrijving	 <p>VALUE en VALUE II toiletsteunen met ALBA montage profielen, die speciaal werden ontworpen voor gebruik met de SELECT TL3 en TL4 hoog-laag toiletsystemen. De elektrische hoogteverstelling wordt geregeld met het bedieningspaneel aan de toiletsteun.</p> <p>VALUE toiletsteun, 850 mm, opklapbaar, in hoogte verstelbaar 150 mm zonder gebruik van gereedschap (linksbediening). Biedt stevige ondersteuning bij zitten, staan of overstappen van en naar een toilet. Materialen: Staal met een Rilsan-coating, de eindkappen zijn vervaardigd uit nylon (PA). Montageprofiel in gegoten aluminium. Voor montage op TL3/TL4 hoog/laag handmatig toiletsysteem, ALBA-vleugel montageprofiel inbegrepen. Montage rechts van de gebruiker.</p>
Verstelbaarheid	In hoogte verstelbaar
Afstelhoogte	150 mm
Product capaciteit	Maximale belasting: 120 kg.
Materialen	De toiletsteun is vervaardigd uit staal met een Rilsan-coating, die comfortabel aanvoelt, eenvoudig te reinigen is en het metaal beschermt tegen corrosie. De eindkappen zijn vervaardigd uit nylon (PA). Montageprofiel in gegoten aluminium.
Garantie	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode van vijf jaar na de factuurdatum.

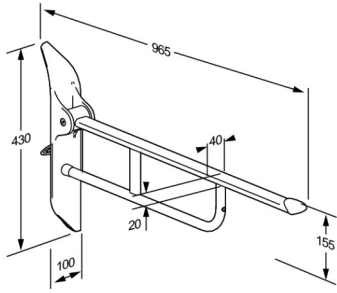

Product	VALUE toiletsteun, 850 mm
Artikelnummer	R1085000
Reiniging	<p>Het product kan worden gereinigd met een milde zeepreinigser. Gebruik geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen, aangezien dit kan leiden tot beschadiging van het oppervlak. Desinfecteermiddelen op chloorbasis voor het desinfecteren van oppervlakken mogen worden gebruikt volgens de productspecificatie en veiligheidsmaatregelen voor deze producten.</p> <p>De volgende reinigingsmiddelen zijn door Pressalit getest en goedgevonden voor zover de aanbevolen concentratie op de verpakking wordt aangehouden.</p> <p>DESINFECTEERMIDDELEN: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% WipeClean UniversalCleaning Chlorine Disinfection Wipes Klorilli (Kilto Clean)</p> <p>NIET-DESINFECTERENDE MIDDELEN: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Het oppervlak moet direct na het schoonmaken worden afgenomen met een zachte met schoon water bevochtigde, doek daar sommige oppervlakken ander kunnen verkleuren of vlekken ontstaan en het oppervlak daardoor aangetast raakt.</p>