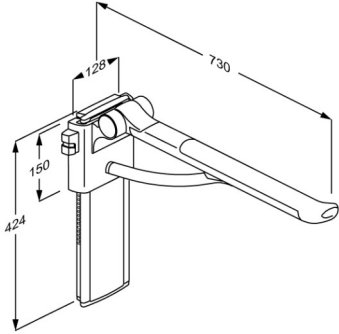




PRESSALIT®

Product Varunummer	PLUS toalettarmstöd, 700 mm, vänster hand manövrerad R370370108
Färg	NRF:6191081 EAN:5708590368061 HMI: 125878 FDA:ILS/D135866 Mörkblå (RAL 5011) 
Beskrivning	<p>Alla toalettstöd PLUS har en integrerad dämparfunktion som säkerställer att stödet sänks kontrollerat från vertikalt till horisontellt läge. Lämplig för användning med vägghängda toaletter där avståndet från vägg till front är 540/550 mm. <i>Ersätter utgående modeller R3150, RF150, R3165 och RF165.</i></p> <p>PLUS toalettarmstöd med fjäderbelastning. Total längd 730 mm. Ergonomisk design, som ger skön vila åt armarna och ett optimalt stöd när man skal resa eller sätta sig. Vänster hand manövrerad. Höjdreglerbart 240 mm. Avtagbart och uppfällbart. Antracitgrå täckplatta på lodrät väggskena. Material: Aluminium med greppfast tvåkomponentsplast. Exkl. monteringskruvar.</p>
Justerbar Höjdjustering Produktkapacitet	Höjdreglerbar 240 mm Maximal belastning: 150 kg. När toalettarmstöden belastas med 150 kg, belastas varja monterings skruv med 41 kg. <i>PLUS toalettarmstöd är testad statiskt med respektive 700 kg (tät på väggen), 425 kg (på midten) och 225 kg (på yterpunktet).</i>
Material	Toalettarmstöden är främst framställt i 10-mikrometer anodiserad aluminium. Greppen är belagda med en glidyta av termoplastisk elastomer (TPE) som omsluter en glasförstärkt nylonkärna. Interna komponenter och fästelement är främst gjorda av rostfritt stål.



Product Varunummer	PLUS toalettarmstöd, 700 mm, vänster hand manövrerad R370370108
Ergonomi	Stabilt stöd i form av ergonomiska toalettarmstöd ger ökad trygghet till den sittande brukaren och underlättar samtidigt den dagliga förflyttningen från och till hjälpmedel. Ett bra toalettarmstöd ger skön vila åt armarna och ett optimalt stöd när man ska resa eller sätta sig.
Funktioner	Toalettarmstöden är försedda med ett gångjärn som gör det möjligt att fälla upp toalettarmstöden mot väggen. Uppfällbara toalettarmstöd ger gott om plats i rummet när de inte används.
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.
Rengöring	<p>Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten.</p> <p>Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen.</p> <p>DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% Oxyplus-acid 2% (Diversey) WipeClean UniversalCleaning Chlorine Disinfection Wipes</p> <p>INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.</p>

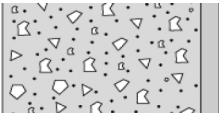
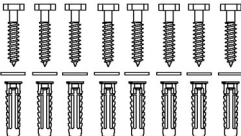

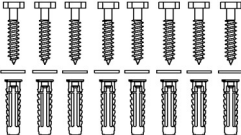
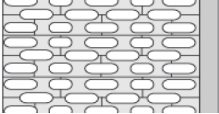
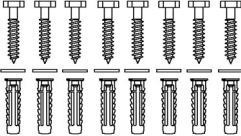
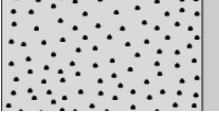
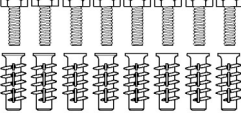
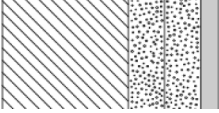
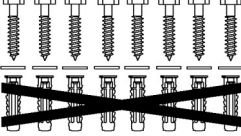


Product Varunummer	PLUS toalettarmstöd, 700 mm, vänster hand manövrerad R370370108
	<p>Avsedd användning Toalettarmstödet används som stöd för en person som ska sätta sig på eller resa sig från en toalett, eller vid sidoflyttning från rullstol.</p> <p>Användningsmiljö För användning inomhus i våtrumsmiljö, till exempel ett badrum, i privata hem, på vårdhem och sjukhus. Vid yrkesmässig användning är den förväntade livslängden 10 år. <i>Livscykeltest har utförts enligt ISO 17966:2016.</i></p> <p>För underhåll hänvisas till användnings – underhållsinstruktion som är anslutna till produkten, detta finns på hemsidan under "Downloads".</p> <p>Link til eBVD: https://www.ebvd.org/BMI/Document/Export/4210/0/Pdf</p> <p>Denna produkt har fått följande bedömning: Byggvarubedömningen: Accepteras</p>

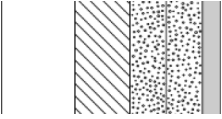
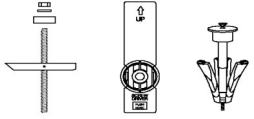
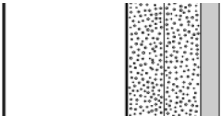
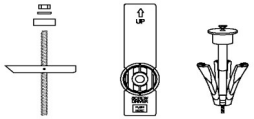
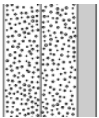


Product	PLUS toalettarmstöd, 700 mm, vänster hand manövrerad
Varunummer	R370370108

Montage i olika väggtyper

	Betong >B25 V8610 - Monteringsset, 8 st. skruvar Ø8 x 70, plugg SX10. Måste beställas separat.	
	Mursten >= Mz12 V8610 - Monteringsset, 8 st. skruvar Ø8 x 70, plugg SX10. Måste beställas separat.	
	Cementsten >= Hlz12 V8610 - Monteringsset, 8 st. skruvar Ø8 x 70, plugg SX10. Måste beställas separat.	
	Lättbetong P4 V8660 - Monteringsset, 8 st. bultar M8 x 35 försänkt, plugg FTP M 8. Måste beställas separat.	
	Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä V8610 - Monteringsset, 8 st. skruvar Ø8 x 70, plugg SX10. Anvend inte plugg. Måste beställas separat.	



Product Varunummer	PLUS toalettarmstöd, 700 mm, vänster hand manövrerad R370370108	
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfänér Monteringskruv (8 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.	
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm Monteringskruv (8 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.	
	Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2 Monteringskruv (8 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.	