




PRESSALIT®

<b>Produkt</b> <b>Varenummer</b>	PLUS klapsæde, manuelt højderegulerbart R5500112
<b>Farve</b>	VVS: 777531712 NRF: 7501063 EAN: 5708590328249 HMI: 130162 FDA: INN/D135865 Antracitgrå
<b>Produktbeskrivelse</b>	 <p>PLUS klapsæde. Manuelt højderegulerbart 240 mm uden brug af værktøj. Sædet er opklappeligt. Til eftermontering på lodret PLUS vægskinne (medfølger ikke). Klupsædet bør ikke anvendes i bruseområdet.</p> <p>PLUS klapsæde. Manuelt højderegulerbart 240 mm uden brug af værktøj. Materialer: Aluminium, hærdeplast og kunststof. Til eftermontering på lodret vægskinne (medfølger ikke).</p>
<b>Justerbarhed</b> <b>Reguleringshøjde</b> <b>Produktkapacitet</b>	Højderegulerbar 240 mm Maksimal brugervægt: 265 kg. Når sædet belastes med 265 kg, belastes hver monteringskrue med 23 kg. <i>PLUS klapsæder er testet statisk med en sikkerhedsfaktor på 1,5 i henhold til de anvendte hjælpemiddelstandarder.</i>
<b>Garanti</b>	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.

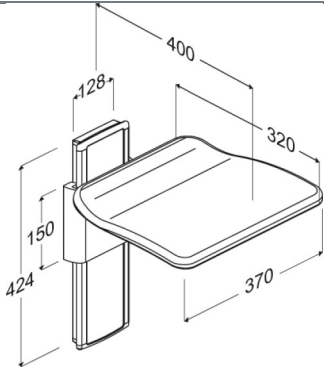

<b>Produkt</b>	PLUS klapsæde, manuelt højderegulerbart
<b>Varenummer</b>	R5500112
<b>Rengøring</b>	<p>Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade.</p> <p>Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen.</p> <p><b>DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:</b> Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvættsprit 70%</p> <p><b>IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:</b> Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.</p> <p><b>AFKALKNING AF ALUMINIUMDELE:</b> Pressalit anbefaler at man fjerner kalkaflejringer fra aluminiumdele ved hjælp af en opløsning af 3 dele 30% eddikesyre og 7 dele vand. Når aluminiumdelene er vasket af i denne opløsning, tørres de efter med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand.</p>



PRESSALIT®

<b>Produkt</b>	PLUS klapsæde, manuelt højderegulerbart
<b>Varenummer</b>	R5500112

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

PRESSALIT®