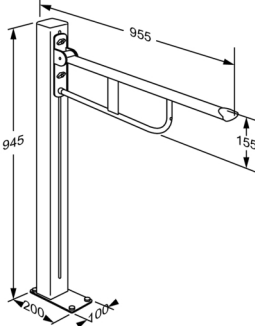




PRESSALIT®

Product Artikelnummer	VALUE toiletsteun op kolom R1161000
Kleur	VVS:615722425 NRF:6190517 RSK:8980351 EAN:5708590176697 HMI: 25416 NBS:N13:436 FDA:ILS/D135866 Wit
Beschrijving	 VALUE toiletsteun, vloermontage op vrijstaande kolom, lengte 955 mm. In hoogte 670 mm verstelbaar . Het ergonomische ontwerp zorgt voor een veilige en comfortabele grip en een goed gevoel van waar de toiletsteun eindigt. Incl. bevestigingsbouten voor massieve vloer. Bevestigingsmateriaal is afhankelijk van het vloertype en moet apart besteld worden. VALUE toiletsteun, vloermontage op vrijstaande kolom, lengte 955 mm. In hoogte 670 mm verstelbaar . Het ergonomische ontwerp zorgt voor een veilige en comfortabele grip en een goed gevoel van waar de toiletsteun eindigt. Materialen: Rilsan gecoat staal, druk-gegoten aluminium, kunststof. Incl. bevestigingsbouten voor massieve vloer. Bevestigingspluggen is afhankelijk van het vloertype en moet apart besteld worden.
Verstelbaarheid Afstelhoogte Product capaciteit	In hoogte verstelbaar 670 mm Max. verticale belasting 120 kg
Materialen	Basismateriaal: staal Oppervlakte materiaal: Rilsan Eindkap: nylon (PA)



PRESSALIT®

Product	VALUE toiletsteun op kolom
Artikelnummer	R1161000
Ergonomy	Biedt stevige ondersteuning wanneer u zit, staat of overstapt naar en van een toilet. Goed, breed steunvlak voor de hand en arm. De afgeronde vorm geeft een stevige en comfortabele grip.
Funktie	De toiletsteun kan worden opgeklapt wanneer deze niet in gebruik is of om meer ruimte te maken. In hoogte verstelbaar.
Garantie	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode van vijf jaar na de factuurdatum.



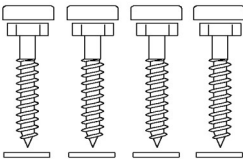
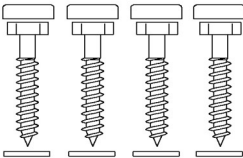
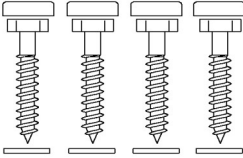
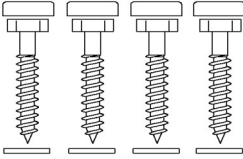
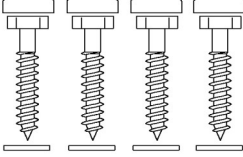
Product	VALUE toiletsteun op kolom
Artikelnummer	R1161000
Reiniging	Het product kan worden gereinigd met een milde zeepreiniger. Gebruik geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen, aangezien dit kan leiden tot beschadiging van het oppervlak. Desinfecteermiddelen op chloorbasis voor het desinfecteren van oppervlakken mogen worden gebruikt volgens de productspecificatie en veiligheidsmaatregelen voor deze producten. De volgende reinigingsmiddelen zijn door Pressalit getest en goedgevonden voor zover de aanbevolen concentratie op de verpakking wordt aangehouden. DESINFECTEERMIDDELEN: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% WipeClean UniversalCleaning Chlorine Disinfection Wipes Klorilli (Kiilto Clean) NIET-DESINFECTERENDE MIDDELEN: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Het oppervlak moet direct na het schoonmaken worden afgenomen met een zachte met schoon water bevochtigde, doek daar sommige oppervlakken anders kunnen verkleuren of vlekken ontstaan en het oppervlak daardoor aangetast raakt.



PRESSALIT®

Product	VALUE toiletsteun op kolom
Artikelnummer	R1161000

Installatie in verschillende wandtypes

	Betonwanden >B25 V8596 - 4 schroeven Ø10 x 70, met witte schroefafdekkingen zijn inbegrepen. Pluggen moeten apart worden besteld.	
	Gemetselde wanden >= Mz12 V8596 - 4 schroeven Ø10 x 70, met witte schroefafdekkingen zijn inbegrepen. Pluggen moeten apart worden besteld.	
	Kalksteen>=Hlz12 V8596 - 4 schroeven Ø10 x 70, met witte schroefafdekkingen zijn inbegrepen. Pluggen moeten apart worden besteld.	
	Gasbeton P4 V8596 - 4 schroeven Ø10 x 70, met witte schroefafdekkingen zijn inbegrepen. Pluggen moeten apart worden besteld.	
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 40-50 mm hout V8596 - 4 schroeven Ø10 x 70, met witte schroefafdekkingen zijn inbegrepen. Pluggen moeten apart worden besteld.	



PRESSALIT®

Product Artikelnummer	VALUE toiletsteun op kolom R1161000
	Gipsplaten, watervast, versterkt met hout Muurbevestigingen (4 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks. 
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 2 mm staal Muurbevestigingen (4 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks. 
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast Muurbevestigingen (4 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks. 

Bolts for wall fixing are included. It is the responsibility of the installer to ensure that suitable plugs are used. Please see mounting instruction.

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®