




<b>Produkt</b> <b>Produktnummer</b>	PLUS Duschsitz 450 mit Pflegeöffnung, elektrisch höhenverstellbar und manuell seitlich verschiebbar R7665000
<b>Farbe</b>	Wei
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>VVS: 777517500 NRF: 6317158 EAN: 5708590360324 HMI: 124230</p>  <p>PLUS Duschsitze werden in verschiedenen Farben angeboten. Sie sind sowohl in fester Hhe, elektrisch hhenverstellbar als auch manuell verstellbar, mit und ohne Pflegeffnung sowie wahlweise mit Rcken- und Armlehnen erhltlich. Sie eignen sich zur Montage an der Wand oder zur Montage an Pressalit PLUS Wandschienen.</p> <p>PLUS Duschsitz 450 mit Pflegeffnung, Elektromotor, Rckenlehne und Armlehnen. Um 500 mm elektrisch hhenverstellbar und manuell seitlich verschiebbar, die Armlehne sind unabhngig von Sitz und Rckenlehne hhenverstellbar. Hochklappbare Sitz und Armlehnen. Materialien: weicher und komfortabler PUR-Schaum mit Holzkern, montiert auf einem Aluminiumprofil. Die Armlehne aus weichem SEBS-Kunststoff sind griffig und rutschfest. Zur Nachmontage auf waagerechter PLUS Wandschiene (nicht enthalten).</p>
<b>Verstellung</b>	Hhen- und seitlich verstellbar
<b>Hhenverstellung</b>	500 mm
<b>Produktkapazitt</b>	<p>Maximales Anwendergewicht (Sitz): 150 kg. Maximale Belastung der Armlehnen: 55 kg. Bei einer Belastung der Duschsitz mit 150 kg, wird jede Montageschraube folglich mit bis zu 35 kg.</p> <p><i>PLUS Duschsitze wurden statisch mit einem Sicherheitsfaktor 2,5 getestet. Dies entspricht den Anforderungen der geltenden Normen.</i></p>
<b>Aufwrtsgeschwindigkeit</b>	<p>Geschwindigkeit aufwrts: 10 mm/s Geschwindigkeit abwrts: 10 mm/s</p>



<b>Produkt</b>	PLUS Duschsitz 450 mit Pflegeöffnung, elektrisch höhenverstellbar und manuell seitlich verschiebbar
<b>Produktnummer</b>	R7665000
<b>Geräusch</b>	48 dB
<b>Materialien</b>	Der Duschsitz besteht vorwiegend aus Aluminium mit einer 10 µm Eloxalschicht. Sitz und Rückenlehne sind aus PUR-Schaumstoff hergestellt. Beide sind mit einer Oberflächenbeschichtung versehen und mit PUR-Klarlack geschützt. Sitz beinhaltet Sperrholzkern. Die Armlehnen bestehen vorwiegend aus Aluminium mit einer 10 µm Eloxalschicht und sind an den Enden mit einer rutschfesten, griffigen Oberfläche aus weichem SEBS-Kunststoff mit glasfaserverstärktem Nylonkern versehen. Auch der Scharnierarm ist mit weichem SEBS-Kunststoff überzogen. Interne Komponenten und Halterungen sind vorwiegend in Edelstahl ausgeführt. Die Kanten der Rückenlehne und Sitzträger sind mit Abdeckungen aus ABS-Polymer versiegelt.
<b>Ergonomie</b>	Ergonomischer Sitz - Sitzfläche 450 x 437 mm. Das weiche und rutschfeste Material fühlt sich nie kalt an und bietet zugleich einen guten Sitzkomfort. Die ovale Form der Armlehne stützt und bietet einen guten, komfortablen Halt.
<b>Funktionen</b>	Der Duschsitz und die Armlehnen sind hochklappbar, so dass nach Bedarf zusätzliche Bewegungsfläche geschaffen werden kann. Mit Hilfe eines einfachen und sicheres Klicksystems lasse sich Sitzfläche, Rücken und Armlehne gleichzeitig einstellen. Die Armlehne sind darüber hinaus unabhängig von Sitz und Rückenlehne höhenverstellbar. Der Duschsitz lässt sich einfach verschieben.
<b>Stromanschluss (V)</b>	230
<b>Motor</b>	LA40 (Linak) 6000N, IPX6
<b>Steuerkasten</b>	SMPS14 (Linak) IPX6
<b>Kabelgebundener Fernbedienung</b>	HB3 (Linak) IP66
<b>Stromverbrauch (max. Belastung)</b>	Stromverbrauch, maximal Belastung: 60 W Stromverbrauch, standby: 0,5 W
<b>Garantie</b>	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.

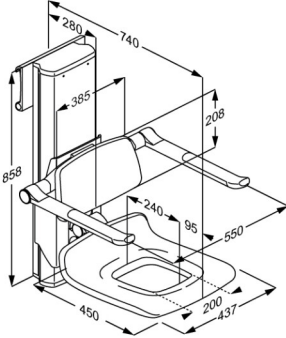

<b>Produkt</b>	PLUS Duschsitz 450 mit Pflegeöffnung, elektrisch höhenverstellbar und manuell seitlich verschiebbar
<b>Produktnummer</b>	R7665000
<b>Reinigung</b>	<p>Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.</p> <p>Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist.</p> <p><b>DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL:</b> Erisan OXY+ Tvättspit 70% CaviCide surface disinfectant decontaminant cleaner Rodalon Desinfektionsspray Terralin protect (SCHÜLKE+) Dismonzon Plus (BODE Chemie GmbH)</p> <p><b>NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL:</b> Wetrok Caledor (Wetrok) Petrosol Citro (Büfa) Wichtig: PUR-Oberflächen von PLUS Duschsitz und PLUS Rückenlehne erhalten ein anti-bakterielles Coating, das durch andere Reinigung als Wasser und Seife zerstört werden kann.</p> <p>Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abtrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können.</p> <p><b>ENTKALKUNG DER ALUMINIUMTEILE:</b> Pressalit empfiehlt, eventuelle Kalkablagerungen auf der Wandschiene und anderen Aluminiumteilen mit einer Mischung aus 3 Teilen 30%-iger Essigsäure und 7 Teilen Wasser zu entfernen. Nach Reinigung der Aluminiumteile mit dem Essigwasser, muss mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch nachgetrocknet werden.</p>
<b>Konformitäts- erklärung</b>	<p>Diese Produkt ist produziert worden gemäß:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte</li><li>- Maschinenrichtlinie 2006/42/EG</li><li>- RoHS-Richtlinie 2011/65/EG.</li></ul>



# PRESSALIT®

<b>Produkt</b>	PLUS Duschsitz 450 mit Pflegeöffnung, elektrisch höhenverstellbar und manuell seitlich verschiebbar
<b>Produktnummer</b>	R7665000

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

PRESSALIT®