




PRESSALIT®

Product Varunummer	MSCT 1 mobil duschbrits, elektriskt höjdreglerbar R9434717000
Färg	Vit
Beskrivning	VVS: 777542410 RSK: 8565087 EAN: 5708590373225 HMI: 128425  Pressalit erbjuder ett brett sortiment av mobila, flexibla, höjdjusterbara och fast monterad dusch- och vårdbritsar av hög kvalitet. De är designade för att kunna erbjuda ett stabilt stöd vid tvätt, påklädning och vård av vuxna och barn. Britsarna kan användas på sjukhus, vårdhem, institutioner i skolor och i privata hem, de har alla hållbart material och hygieniska ytor som är både bekväma och mycket enkla att rengöra. Design och flexibilitet ger optimala arbetsvillkor för vårdgivaren såväl som en hög komfort- och säkerhetsnivå för brukaren. MSCT 1 mobilt dusch- / vårdbrits, 820 x 1790 mm, fyra nedfällbara sidor. Elektrisk höjdjusterbar (batteridrivna) med manöverdosa. 400 mm höjdjustering från 550 till 950 mm. Kan luta 3 grader (säkerställer att vattnet rinner ur avloppet). Utrustad med centralt bromssystem, trådkorg för förvaring, hörnskydd i alla fyra hörnen, batteri och laddare. Lyftpelare och manöverdosa är IPX6, batteri och laddare är IPX6. Duschmadrass och huvudstöd måste beställas separat.
Justerbar	Höjdreglerbar
Höjdjustering	400 mm
Produktkapacitet	Max brukarvikt (MUM): 200 kg Max belastning (SWL): 250 kg (brukarvikt + vatten + tillbehör). <i>Britsen har testats statiskt med 625 kg, enligt kraven i IEC 60601-1-standard som kräver testning med säkerhetsfaktor 2,5.</i>
Uppåtgående hastighet	Hastighet upp: 19 mm/s Hastighet ner: 19 mm/s

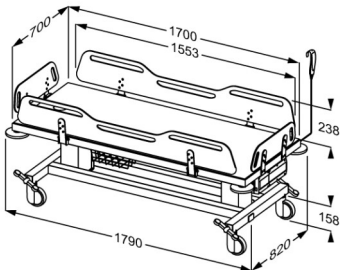

PRESSALIT®

Product	MSCT 1 mobil duschbrits, elektriskt höjreglerbar
Varunummer	R9434717000
Material	Aluminium, plastmaterial, Compact Density Fiberboards (CDF) och lackerat rostfritt stål.
Ergonomi	• De ergonomiskt utformade sänggrindarna har en praktisk sänkt mittdel, vilket ger bättre åtkomst och arbetsmiljö för vårdgivaren vid förflyttning, dusch, torkning, av -och påklädning av brukare. • Enhandsgreppet för hantering av sänggrindarna gör det möjligt för vårdgivaren att hålla ögonkontakt och fysisk kontakt med brukaren under hela processen. De nedfällbara sänggrindarna ger också enkel åtkomst från alla fyra sidor av dusch-vårdbritsen. • De utskurna handtagen i sänggrindarna gör det möjligt för brukaren att själv hjälpa till när den ska vändas, vilket motiverar fysisk träning. • En förvaringskorg undertill gör det möjligt för vårdgivaren att förvara toalettartiklar och dylikt som behövs tillhands vid vårdtillfället. • Lätt att rengöra, med släta kontaktytor som inte samlar smuts och bakterier.



Product	MSCT 1 mobil duschbrits, elektriskt höjdreglerbar
Varunummer	R9434717000
Funktioner	• Den mobila dusch/vård britsen kan enkelt flyttas från rum till rum och används av flera användare. Två lyftpelare används för att skapa en estetiskt tilltalande, hygieniskt optimerad samt fysiskt och visuellt stabil konstruktion. • Enkelt handhavande ger användarvänlighet, har nedfällbara sänggrindar och trådbunden manöverdosa. • Säkerhetsbromsarna gör det möjligt för vårdgivaren att låsa alla fyra länkhjulen samtidigt genom att trampa på fotbromsen, vilket säkerställer bättre säkerhet och enkel användning i valfri position. • Alla lås- och frigöringsaktuatorer aktiveras genom att trappa ner dem uppifrån för att säkerställa ergonomisk interaktion och för att förhindra fot- och tåskador. Halkfri yta och mönster på alla fyra fotbromsarna förhindrar att foten glider, även under våta förhållanden. • Ett roterande hörnskydd i varje hörn av dusch/vård britsen skyddar de omgivande väggarna, dörrkarmarna och själva produkten om den kommer i kontakt med något under transporten. • Elektrisk höjdjustering med batteri och laddare. Den väggmonterade laddaren för batteriet kan monteras i alla rum inkl. även utanför badrummet om så önskas. När batteriet börjar ta slut hörs ett pip varje gång manöverdosan aktiveras. • Batteriets laddningstid är ca. 3-4 timmar. • MSCT 1 har också ett sänkt avloppsområde som tar bort vatten från hörnen och minskar mängden kvarvarande vatten för enkel tömning och torkning. • Ett öppet avlopp och en förstorad 1,6 m slang garanterar enkel dränering som till och med gör att mänskligt avfall kan passera igenom. Kan lutas 3 grader för enklare och effektivare vattendränering.
Anslutnings ström (V)	230
Motor	BL1 (Linak) IPX6
Kontrollbox	COL50 (Linak) IPX6
Manöverdosa	HB30 (Linak) IPX6
Strömförbrukning (max.belastning)	Strömförbrukning vid maximal belastning: 80,5 W Strömförbrukning vid standby: 0,5 W



PRESSALIT®

Product	MSCT 1 mobil duschbrits, elektriskt höjreglerbar
Varunummer	R9434717000
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 3-års period från inköpsdatum. OBS Om produkten placeras i en miljö där det finns mycket salt eller klorid minskar garantitiden från 3 år (standard) till 1 år. Salt och klorid har en korrosiv effekt på komponenterna i produkten och gör att livslängden minskar.
Rengöring	Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen. DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% Accel PREvention Wipes Lingettes INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.
WEEE	Kontakta Pressalit eller Pressalits distributör som kommer att ombesörja återvinning av elektronikskrot i enlighet med WEEE-direktivet.



PRESSALIT®

Product	MSCT 1 mobil duschbrits, elektriskt höjdreglerbar
Varunummer	R9434717000

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®

8. juli 2026