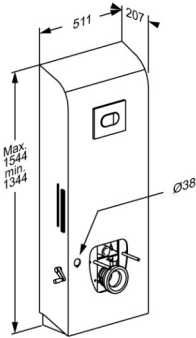




PRESSALIT®

| | |
|---|--|
| Product Varunummer | SELECT TL4 upphängning till toalett, manuell, till golvvavlopp R9014112 |
| Färg | VVS:617989312 NRF:6191181 EAN:5708590372907 HMI: 138241 FDA:IKX/D319729 Antracitgrå |
| Beskrivning |  <p>SELECT elektrisk upphängning till toalett finns i flera modeller och färger för både väggavlopp och golvvavlopp. De finns i elektriskt eller manuellt höjddjusterbara versioner, med eller utan sidoprofiler och för standardtoalettskålar och duschtoaletter. Allt utvecklat med fokus på hygien och enkel rengöring.</p> <p>SELECT TL4 upphängning till toalett, till golvvavlop. Inkl. cistern med dubbelspolning 3/6 L (kan ställas om till 2/4 liter). Manuell höjddreglerbar 200 mm med handvevsmanövrering. Förberedd för douche-wc eller douche-wc-sits. Toalettskål, toalettsits och toalettarmstöd måste köpas separat. Material: Rostfritt stål och PMMA/ABS. Exkl. monteringskruv för vägg.</p> |
| Justerbar Höjddjustering | Höjddreglerbar 200 mm |
| Produktkapacitet | Max brukarvikt. 200 kg Max belastning. 235 kg (brukarvikt + tillbehör) När toalettlyftare belastas med 235 kg, belastas varje fästskruv med 65 kg. <i>Toalettlyftaren testas statiskt med 600 kg, där toaletten fäster. Detta är i enlighet med kraven i gällande standarder hjälpmédlet. Observera att de flesta toaletter som kan monteras på lyftenheter, har testats till 400 kg.</i> |
| Material | Toalettlyftaren är tillverkad av rostfritt stål, med monteringskåpa i PMMA/ABS. |
| Garanti | Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum. |

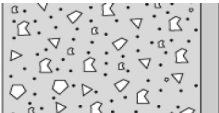
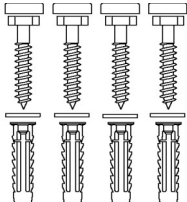

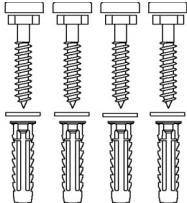
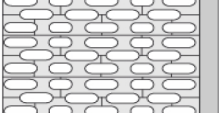
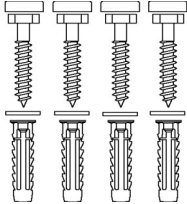
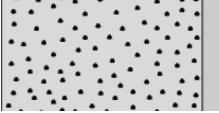
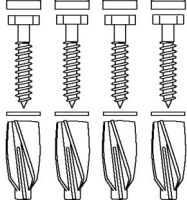
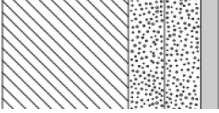
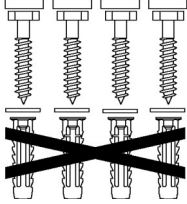


| | |
|-------------------|---|
| Product | SELECT TL4 upphängning till toalett, manuell, till golvvavlopp |
| Varunummer | R9014112 |
| Rengöring | <p>Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. För rengöring av ytan kan klorinbaserade desinficeringsmedel användas enligt produktspecifikationen och säkerhetsföreskrifterna för de här produkterna.</p> <p>Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen.</p> <p>DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättspit 70%</p> <p>INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningsen kan uppstå.</p> |

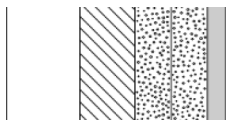
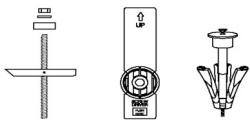
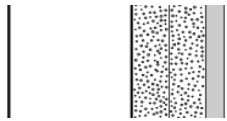
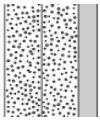


| | |
|-------------------|--|
| Product | SELECT TL4 upphängning till toalett, manuell, till golvvavlopp |
| Varunummer | R9014112 |

Montage i olika väggtyper

| | | |
|---|--|---|
|  | Betong >B25 V8605 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12, med grå täckknappar. Måste beställas separat. |  |
|  | Mursten >= Mz12 V8605 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12, med grå täckknappar. Måste beställas separat. |  |
|  | Cementsten >= Hlz12 V8605 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12, med grå täckknappar. Måste beställas separat. |  |
|  | Lättbetong P4 V8655 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg GB14, med grå täckknappar. Måste beställas separat. |  |
|  | Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä V8605 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12, med vita täckknappar. Använd inte plugg. Måste beställas separat. |  |



| | |
|---|---|
| Product Varunummer | SELECT TL4 upphängning till toalett, manuell, till golvvavlopp R9014112 |
|  | Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfänér Monteringskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.  |
|  | Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm Monteringskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.  |
|  | Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2 Montering av produkter i denna typ av vägg rekommenderas inte, finns en stor risk att kroppsskada uppstår.  |