




PRESSALIT®

Article Numéro article	VALUE IV siège de douche, montage fixe R1620000112
Couleur	VVS:777525312 NRF:6314097 RSK:8162781 EAN:5708590377711 HMI: 124483 DB: 2296038 Gris anthracite
Description	 <p>Le siège et le dossier de douche pliants VALUE IV créent une solution simple pour les utilisateurs qui ont besoin de s'asseoir pendant la douche.</p> <p>VALUE IV siège de douche. Hauteur fixe. Le siège est rabattable. Matériaux : aluminium moulé sous pression, acier inoxydable avec revêtement Rilsan et polyéthylène (PE) moulé sous vide. Vis de montage incluses. Chevilles à commander séparément.</p>
Réglage Capacité du produit	Montage fixe Poids maximum de l'utilisateur : 135 kg. Lorsque le siège est chargé de 135 kg, chaque vis de montage est chargé de 125 kg. <i>Les VALUE sièges de douche ont été testé statiquement avec un facteur de sécurité de 1,5, ce qui est exigé par les normes appliquées.</i>
Matériaux	La charnière murale est fait d'aluminium moulé sous pression. Le cadre est fait en acier inoxydable avec un revêtement Rilsan qui protège contre la corrosion, est agréable au toucher et facile à nettoyer. Le siège est fait de polyéthylène (PE) moulé sous vide.
Garantie	Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 5 ans à partir de la date de facturation.

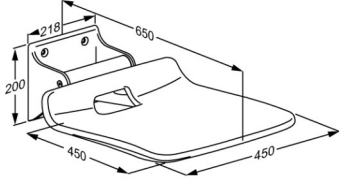

Article	VALUE IV siège de douche, montage fixe
Numéro article	R1620000112
Nettoyage	<p>Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs et corrosifs, car cela pourrait endommager la surface. Pour désinfecter la surface, des désinfectants peuvent être utilisés en tenant compte des caractéristiques et des précautions de sécurité liées à ces produits.</p> <p>Les nettoyants suivants ont été testés par Pressalit et peuvent être utilisés, s'ils sont dilués conformément aux indications notées sur l'emballage.</p> <p>NETTOYANTS DÉSINFECTANTS : Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningsprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% WipeClean UniversalCleaning Chlorine Disinfection Wipes Klorilli (Kilto Clean)</p> <p>NETTOYANTS NON-DÉSINFECTANTS : Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Il importe d'insister qu'il faut toujours essuyer le produit avec un chiffon doux plissé dans l'eau propre immédiatement après le nettoyage, car certains matériaux seront progressivement tachetés et perdront leur couleur initiale, et le laquage de surface sera rongé.</p>
Déclaration de conformité	Ce produit répond aux exigences de la réglementation (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux.



PRESSALIT®

Article	VALUE IV siège de douche, montage fixe
Numéro article	R1620000112

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®