




# PRESSALIT®

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Product</b><br><b>Varunummer</b>                                     | PLUS toalettarmstöd, 850 mm, höger hand manövrerad<br>R381485277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Färg</b>                                                             | NRF:6191154<br>EAN:5708590368801<br>HMI: 123635<br>FDA: ILS/D135866<br><br>Limegrön                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Beskrivning</b>                                                      |  <p>Alla toalettstöd PLUS har en integrerad dämparfunktion som säkerställer att stödet sänks kontrollerat från vertikalt till horisontellt läge.<br/>Lämplig för användning med vägghängda toaletter där avståndet från vägg till front är 700 mm, och för golvstående toaletter.<br/><i>Ersätter utgående modell R3285.</i></p> <p>PLUS toalettarmstöd. Total längd 880 mm. Ergonomisk design, som ger skön vila åt armarna och ett optimalt stöd när man skal resa eller sätta sig. Sidoreglerbart.<br/>Avtagbart och uppfällbart.<br/>Material: Aluminium med greppfast tvåkomponentsplast.<br/>Till eftermontering på existerande vägrät PLUS väggskena (medföljer ej).</p> |
| <b>Justerbar</b><br><b>Höjdjustering</b><br><br><b>Produktkapacitet</b> | Sidoreglerbar<br><br>240 mm<br><br>Maximal belastning: 150 kg.<br>När toalettarmstöden belastas med 150 kg, belastas varje monterings skruv med 16 kg.<br><br><i>PLUS toalettarmstöd är testad statiskt med respektive 700 kg (tät på väggen), 425 kg (på midten) och 225 kg (på yterpunktet).</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Material</b><br><br><b>Ergonomi</b>                                  | Toalettarmstöden är främst framställt i 10-mikrometer anodiserad aluminium. Greppen är belagda med en glidyta av termoplastisk elastomer (TPE) som omsluter en glasförstärkt nylonkärna.<br>Interna komponenter och fästelement är främst gjorda av rostfritt stål.<br><br>Stabilt stöd i form av ergonomiska toalettarmstöd ger ökad trygghet till den sittande brukaren och underlättar samtidigt den dagliga förflyttningen från och till hjälpmedel.<br>Ett bra toalettarmstöd ger skön vila åt armarna och ett optimalt stöd när man ska resa eller sätta sig.                                                                                                                                                                                                |

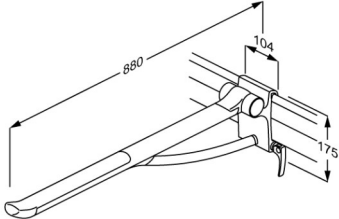

# PRESSALIT®

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Product</b><br><b>Varunummer</b>    | PLUS toalettarmstöd, 850 mm, höger hand manövrerad<br>R381485277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Funktioner</b>                      | Toalettarmstöden är försedda med ett gångjärn som gör det möjligt att fälla upp toalettarmstöden mot väggen. Uppfällbara toalettarmstöd ger gott om plats i rummet när de inte används.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Garanti</b><br><br><b>Rengöring</b> | <p>Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.</p> <p>Rengör produkten med vanligt såpvatten.<br/>Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten.</p> <p>Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen.</p> <p><b>DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:</b><br/>Clinimax Difficil-S<br/>Erisan OXY+<br/>Sprit (husholdningssprit)<br/>Suma Bac D10<br/>Virkon<br/>Rodalon Desinfektionsspray<br/>Lysoformin Spezial<br/>CaviCide<br/>Sufanios Premium<br/>Tvättsprit 70%<br/>Oxyplus-acid 2% (Diversey)<br/>WipeClean UniversalCleaning<br/>Chlorine Disinfection Wipes</p> <p><b>INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:</b><br/>Suma Star free D1<br/>Taski 100<br/>Taski 200<br/>Milizid Citro</p> <p>Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.</p> |



|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Product</b><br><b>Varunummer</b> | PLUS toalettarmstöd, 850 mm, höger hand manövrerad<br>R381485277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                     | <p><b>Avsedd användning</b><br/>Toalettarmstödet används som stöd för en person som ska sätta sig på eller resa sig från en toalett, eller vid sidoförflyttning från rullstol.</p> <p><b>Användningsmiljö</b><br/>För användning inomhus i våtrumsmiljö, till exempel ett badrum, i privata hem, på vårdhem och sjukhus. Vid yrkesmässig användning är den förväntade livslängden 10 år.<br/><i>Livscykeltest har utförts enligt ISO 17966:2016.</i></p> <p>För underhåll hänvisas till användnings – underhållsinstruktion som är anslutna till produkten, detta finns på hemsidan under "Downloads".</p> <p><b>Link til eBVD:</b> <a href="https://www.ebvd.org/BMI/Document/Export/4206/0/Pdf">https://www.ebvd.org/BMI/Document/Export/4206/0/Pdf</a></p> <p>Denna produkt har fått följande bedömning:<br/>Byggvarubedömningen: Accepteras</p> |