




Product Varunummer	PLUS ryggstöd, avtagbart R6409277
Färg	Limegrön
Beskrivning	<p>NRF:6317043 EAN:5708590366326 HMI: 124211 FDA:INN/D135865</p>  <p>PLUS ryggstöd finns i flera färger och versioner, de finns både som fasta och justerbara. De är lämpliga för användning bakom en vägghängd toalett utan cisternen eller för montering på en av Pressalits toalettlyftare.</p> <p>PLUS ryggstöd, 385 x 209 mm, vadderad. Fast höjd, för montering på SELECT TL1, TL2, TL3 eller TL4 upphängning till toalett. Avtagbar utan verktyg och lätt att fästa igen. Material: Aluminium och mjukt porsukum med tråkärna. Ska monteras direkt på upphängning till toalett, monteringskit medföljer.</p>
Justerbar Produktkapacitet	<p>Fast höjd</p> <p>Maximal belastning: 50 kg. Maximal användarvikt: 100 kg. När ryggstödet är belastat med 50 kg, är varje väggmonteringsskruv belastad med 118 kg. <i>Ryggstödet bör kunna bära vikten hos en person som belastar ryggstödet.</i> Ryggstödet är inte personbärande och den testmetoder som föreskrivs för ryggstöd återspeglar detta: ISO 17966 kräver att ryggstöd testas statistiskt med 50% av den maximala användarvikten, dvs när den maximala belastningen på ett ryggstöd är 50 kg, då motsvarar det enligt ISO 17966, att en användare som väger 100 kg belastar ryggstödet.</p>
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.

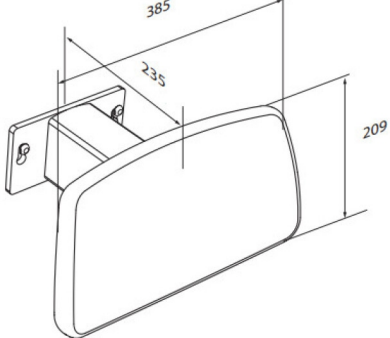

Product	PLUS ryggstöd, avtagbart
Varunummer	R6409277
Rengöring	<p>Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten.</p> <p>Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen.</p> <p>DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:Erisan OXY+ Tvättspirit 70% CaviCide surface disinfectant decontaminant cleaner Rodalon Desinfektionsspray Terralin protect (SCHÜLKE+) Dismonzon Plus (BODE Chemie GmbH)</p> <p>INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Wetrok Caledor (Wetrok) Petrosol Citro (Büfa)</p> <p>Viktigt: PUR-ytor på PLUS duschsitsar och PLUS ryggstöd innehåller en antibakteriell beläggning som kan skadas om den används av annat än såpa och vatten för rengöring.</p> <p>Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.</p>