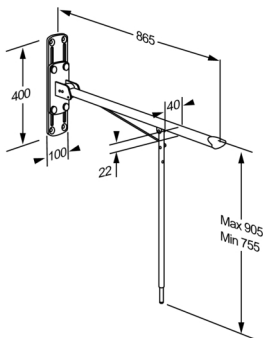




PRESSALIT®

Product Artikelnummer	Value toiletsteun met vloersteun R1111000
Kleur	VVS:615722410 NRF:6191644 RSK:7972413 EAN:5708590176437 HMI: 25414 NBS:N13:436 FDA:ILS/D135866 Wit
Beschrijving	 Toiletsteun met vloersteun, in hoogte verstelbaar 150 mm. Incl. Bevestigingsset voor bakstenen muur Toiletsteun met vloersteun, in hoogte verstelbaar 150 mm. Incl. Bevestigingsset voor bakstenen muur
Verstelbaarheid Afstelhoogte Product capaciteit	In hoogte verstelbaar 150 mm Maximale belasting: 135 kg. Wanneer de toiletsteun wordt belast geladen met 135 kg, wordt elke wandbevestiging belast met 29 kg.
Materialen Ergonomy Functie	De toiletsteun is vervaardigd uit staal met een Rilsan-coating, die comfortabel aanvoelt, eenvoudig te reinigen is en het metaal beschermt tegen corrosie. De eindkappen zijn vervaardigd uit nylon (PA). Geeft stevige ondersteuning bij zitten, opstaan of overstappen naar en van een toilet. Goed, breed steunvlak voor hand en arm. De afgeronde vorm geeft een stevige en comfortabele grip. De toiletsteun kan worden opgeklapt wanneer deze niet in gebruik is of om meer ruimte te maken. Met vloersteun voor extra ondersteuning. Hoogte verstelbaar 150 mm.



PRESSALIT®

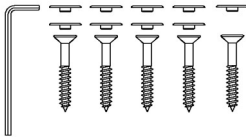
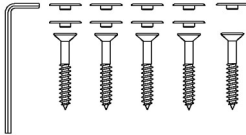
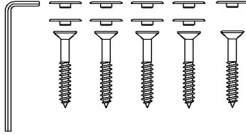
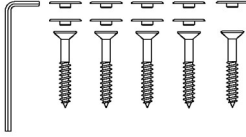
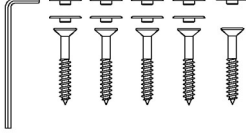
Product	Value toiletsteun met vloersteun
Artikelnummer	R1111000
Garantie	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode van vijf jaar na de factuurdatum.
Reiniging	Het product kan worden gereinigd met een milde zeepreiniger. Gebruik geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen, aangezien dit kan leiden tot beschadiging van het oppervlak. Desinfecteermiddelen op chloorbasis voor het desinfecteren van oppervlakken mogen worden gebruikt volgens de productspecificatie en veiligheidsmaatregelen voor deze producten. De volgende reinigingsmiddelen zijn door Pressalit getest en goedgevonden voor zover de aanbevolen concentratie op de verpakking wordt aangehouden. DESINFECTEERMIDDELEN: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% WipeClean UniversalCleaning Chlorine Disinfection Wipes Klorilli (Kiilto Clean) NIET-DESINFECTERENDE MIDDELEN: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Het oppervlak moet direct na het schoonmaken worden afgenomen met een zachte met schoon water bevochtigde, doek daar sommige oppervlakken anderszins kunnen verkleuren of vlekken ontstaan en het oppervlak daardoor aangetast raakt.



PRESSALIT®

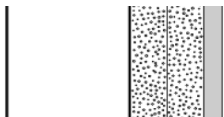
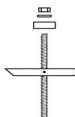
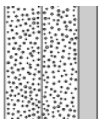
Product	Value toiletsteun met vloersteun
Artikelnummer	R1111000

Installatie in verschillende wandtypes

	Betonwanden >B25 V8592 - 5 verzonken schroeven Ø10 x 80, met witte schroefafdekkingen zijn inbegrepen. Pluggen moeten apart worden besteld.	
	Gemetselde wanden >= Mz12 V8592 - 5 verzonken schroeven Ø10 x 80, met witte schroefafdekkingen zijn inbegrepen. Pluggen moeten apart worden besteld.	
	Kalksteen>=Hlz12 V8592 - 5 verzonken schroeven Ø10 x 80, met witte schroefafdekkingen zijn inbegrepen. Pluggen moeten apart worden besteld.	
	Gasbeton P4 V8592 - 5 verzonken schroeven Ø10 x 80, met witte schroefafdekkingen zijn inbegrepen. Pluggen moeten apart worden besteld.	
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 40-50 mm hout V8592 - 5 verzonken schroeven Ø10 x 80, met witte schroefafdekkingen zijn inbegrepen. Pluggen moeten apart worden besteld.	



PRESSALIT®

Product Artikelnummer	Value toiletsteun met vloersteun R1111000
	Gipsplaten, watervast, versterkt met hout Muurbevestigingen (5 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.   
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 2 mm staal Muurbevestigingen (5 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.   
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast Montage in dit wandtype wordt niet aanbevolen - levensgevaar voor personen en muren. 

It is the responsibility of the installer to ensure that suitable wall fasteners are used.

pressalit.com