




Produkt	PLUS Wandschiene, 3000 mm
Produktnummer	R9830112
Farbe	VVS:615841130 NRF:7501065 EAN:5708590305899 HMI: 71748 Anthrazitgrau
Produkt- beschreibung	 PLUS Wandschiene ermöglicht das Einhängen und die waagerechte Einstellung von Stützklappgriffen, Duschsitzen und Waschtisch-Liftern. Eine Auswahl möglicher Produkte, die in die Wandschiene eingehängt werden können, finden Sie weiter unten. PLUS Wandschiene, 3000 mm, zur waagerechten Montage. Verdeckte Befestigungen hinter der Abdeckplatte. Leicht zu reinigen. Materialien: Aluminium mit einer 10µm Eloxalschicht und Polystyrol. Exkl. Wandbefestigungen.
Verstellung	Festmontage
Produktkapazität	Maximale Belastbarkeit: ist abhängig von der Beschaffenheit der Wand - vertikal belastbar bis zu 1000 kg
Materialien	Die Wandschiene besteht vorwiegend aus Aluminium mit einer 10 µm Eloxalschicht. Die Abdeckplatte besteht aus Polystyrol. Die Schienenenden sind mit Endkappen aus ABS-Polymer versehen.
Ergonomie	Die waagerechte Wandschiene macht die Einrichtung flexibel. Durch die Verschiebbarkeit der Produkte können optimale Bedingungen für den Benutzer, Helfer oder Mobilitätshilfen geschaffen werden. Der Raum kann perfekt genutzt werden.
Funktionen	Die Wandschiene verteilt das Gewicht des jeweiligen Badezimmerproduktes über die Länge der Schiene. Die Produkte können mit intuitiven Einstellungs- und Sperrfunktionen an der Wandschiene verrigelt werden. Die Abdeckplatte verbirgt Montageschrauben und evt. Leistungen.
Garantie	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.

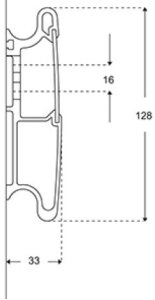

PRESSALIT®

Produkt	PLUS Wandschiene, 3000 mm
Produktnummer	R9830112
Reinigung	Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist. DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Lysoformin Spezial NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Milizid Citro Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abgetrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können. ENTKALKUNG DER ALUMINIUMTEILE: Pressalit empfiehlt, eventuelle Kalkablagerungen auf der Wandschiene und anderen Aluminiumteilen mit einer Mischung aus 3 Teilen 30%-iger Essigsäure und 7 Teilen Wasser zu entfernen. Nach Reinigung der Aluminiumteile mit dem Essigwasser, muss mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch nachgetrocknet werden.

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®