




PRESSALIT®

Product Varunummer	MSCT 4 mobil duschbrits, manuellt höjdreglerbar R9504721000
Färg	Vit
Beskrivning	VVS: 777542630 EAN: 5708590389851 HMI: 147809 FDA: INW/D546021  Pressalit erbjuder ett brett sortiment av mobila, flexibla, höjdjusterbara och fast monterad dusch- och vårdbritsar av hög kvalitet. De är designade för att kunna erbjuda ett stabilt stöd vid tvätt, påklädning och vård av vuxna och barn. Britsarna kan användas på sjukhus, vårdhem, institutioner i skolor och i privata hem, de har alla hållbart material och hygieniska ytor som är både bekväma och mycket enkla att rengöra. Design och flexibilitet ger optimala arbetsvillkor för vårdgivaren såväl som en hög komfort- och säkerhetsnivå för brukaren. MSCT 4 mobilt vårdbrits, 700 x 2100 mm, fyra nedfällbara sidor. Manuellt höjdjusterbar med fodpedal (hydraulisk). 500 mm höjdjustering från 550 till 1050 mm. Madrass måste beställas separat.
Justerbar Höjdjustering Produktkapacitet	Höjdreglerbar 500 mm Max brukarvikt (MUM): 200 kg Max belastning (SWL): 250 kg. <i>Britsen har testats statiskt med 375 kg, enligt kraven i ISO 17966 standarden som kräver testning med säkerhetsfaktor 1,5.</i>
Material	Plastmaterial, Compact Density Fiberboards (CDF) och lackerat rostfritt stål.

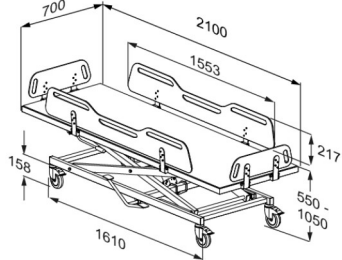

Product Varunummer	MSCT 4 mobil duschbrits, manuellt höjdreglerbar R9504721000
Ergonomi	• De ergonomiskt utformade sänggrindarna har en praktisk sänkt mittdel, vilket ger bättre åtkomst och arbetsmiljö för vårdgivaren vid förflyttning och av -och påklädning av brukare. • Enhandsgreppet för hantering av sänggrindarna gör det möjligt för vårdgivaren att hålla ögonkontakt och fysisk kontakt med brukaren under hela processen. De nedfällbara sänggrindarna ger också enkel åtkomst från alla fyra sidor av dusch-vårdbritsen. • De utskurna handtagen i sänggrindarna gör det möjligt för brukaren att själv hjälpa till när den ska vändas, vilket motiverar fysisk träning. • Lätt att rengöra, med släta kontaktytor som inte samlar smuts och bakterier.
Funktioner	• Den mobila dusch/vård britsen kan enkelt flyttas från rum till rum och används av flera användare. • Enkelt handhavande ger användarvänlighet, har nedfällbara sänggrindar och trådbunden manöverdosa.
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 3-års period från inköpsdatum. OBS Om produkten placeras i en miljö där det finns mycket salt eller klorid minskar garantitiden från 3 år (standard) till 1 år. Salt och klorid har en korrosiv effekt på komponenterna i produkten och gör att livslängden minskar.



PRESSALIT®

Product	MSCT 4 mobil duschbrits, manuellt höjddreglerbar
Varunummer	R9504721000
Rengöring	Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen. DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% Accel PREvention Wipes Lingettes INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.

pressalit.com

PRESSALIT®