




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	VALUE II toiletstøtte, 850 mm R1181000
Farve	VVS:615892100 NRF:6191059 EAN:5708590373010 HMI: 138203 FDA: ILS/D135866 Hvid
Produktbeskrivelse	 VALUE og VALUE II toiletstøtter med ALBA-vinge-monteringsprofil er specielt designet til anvendelse sammen med SELECT TL3 og TL4 toiletløftere. Højderegulering af den elektriske toiletløfter foretages ved hjælp af betjeningspanel som medfølger toiletstøtten. VALUE II toiletstøtte, 850 mm, opklappelig, højderegulérbar 150 mm uden brug af værktøj (højrehåndsbetjent). En god hjælp, når man sidder, står, eller skal forflytte sig ved toiletet. Materialer: Rilsan-belagt stål og trykstøbt aluminium. Til eftermontering på TL3/TL4 elektrisk/manuel toiletløfter, ALBA-vinge-monteringsprofil medfølger. Monteres til venstre for bruger.
Justerbarhed Reguleringshøjde	Højderegulérbar 150 mm
Produktkapacitet	Maksimal belastning: 120 kg.
Materialer Ergonomi	Toiletstøtten er fremstillet af rustfrit stål med en Rilsan-belagt overflade, som er behagelig at røre ved, let at rengøre, og som giver god beskyttelse mod rust. Monteringsprofilerne er fremstillet af trykstøbt aluminium. VALUE II toiletstøtte med ALBA-vinge, 850 mm, hvid. Højderegulérbar, højrehåndsbetjent, til eftermontering på TL3/TL4 (venstre)
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.

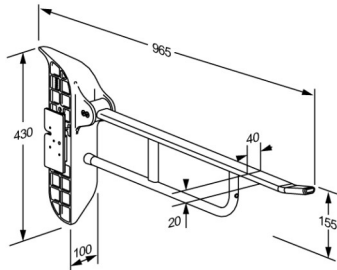

Produkt	VALUE II toiletstøtte, 850 mm
Varenummer	R1181000
Rengøring	Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade. Klorbaserede desinfektionsmidler kan bruges til desinfektion af overflader i henhold til produktspecifikationen og sikkerhedsforanstaltninger for disse produkter. Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen. DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvættsprit 70% WipeClean UniversalCleaning Chlorine Disinfection Wipes Klorilli (Kiilto Clean) IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vasket hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.



PRESSALIT®

Produkt	VALUE II toiletstøtte, 850 mm
Varenummer	R1181000

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®