




PRESSALIT®

Product Varunummer	PLUS duschsits 310, manuellt höjd- och sido reglerbar R7364112
Färg	VVS:777513512 NRF:6317098 EAN:5708590359441 HMI: 124245 FDA:INN/D135865 Antracitgrå
Beskrivning	 <p>PLUS duschstolar erbjuds i flera färger. De finns både som fasta, elektriskt justerbara och manuellt justerbara, och med möjlighet till rygg och armstöd. De är lämpliga för väggmontering eller för montering på Pressalit PLUS väggskenor.</p> <p>PLUS duschsits 310, uppfällbart, med rygg- och armstöd. Höjddreglerbart 250 mm och sidoreglerbart, utan användning av verktyg. Uppfällbara armstöd kan höjddregleras oberoende av sits och ryggstöd. Antracitgrå täckplatta på lodräta väggskena. Till eftermontering på existerande vågräta PLUS väggskena. . Material: Mjuk och skön PUR-skum med tråkärna, monterade på aluminiumprofil. Armstödet med greppfast tvåkomponentsplast är tålig och lätt att rengöra.</p>
Justerbar Höjjustering Produktkapacitet	Höjd- och sidoreglerbar 250 mm Max brukarvikt (sits): 200 kg Max belastning armstöd: 55 kg När duschsitsen belastas med 200 kg, belastas varje fästskruv med 21 kg. <i>PLUS duschsitsar testas statiskt med säkerhetsfaktor 1,5. Detta är i enlighet med kraven i gällande standarder hjälpmiddel.</i>
Material Ergonomi	Duschsätet är framställt i anodiserad aluminium och polyuretanskum som är gjutet runt en plywoodkärna och gjuten med en yta av klar PU-lack. Ändarna på ryggstödet och sätet är förseglade med ändpluggar i ABS. Ergonomisk sits - säte 310 x 365 mm. Sitsen är utförd i ett mjukt och halkfritt material som aldrig känns kallt samtidigt som det ger en god sittkomfort. Armstödens ovala form gör dem lätta och bekväma att hålla, och ger bra stöd.

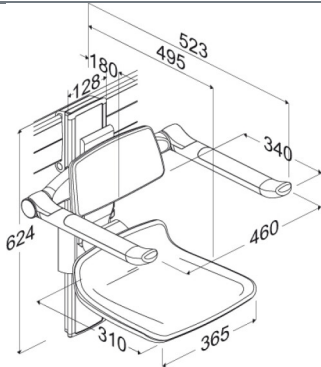

Product Varunummer	PLUS duschsits 310, manuellt höjd- och sido reglerbar R7364112
Funktioner	Både sits och armstöd kan fällas upp mot väggen efter användning. Sits, rygg- och armstöd kan justeras parallellt via ett enkelt och säkert klicksystem. Armstöden kan dessutom höjregleras oberoende av sits och ryggstöd.
Garanti Rengöring	<p>Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.</p> <p>Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten.</p> <p>Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen.</p> <p>DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:Erisan OXY+ Tvättspirit 70% CaviCide surface disinfectant decontaminant cleaner Rodalon Desinfektionsspray Terralin protect (SCHÜLKE+) Dismonzon Plus (BODE Chemie GmbH)</p> <p>INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Wetrok Caledor (Wetrok) Petrosol Citro (Büfa)</p> <p>Viktigt: PUR-yltor på PLUS duschsitsar och PLUS ryggstöd innehåller en antibakteriell beläggning som kan skadas om den används av annat än såpa och vatten för rengöring.</p> <p>Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.</p>