




PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	PLUS Wandschiene, 3900 mm R9839112
Farbe	Anthrazitgrau
Produkt- beschreibung	<p>VVS:615841139 NRF:7501068 EAN:5708590305950 HMI: 71751</p> <p>PLUS Wandschiene ermöglicht das Einhängen und die waagerechte Einstellung von Stützklappgriffen, Duschsitzen und Waschtisch-Liftern. Eine Auswahl möglicher Produkte, die in die Wandschiene eingehängt werden können, finden Sie weiter unten.</p> <p>PLUS Wandschiene, 3900 mm, zur waagerechten Montage. Verdeckte Befestigungen hinter der Abdeckplatte. Leicht zu reinigen. Materialien: Aluminium mit einer 10µm Eloxalschicht und Polystyrol. Exkl. Wandbefestigungen.</p>
Verstellung Produktkapazität	Festmontage Maximale Belastbarkeit: ist abhängig von der Beschaffenheit der Wand - vertikal belastbar bis zu 1000 kg
Materialien Ergonomie Funktionen	<p>Die Wandschiene besteht vorwiegend aus Aluminium mit einer 10 µm Eloxalschicht. Die Abdeckplatte besteht aus Polystyrol. Die Schienenenden sind mit Endkappen aus ABS-Polymer versehen.</p> <p>Die waagerechte Wandschiene macht die Einrichtung flexibel. Durch die Verschiebbarkeit der Produkte können optimale Bedingungen für den Benutzer, Helfer oder Mobilitätshilfen geschaffen werden. Der Raum kann perfekt genutzt werden.</p> <p>Die Wandschiene verteilt das Gewicht des jeweiligen Badezimmerproduktes über die Länge der Schiene. Die Produkte können mit intuitiven Einstellungs- und Sperrfunktionen an der Wandschiene verrigelt werden. Die Abdeckplatte verbirgt Montageschrauben und evt. Leistungen.</p>
Garantie	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.



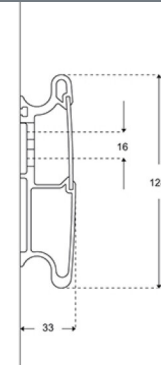

Produkt	PLUS Wandschiene, 3900 mm
Produktnummer	R9839112
Reinigung	<p>Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.</p> <p>Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist.</p> <p>DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70%</p> <p>NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abtrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können.</p> <p>ENTKALKUNG DER ALUMINIUMTEILE: Pressalit empfiehlt, eventuelle Kalkablagerungen auf der Wandschiene und anderen Aluminiumteilen mit einer Mischung aus 3 Teilen 30%-iger Essigsäure und 7 Teilen Wasser zu entfernen. Nach Reinigung der Aluminiumteile mit dem Essigwasser, muss mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch nachgetrocknet werden.</p>



PRESSALIT®

Produkt	PLUS Wandschiene, 3900 mm
Produktnummer	R9839112

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®

8. juli 2026