




PRESSALIT®

Article Numéro article	PLUS dossier, réglable en hauteur et latéralement R6444112
Couleur	VVS:777530612 NRF:6317053 EAN:5708590365541 HMI: 124205 FDA:INN/D135865 Gris anthracite
Description	 <p>PLUS dossiers sont disponibles en différentes couleurs et versions ; hauteur fixe ou réglable. Les dossiers peuvent être montés directement sur le mur derrière une toilette sans réservoir ou sur l'ensembles wc de Pressalit.</p> <p>PLUS dossier, 385 x 209 mm, rembourré. Réglable en hauteur de 150 mm, et réglable latéralement, montage sur PLUS glissière-support derrière une toilette murale sans réservoir. Amovible sans outils et facile à attacher à nouveau. Matériaux : aluminium et mousse de polyuréthane douce avec noyau en bois. Pour équipement de PLUS glissière-support horizontale (non incluse).</p>
Réglage Hauteur de réglage Capacité du produit	Réglable en hauteur et latéralement 150 mm <p>Charge maximale admissible : 50 kg. Poids maximum de l'utilisateur : 100 kg. Lorsque le dossier est chargé de 50 kg, chaque vis de montage est chargé de 33 kg. <i>Le dossier doit être en mesure de supporter le poids d'une personne s'appuyant dessus.</i> <i>Le dossier n'est pas conçu pour porter ou transporter le poids d'une personne, et les méthodes de test applicables au dossier reflètent les exigences suivantes : La norme ISO 17966 prescrit un test statique sur le dossier chargé à 50% du poids maximal de l'utilisateur.</i> <i>Par exemple : pour une charge maximale admissible du support annoncée à 50 kg, selon la norme ISO 17966, cela équivaldrait à un utilisateur pesant 100 kg qui se pencherait sur le dossier.</i></p>
Matériaux	Le dossier est fait de mousse polyuréthane (PU) teintée dans la masse et recouverte d'un vernis (PU) protecteur et antidérapant souple et transparent.

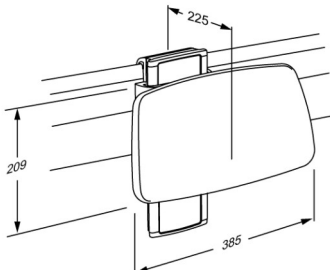

Article	PLUS dossier, réglable en hauteur et latéralement
Numéro article	R6444112
Fonctions	Pour WC sans réservoir
Garantie	Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 5 ans à partir de la date de facturation.
Nettoyage	<p>Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs, corrosifs et contenant du chlore, car cela pourrait endommager la surface.</p> <p>Les nettoyants suivants ont été testés par Pressalit et peuvent être utilisés, s'ils sont dilués conformément aux indications notées sur l'emballage.</p> <p>NETTOYANTS DÉSINFECTANTS : Erisan OXY+ Tvättspit 70% CaviCide surface désinfectant decontaminant cleaner Rodalon Desinfektionsspray Terralin protect (SCHÜLKE+) Dismonzon Plus (BODE Chemie GmbH)</p> <p>NETTOYANTS NON-DÉSINFECTANTS : Wetrok Caledor (Wetrok) Petrosol Citro (Büfa)</p> <p>Important : surfaces polyuréthanes sur les sièges de douche PLUS et dossier PLUS contiennent un revêtement antibactérien, qui risque d'être détruit si un nettoyant autre que du savon et de l'eau est utilisé pour le nettoyage.</p> <p>Il importe d'insister qu'il faut toujours essuyer le produit avec un chiffon doux plissé dans l'eau propre immédiatement après le nettoyage, car certains matériaux seront progressivement tachetés et perdront leur couleur initiale, et le laquage de surface sera rongé.</p> <p>DÉTARTAGE DE L'ALUMINIUM : Pressalit recommande d'enlever le tartre à l'aide d'un chiffon imbibé d'une solution de 3 volumes de vinaigre pour 7 volumes d'eau et de sécher avec un chiffon rincé à l'eau claire et bien essoré.</p>



PRESSALIT®

Article	PLUS dossier, réglable en hauteur et latéralement
Numéro article	R6444112

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®