




<b>Product</b> <b>Varunummer</b>	VALUE upphängning till tvättställ, manuellt höjddreglerbar R1214000
<b>Färg</b>	VVS:654011410 NRF:6191676 EAN:5708590176499 HMI: 25578 NBS:N13:30,335 FDA:ILW/D142473 Vit
<b>Beskrivning</b>	 <p>Väggkonsol med platta, höjddjusterbar 150 mm, rekommenderas med R2065/R2067 flexibla till-/avloppssystem). Inkl. monteringskit för tegel vägg.</p> <p>Väggkonsol med platta höjd justerbar 150 mm, rekommenderas med R2065/R2067 flexibla till-/avloppssystem). Inkl. monteringskit för tegel vägg.</p>
<b>Justerbar</b> <b>Höjddjustering</b> <b>Produktkapacitet</b>	Höjddreglerbar 150 mm Maximal belastning: 80 kg. Lämplig för tvättställ upp till 22 kg. När tvättstället är belastat med 80 kg, är varje väggmonteringssskruv belastad med 22 kg. <i>Tvättställsupphängningen bör kunna bära tvättställets vikt, liksom vikten hos en person som belastar tvättstället eller använd tvättstället som ett stöd att dra sig upp. <b>Varken tvättstället eller tvättställsupphängningen är personbärande</b> och den testmetoder som föreskrivs för upphängningsfunktionen återspeglar detta: ISO 17966 kräver att upphängning testas statiskt vid tvättställets framkant med 75% av den maximala användarvikten, dvs när den maximala belastningen på ett tvättställ är 80 kg och tvättstället väger 22 kg, då motsvarar det enligt ISO 17966, att en användare som väger 77 kg belastar tvättstället.</i>
<b>Ergonomi</b> <b>Funktioner</b>	Höjddreglerbar upphängning till tvättställ lämpar sig väl för t.ex. vårdhem. De olika inställningsmöjligheterna gör att brukaren klarar sig bättre på egen hand, och förbättrar dessutom vårdgivarens arbetsmiljö. Manuell höjddreglering lämpar sig bra när höjden på tvättstället endast behöver regleras någon gång ibland.

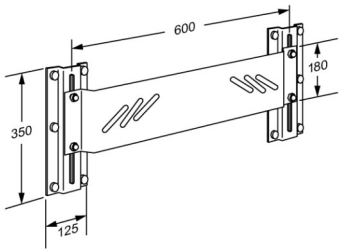

<b>Product</b>	VALUE upphängning till tvättställ, manuellt höjreglerbar
<b>Varunummer</b>	R1214000
<b>Garanti</b>	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.
<b>Rengöring</b>	<p>Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. För rengöring av ytan kan klorinbaserade desinficeringsmedel användas enligt produktspecifikationen och säkerhetsföreskrifterna för de här produkterna.</p> <p>Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen.</p> <p><b>DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:</b> Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70%</p> <p><b>INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:</b> Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.</p>