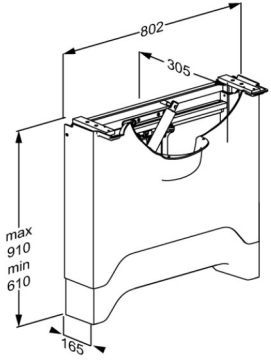




Product Varunummer	MATRIX elektriskt höjdregerbar upphängning till tvättställ, höger, höjd- och sidoregerbar R485019000
Färg	Vit
Beskrivning	<p>VVS: 654022900 NRF: 6132473 EAN: 5708590381053 HMI: 138118</p>  <p>MATRIX tvättställs upphängning är skräddarsydd efter MATRIX tvättställ. De finns i elektriska och manuellt höjjusterbara och sidoregerbara versioner, samt fastmonterade versioner, alla med ett hygieniskt installationskydd för att dölja VVS-installationerna.</p> <p>MATRIX ANGLE DEEP Upphängning till tvättställ, höger, vägghängda, med vit monteringskåpa, inkl. till- och avloppssystem och vattenlås (R2058). Elektrisk höjdregerbart 300 mm med tryckknappar (i framkant på tvättställ), och manuell sidoregerbart 500 mm. Inkl. monteringskruvar till tvättställ (Endast för MATRIX ANGLE DEEP tvättställ, R2150/R2151). Material: Pulverlackerat rostfritt stål, PMMA, ABS och polystyren. Exkl. monteringskruv för vägg.</p>
Justerbar	Höjd- och sidoregerbar
Höjjustering	300 mm
Produktkapacitet	<p>Maximal användarvikt (MUM): 160 kg. Maximal belastning: 150 kg. Lämplig för tvättställ upp till 30 kg. När tvättstället är belastat med 150 kg, är varje väggmonteringskruv belastad med 60 kg. <i>Tvättställsupphängningen bör kunna bära tvättställets vikt, liksom vikten hos en person som belastar tvättstället eller använd tvättstället som ett stöd att dra sig upp.</i> Varken tvättstället eller tvättställsupphängningen är personbärande och den testmetoder som föreskrivs för upphängningsfunktionen återspeglar detta: ISO 17966 kräver att upphängning testas statistiskt vid tvättställets framkant med 75% av den maximala användarvikten, dvs när den maximala belastningen på ett tvättställ är 150 kg och tvättstället väger 30 kg, då motsvarar det enligt ISO 17966, att en användare som väger 160 kg belastar tvättstället.</p>



PRESSALIT®

Product	MATRIX elektriskt höjdregerbar upphängning till tvättställ, höger, höjd- och sidoregerbar
Varunummer	R485019000
Uppåtgående hastighet	Hastighet upp: 11,75 mm/s
Ljudnivå	Hastighet ner: 11,75 mm/s
	50 dB
Material	Pulverlackerat rostfritt stål, PMMA, ABS och polystyren.
Anslutnings ström (V)	230
Motor	LA40 HB
Kontrollbox	CA63
Strömförbrukning (max.belastning)	Strömförbrukning vid maximal belastning: 66 W Strömförbrukning vid standby: 0,5 W
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabriktionsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.

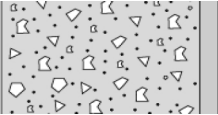
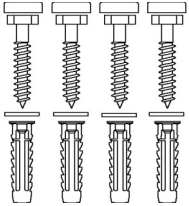

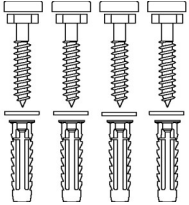
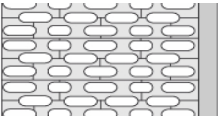
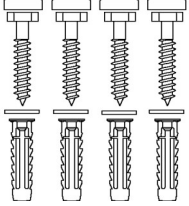
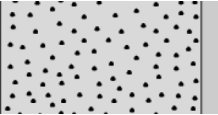
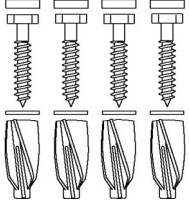
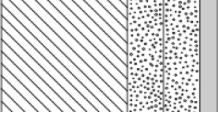
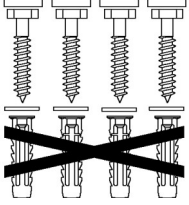


Product	MATRIX elektriskt höjreglerbar upphängning till tvättställ, höger, höjd- och sidoreglerbar
Varunummer	R485019000
Rengöring	<p>Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. För rengöring av ytan kan klorinbaserade desinficeringsmedel användas enligt produktspecifikationen och säkerhetsföreskrifterna för de här produkterna.</p> <p>Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen.</p> <p>DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättspit 70%</p> <p>INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.</p>
WEEE	Kontakta Pressalit eller Pressalits distributör som kommer att ombesörja återvinning av elektronikskrot i enlighet med WEEE-direktivet.
Överensstämmelses deklARATION	Denne produkt är tillverkad i enlighet med: - Förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter - Maskindirektivet 2006/42/EEG - RoHS-direktivet 2011/65/EU.



Product	MATRIX elektriskt höjdregerbar upphängning till tvättställ, höger, höjd- och sidoregerbar
Varunummer	R485019000

Montage i olika väggtyper

	Betong >B25 V8605 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12, med grå täckknappar. Måste beställas separat.	
	Mursten >= Mz12 V8605 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12, med grå täckknappar. Måste beställas separat.	
	Cementsten >= Hlz12 V8605 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12, med grå täckknappar. Måste beställas separat.	
	Lättbetong P4 V8655 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg GB14, med grå täckknappar. Måste beställas separat.	
	Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä V8605 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12, med vita täckknappar. Använd inte plugg. Måste beställas separat.	



Product Varunummer	MATRIX elektriskt höjreglerbar upphängning till tvättställ, höger, höjd- och sidoreglerbar R485019000
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfänér Monteringskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande. 
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm Monteringskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande. 
	Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2 Monteringskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande. 

Det är installatörens ansvar att säkerställa att korrekt fastsättning sker.