




| | |
|---|--|
| Produkt Varenummer | PLUS frontstøtte, 450 - 520 mm RT873108 |
| Farve | VVS:777539008 NRF:6317196 EAN:5708590314174 HMI: 124198 NBS:N13:426 FDA:INN/D135865 Mørkeblå (RAL 5011) |
| Produktbeskrivelse |  <p>PLUS frontstøtter fås i tre forskellige længder og flere farver, de kan bruges enten som front- eller rygstøtte.</p> <p>PLUS frontstøtte, 450 - 520 mm. Til PLUS brusesæde 310 og PLUS toiletstøtter</p> |
| Produktkapacitet | Maksimal belastning: 70 kg. |
| Materialer Ergonomi Funktioner | Stål og plast Stabiliserer og korrigerer bruger med nedsat kropsbalance. For personer med fysiske handicap, især dem med begrænset overkropsstyrke/stabilitet, eller dem, der lider af ufrivillige bevægelser eller anfald, er der en meget reel risiko for at falde fremad, ned af toilettet. I modsætning til stropper og bæltter, der kan klemme og føles ubehagelige mod huden, fastgøres disse justerbare frontstøtter direkte mellem to PLUS toiletstøtter eller mellem armlænene på et PLUS-brusersæde. Hermed holdes brugerne sikkert og komfortabelt på plads, hvilket forbedrer deres sikkerhed og bevægelighed. Samtidig hjælper de plejerne med at holde på plads og giver øget tryghed. |
| Garanti | Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabriktionsfejl. |



| | |
|-------------------|---|
| Produkt | PLUS frontstøtte, 450 - 520 mm |
| Varenummer | RT873108 |
| Rengøring | <p>Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade.</p> <p>Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen.</p> <p>DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvættsprit 70%</p> <p>IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.</p> <p>AFKALKNING AF ALUMINIUMDELE: Pressalit anbefaler at man fjerner kalkaflejringer fra aluminiumdele ved hjælp af en opløsning af 3 dele 30% eddikesyre og 7 dele vand. Når aluminiumdelene er vasket af i denne opløsning, tørres de efter med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand.</p> |

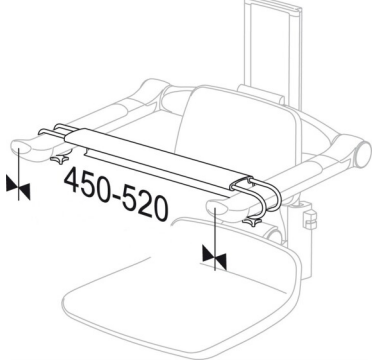

PRESSALIT®

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| Produkt | PLUS frontstøtte, 450 - 520 mm |
| Varenummer | RT873108 |

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®

23. juni 2026