




# PRESSALIT®

<b>Produkt</b> <b>Produktnummer</b>	VALUE IV Duschklappsitz mit Bodenstütze, Festmontage R1622000112
<b>Farbe</b>	VVS: 777525412 NRF: 6314098 RSK: 8162782 EAN: 5708590377728 HMI: 124486 DB: 2510921 FDA: INN/D135865 Anthrazitgrau
<b>Produkt- beschreibung</b>	 <p>Der hochklappbare Duschsitz und die passende Rückenlehne der VALUE IV Serie bieten eine einfache Lösung für Nutzer, die sich beim Duschen hinsetzen möchten.</p> <p>VALUE IV Duschsitz. Festeinbau. Sitz ist hochklappbar. Materialien: Aluminium, Rilsan-beschichtetem Edelstahl und Vakuumgeformtes Polyethylen (PE). Inkl. Befestigungsschrauben für massives Mauerwerk. Dübeln müssen separat bestellt werden.</p>
<b>Verstellung</b> <b>Produktkapazität</b>	Festmontage  Maximales Anwendergewicht: 135 kg. Bei einer Belastung der Duschsitz mit 135 kg, wird jede Montageschraube folglich mit bis zu 125 kg.  <i>VALUE Duschsitze wurden statisch mit einem Sicherheitsfaktor 1,5 getestet. Dies entspricht den Anforderungen der geltenden Normen.</i>
<b>Materialien</b>  <b>Ergonomie</b>	Das Wandscharnier ist aus Aluminium hergestellt und der Rahmen und der Bodenstütze sind aus Rilsan-beschichtetem Edelstahl hergestellt. Rilsan-Beschichtung bietet einen optimalen Schutz gegen Korrosion, eine angenehme Haptik und die Möglichkeit der einfachen Reinigung. Der Sitz ist aus Vakuumgeformtes Polyethylen (PE) hergestellt.  Ergonomischer Duschsitz mit bequemer Oberfläche Mit Stützbein.

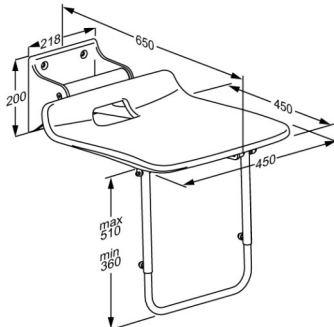

<b>Produkt</b>	VALUE IV Duschklappsitz mit Bodenstütze, Festmontage
<b>Produktnummer</b>	R1622000112
<b>Funktionen</b>	<p>Der Duschsitz kann bei Nichtbenutzung hochgeklappt werden.</p> <p>Mit extra Beinstützen.</p>
<b>Garantie</b>	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.
<b>Reinigung</b>	<p>Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden oder ätzenden Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Zur Desinfektion der Oberflächen können chlorbasierte Desinfektionsmittel verwendet werden. Beachten Sie dabei die Produktspezifikationen und Sicherheitshinweise des Produkts.</p> <p>Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist.</p> <p><b>DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL:</b></p> <p>Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% WipeClean UniversalCleaning Chlorine Disinfection Wipes Klorilli (Kiihto Clean)</p> <p><b>NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL:</b></p> <p>Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abtrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können.</p>



# PRESSALIT®

<b>Produkt</b>	VALUE IV Duschklappsitz mit Bodenstütze, Festmontage
<b>Produktnummer</b>	R1622000112

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

# PRESSALIT®