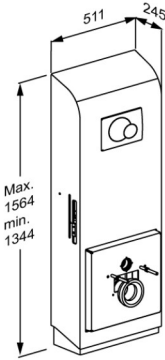




PRESSALIT®

Product Varunummer	SELECT TL5 elektrisk upphängning till toalett med tiltfunktion, till väggavlopp R9221000
Färg	Vit
Beskrivning	VVS: 617989900 NRF: 1617110 EAN: 5708590390963 FDA: IKX/D319729  SELECT elektrisk upphängning till toalett finns i flera modeller och färger för både väggavlopp och golvavlopp. De finns i elektriskt eller manuellt höjdjusterbara versioner, med eller utan sidoprofiler och för standardtoalettskålar och duschtoaletter. Allt utvecklat med fokus på hygien och enkel rengöring. SELECT TL5 upphängning till toalett, till väggavlopp. Inkl. cistern med dubbelspolning 3/6 L (kan ställas om till 2/4 liter). Eldriven höjdjusterbar 220 mm med kontrollpanel på toalettarmstöd. Tiltfunktionen är begränsad till höjdjusteringen. Det innebär att toalettstolens fästplatta lutar när den lyfts till övre läge och återställs när enheten sänks. Den maximala lutningen är 8 grader. Toalettskål, toalettsits och toalettarmstöd (nödvändigt för höjdjusteringen) måste köpas separat. Exkl. monteringsskruv för vägg.
Justerbar Höjdjustering	Höjdreglerbar 220 mm
Produktkapacitet	Max brukarvikt. 150 kg (MUM). Max belastning. 235 kg (brukarvikt + tillbehör) När toalettlyftare belastas med 235 kg, belastas varje fästskruv med 65 kg. <i>Toalettlyftaren testas statiskt med 587,5 kg, där toaletten fäster. Detta är i enlighet med kraven i gällande standarder hjälpmiddel. Observera att de flesta toaletter som kan monteras på lyftenheter, har testats till 400 kg.</i>
Uppåtgående hastighet Ljudnivå	Hastighet upp: 7 mm/s Hastighet ner: 7 mm/s 50 dB
Material	Toalettlyftaren är tillverkad av rostfritt stål och lackerat stål, med monteringskåpa i PMMA/ABS.



Product Varunummer	SELECT TL5 elektrisk upphängning till toalett med tiltfunktion, till väggavlopp R9221000
Ergonomi Funktioner Anslutnings ström (V) Motor Kontrollbox Strömförbrukning (max.belastning)	Den inbyggda lutningsfunktionen underlättar en naturlig rörelse framåt, vilket gör övergången från sittande till stående lättare och säkrare för användare med nedsatt rörlighet. Genom att luta användaren till en optimal position förbättrar TL5 stabiliteten och minskar den fysiska belastningen vid förflyttningar. Detta förbättrar både användarens självständighet och vårdgivarens arbetsförhållanden. Den är utformad för vuxna användare, men kan även användas av barn under vuxens uppsikt. • Tiltfunktion • Elektrisk höjddreglerbar • Kontrollpanel på stödarm • Dubbelt spolsystem 230 LA40 CA63 Strömförbrukning vid maximal belastning: 420 W Strömförbrukning vid standby: 0,5 W
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.



PRESSALIT®

Product Varunummer	SELECT TL5 elektrisk upphängning till toalett med tiltfunktion, till väggavlopp R9221000
Rengöring	Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. För rengöring av ytan kan klorinbaserade desinficeringsmedel användas enligt produktspecifikationen och säkerhetsföreskrifterna för de här produkterna. Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen. DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.
WEEE	Kontakta Pressalit eller Pressalits distributör som kommer att ombesörja återvinning av elektronikskrot i enlighet med WEEE-direktivet.



PRESSALIT®

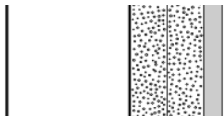
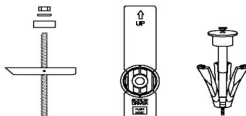
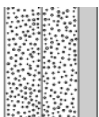
Product	SELECT TL5 elektrisk upphängning till toalett med tiltfunktion, till väggavlopp
Varunummer	R9221000

Montage i olika väggtyper

	Betong >B25 V8605 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12, med grå täckknappar. Måste beställas separat.	
	Mursten >= Mz12 V8605 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12, med grå täckknappar. Måste beställas separat.	
	Cementsten >= Hlz12 V8605 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12, med grå täckknappar. Måste beställas separat.	
	Lättbetong P4 V8655 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg GB14, med grå täckknappar. Måste beställas separat.	
	Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä V8605 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12, med vita täckknappar. Använd inte plugg. Måste beställas separat.	



PRESSALIT®

Product Varunummer	SELECT TL5 elektrisk upphängning till toalett med tiltfunktion, till väggavlopp R9221000		
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfanér Monteringsskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.		
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm Monteringsskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.		
	Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2 Montering av produkter i denna typ av vägg rekommenderas inte, finns en stor risk att kroppsskada uppstår.		

pressalit.com