




# PRESSALIT®

<b>Produkt</b>	PLUS Vorderstütze, 450 - 520 mm
<b>Produktnummer</b>	RT873000
<b>Farbe</b>	<p>VVS:777539000  NRF:7501039  EAN:5708590314150  HMI: 124198  NBS:N13:426  FDA:INN/D135865  Weiß</p>
<b>Produkt- beschreibung</b>	<p>PLUS Vorderstütze sind in drei verschiedenen Längen erhältlich und können auch als Rückenstütze verwendet werden. Sie sind zwischen zwei PLUS Stützklappgriffen oder zwischen den Armlehnen eines PLUS Duschsitzes zu anbringen.</p> <p>PLUS Vorderstütze, 450 - 520 mm. Für PLUS Duschsitz 310 und PLUS Stützklappgriffe</p>
<b>Produktkapazität</b>	Maximale Belastbarkeit: 70 kg
<b>Materialien</b>	Stahl und Kunststoff
<b>Ergonomie</b>	Stabilisiert und korrigiert den Benutzer mit gestörter Körperbalance.
<b>Funktionen</b>	<p>Menschen mit körperlichen Einschränkungen, insbesondere solche mit eingeschränkter Kraft und Stabilität des Oberkörpers, oder Menschen , die an Krampfanfällen oder unter unwillkürlichen Bewegungen leiden, besteht die Gefahr von der Toilette zu fallen.</p> <p>Im Gegensatz zu Gurten, die unangenehm zu tragen sind, da sie die Haut einklemmen können, werden unsere verstellbaren Vorder- und Rückenstützen direkt zwischen zwei PLUS Stützklappgriffe oder zwischen die Armlehnen eines Duschsitzes montiert.</p> <p>Dadurch werden die Benutzer sicher und bequem in Position gehalten und bieten somit eine sichere Unterstützung bei der Pflege und eine hohe Funktionalität.</p>
<b>Garantie</b>	<p>Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.</p>



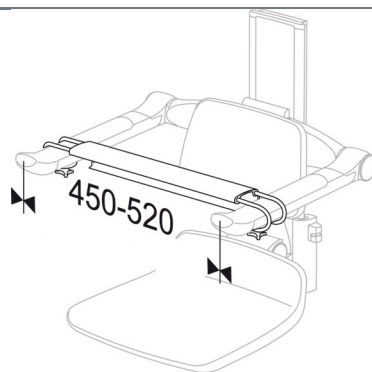

# PRESSALIT®

<b>Produkt</b>	PLUS Vorderstütze, 450 - 520 mm
<b>Produktnummer</b>	RT873000
<b>Reinigung</b>	<p>Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.</p> <p>Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist.</p> <p><b>DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL:</b> Lysoformin Spezial</p> <p><b>NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL:</b> Milizid Citro</p> <p>Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abtrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können.</p> <p><b>ENTKALKUNG DER ALUMINIUMTEILE:</b> Pressalit empfiehlt, eventuelle Kalkablagerungen auf der Wandschiene und anderen Aluminiumteilen mit einer Mischung aus 3 Teilen 30%-iger Essigsäure und 7 Teilen Wasser zu entfernen. Nach Reinigung der Aluminiumteile mit dem Essigwasser, muss mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch nachgetrocknet werden.</p>

[pressalit.com](http://pressalit.com)

# PRESSALIT®