




# PRESSALIT®

<b>Article</b> <b>Numéro article</b>	PLUS support frontal, 450 - 520 mm RT873035
<b>Couleur</b>	VVS:777539035 NRF:6317195 EAN:5708590314167 HMI: 124198 NBS:N13:426 FDA:INN/D135865 Rouge (RAL 3003)
<b>Description</b>	 <p>PLUS appuis frontaux sont disponibles en trois longueurs différents, et ils peuvent aussi être utilisés comme appuis dorsaux.</p> <p>PLUS appui frontal, 450 - 520 mm. Pour PLUS siège de douche 310 et PLUS barres de relèvement</p>
<b>Capacité du produit</b>	Charge maximale admissible : 70 kg
<b>Matériaux</b> <b>Ergonomie</b> <b>Fonctions</b>	Acier et plastique  Stabilise et corrige l'utilisateur dont l'équilibre corporel est altéré.  Pour les personnes ayant un handicap physique, en particulier celles dont la force/stabilité du haut du corps est limitée, ou celles qui souffrent de mouvements involontaires ou de convulsions, le risque de chute vers l'avant des toilettes est très réel. Contrairement aux sangles et ceintures, qui peuvent pincer et être inconfortables contre la peau, ces supports avant et arrière réglables se fixent directement entre deux bras de support PLUS ou entre les accoudoirs d'un siège de douche PLUS. Par conséquent, les utilisateurs sont maintenus en place de manière sûre et confortable, améliorant leur sécurité et leur fonctionnalité, tout en aidant les soignants et en leur offrant une plus grande tranquillité d'esprit.
<b>Garantie</b>	Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 5 ans à partir de la date de facturation.

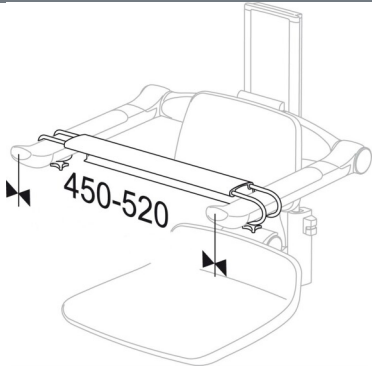

# PRESSALIT®

<b>Article</b>	PLUS support frontal, 450 - 520 mm
<b>Numéro article</b>	RT873035
<b>Nettoyage</b>	<p>Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs, corrosifs et contenant du chlore, car cela pourrait endommager la surface.</p> <p>Les nettoyants suivants ont été testés par Pressalit et peuvent être utilisés, s'ils sont dilués conformément aux indications notées sur l'emballage.</p> <p><b>NETTOYANTS DÉSINFECTANTS :</b> Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70%</p> <p><b>NETTOYANTS NON-DÉSINFECTANTS :</b> Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Il importe d'insister qu'il faut toujours essuyer le produit avec un chiffon doux plissé dans l'eau propre immédiatement après le nettoyage, car certains matériaux seront progressivement tachetés et perdront leur couleur initiale, et le laquage de surface sera rongé.</p> <p><b>DÉTARTAGE DE L'ALUMINIUM :</b> Pressalit recommande d'enlever le tartre à l'aide d'un chiffon imbibé d'une solution de 3 volumes de vinaigre pour 7 volumes d'eau et de sécher avec un chiffon rincé à l'eau claire et bien essoré.</p>



# PRESSALIT®

<b>Article</b>	PLUS support frontal, 450 - 520 mm
<b>Numéro article</b>	RT873035

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

# PRESSALIT®