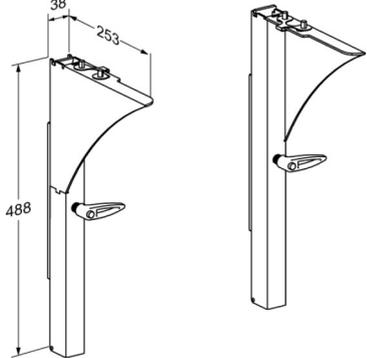




PRESSALIT®

<b>Article</b> <b>Numéro article</b>	MATRIX supports de lavabo, 200 mm réglable en hauteur R2015182
<b>Couleur</b>	VVS:636858810 NRF:6132552 EAN:5708590329345 HMI: 106240 NBS:N13:30,335 Gris clair
<b>Description</b>	 <p>Les supports MATRIX sont la solution économique pour les lavabos MATRIX MEDIUM et ANGLE. Ils sont disponibles dans une version à hauteur fixe et une version à hauteur réglable manuellement, qui convient à un réglage peu fréquent.</p> <p>Supports, 2 pièces. 200 mm réglables en hauteur (Pour réglage en hauteur occasionnel). Pour les plans vasques MEDIUM et ANGLE avec poignées intégrées. Flexibles R2067/R2065 recommandés. Livré sans vis de montage.</p>
<b>Réglage</b>	Réglable en hauteur
<b>Hauteur de réglage</b>	200 mm
<b>Capacité du produit</b>	Poids maximum de l'utilisateur (MUM) : 160 kg. Charge maximale admissible (SWL) : 150 kg. Convient pour des lavabos jusqu'au 30 kg. Lorsque le lavabo est chargé de 150 kg, chaque vis de montage est chargé de 75 kg. <i>Le support de lavabo doit être en mesure de supporter le poids du lavabo ainsi que le poids d'une personne s'appuyant dessus pendant sa toilette ou s'en aidant pour se relever quand elle est assise.</i> <b>Ni le lavabo ni le support de lavabo ne sont conçus pour porter ou transporter le poids d'une personne, et les méthodes de test applicables au support de lavabo reflètent les exigences suivantes : La norme ISO 17966 prescrit un test statique sur le bord avant du lavabo chargé à 75% du poids maximal de l'utilisateur.</b> <i>Par exemple : pour une charge maximale admissible du support annoncée à 150 kg avec un lavabo de 30 kg, selon la norme ISO 17966, cela équivaldrait à un utilisateur pesant 160 kg qui se pencherait sur le bord avant du lavabo.</i>
<b>Matériaux</b>	Acier inoxydable laqué par poudrage

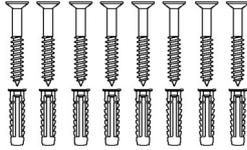
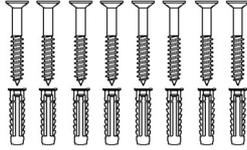
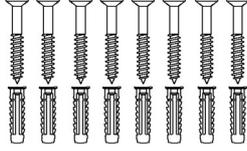
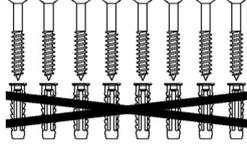


<b>Article</b>	MATRIX supports de lavabo, 200 mm réglable en hauteur
<b>Numéro article</b>	R2015182
<b>Garantie</b>	Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 5 ans à partir de la date de facturation.
<b>Nettoyage</b>	<p>Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs et corrosifs, car cela pourrait endommager la surface.</p> <p>Pour désinfecter la surface, des désinfectants peuvent être utilisés en tenant compte des caractéristiques et des précautions de sécurité liées à ces produits.</p> <p>Les nettoyants suivants ont été testés par Pressalit et peuvent être utilisés, s'ils sont dilués conformément aux indications notées sur l'emballage.</p> <p><b>NETTOYANTS DÉSINFECTANTS :</b> Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70%</p> <p><b>NETTOYANTS NON-DÉSINFECTANTS :</b> Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Il importe d'insister qu'il faut toujours essuyer le produit avec un chiffon doux plissé dans l'eau propre immédiatement après le nettoyage, car certains matériaux seront progressivement tachetés et perdront leur couleur initiale, et le laquage de surface sera rongé.</p>
<b>Déclaration de conformité</b>	Ce produit répond aux exigences de la réglementation (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux.

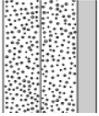


<b>Article</b>	MATRIX supports de lavabo, 200 mm réglable en hauteur
<b>Numéro article</b>	R2015182

## Installation dans de différents types de mur

	<b>Béton &gt;B25</b> V8601 - Kit vis de montage, 8 vis cervicales Ø6 x 70, chevilles SX8. Doit être commandé séparément.	
	<b>Brique pleine &gt;= Mz12</b> V8601 - Kit vis de montage, 8 vis cervicales Ø6 x 70, chevilles SX8. Doit être commandé séparément.	
	<b>Parpaing plein &gt;= Hlz12</b> V8601 - Kit vis de montage, 8 vis cervicales Ø6 x 70, chevilles SX8. Doit être commandé séparément.	
	<b>Béton cellulaire P4</b> It is not recommended to install this product in aerated concrete.	
	<b>Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée de bois</b> V8601 - Kit vis de montage, 8 vis cervicales Ø6 x 70, chevilles SX8. N'utilisez pas les chevilles. Doit être commandé séparément.	



<b>Article</b> <b>Numéro article</b>	MATRIX supports de lavabo, 200 mm réglable en hauteur R2015182	
	<b>Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée de contreplaqué 22 mm</b> Montage dans ce type de mur n'est pas recommandé - risque de blessure mortelle pour des personnes.	
	<b>Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée d'acier 2 mm</b> Montage dans ce type de mur n'est pas recommandé - risque de blessure mortelle pour des personnes.	
	<b>Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable</b> Montage dans ce type de mur n'est pas recommandé - risque de blessure mortelle pour des personnes.	

C'est la responsabilité de l'installateur d'assurer l'usage des fixations murales appropriées.