




<b>Produkt</b> <b>Produktnummer</b>	PLUS Waschtischlifter mit Betätigungshebel, manuell höhenverstellbar mit Gasdruckzylinder R4650
<b>Produkt- beschreibung</b>	<p>VVS: 654002100 NRF: 6132532 RSK: 7972590 EAN: 5708590309439 HMI: 71762 NBS: N13:30,335 FDA: ILW/D142473</p>  <p>PLUS Waschtischlifter sind in elektrisch, pneumatisch und manuell höhenverstellbaren Versionen erhältlich. Sie eignen sich zur Montage an der Wand oder zur Montage an Pressalit PLUS Wandschienen.</p> <p>PLUS Waschtischlifter mit Gasdruckzylinder. Betätigungshebel kann als Handtuchhalter dienen und kann auf der rechten oder linken Seite des Waschtisches angebracht werden. Um 300 mm (stufenlos). Empfehlung: Zu- und Ablaufsystem R2067/R2065. Materialien: Aluminium mit einer 10µm Eloxalschicht und ABS-Polymer. Inkl. Befestigungsmaterial für Waschtisch. Exkl. Wandbefestigungen.</p>
<b>Verstellung</b> <b>Höhenverstellung</b>	Höhenverstellbar 300 mm



<b>Produkt</b>	PLUS Waschtischlifter mit Betätigungshebel, manuell höhenverstellbar mit Gasdruckzylinder
<b>Produktnummer</b>	R4650
<b>Produktkapazität</b>	<p>Maximale Belastbarkeit: 135 kg. Geeignet für Waschtische von bis zu 22 kg. Bei einer Belastung mit 135 kg, trägt jede Befestigungsschraube 57 kg. <i>Die Waschtisch-Lifter müssen in der Lage sein, das Gewicht des Waschtisches und das Gewicht der Person zu tragen, die den Waschtisch benutzt, um sich aus der sitzenden Position aufzurichten. <b>Weder der Waschtisch noch der Waschtisch-Lifter sind zum Tragen einer Person bestimmt.</b> Eine für den Waschtisch-Lifter geltende Prüfmethode spiegelt dies wider: ISO 17966 schreibt eine statische Prüfung an der Vorderkante des Waschtisches bei 75% des maximalen Benutzergewichts vor, d.h. wenn die maximale Belastung eines Waschtisch-Lifters 135 kg und das Gewicht des Waschtisches 22 kg beträgt, entspricht dies nach ISO 17966 einem Benutzergewicht von 151 kg, das sich an der Vorderkante des Waschtisches abstützt.</i></p>
<b>Materialien</b>	Der Waschtischlifter besteht vorwiegend aus Aluminium mit einer 10 µm Eloxalschicht. Die Abdeckung des Waschtischlifters ist mit Endkappen aus ABS-Polymer versehen. Der Betätigungshebel besteht aus einem Schalter aus ABS-Polymer am Ende eines Arms aus eloxiertem Aluminium.
<b>Ergonomie</b>	Die Waschtischhöhe lässt sich mithilfe des Betätigungshebels einstellen. Der Waschtischlifter passt für alle Waschtischtypen mit Bolzenaufhängung. Das abgerundete und schlanke Design gestaltet die Reinigung einfach und unkompliziert.
<b>Funktionen</b>	Der Betätigungshebel kann als Handtuchhalter verwendet werden. Der Betätigungshebel kann auf der rechten oder linken Seite des Waschtisches angebracht werden. Wird standardmäßig mit einem Gasdruckzylinder für Waschtische von 16-20 kg geliefert. Kann mit Gasdruckzylindern für Waschtische von 8-12 kg. bzw. 12-16 bestellt werden.
<b>Garantie</b>	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgetauscht oder neu geliefert werden.

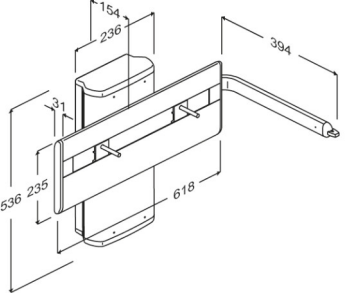

<b>Produkt</b>	PLUS Waschtischlifter mit Betätigungshebel, manuell höhenverstellbar mit Gasdruckzylinder
<b>Produktnummer</b>	R4650
<b>Reinigung</b>	<p>Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.</p> <p>Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist.</p> <p><b>DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL:</b> Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70%</p> <p><b>NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL:</b> Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abtrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können.</p> <p><b>ENTKALKUNG DER ALUMINIUMTEILE:</b> Pressalit empfiehlt, eventuelle Kalkablagerungen auf der Wandschiene und anderen Aluminiumteilen mit einer Mischung aus 3 Teilen 30%-iger Essigsäure und 7 Teilen Wasser zu entfernen. Nach Reinigung der Aluminiumteile mit dem Essigwasser, muss mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch nachgetrocknet werden.</p>



# PRESSALIT®

<b>Produkt</b>	PLUS Waschtischlifter mit Betätigungshebel, manuell höhenverstellbar mit Gasdruckzylinder
<b>Produktnummer</b>	R4650

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

PRESSALIT®