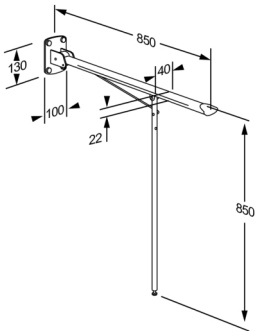




# PRESSALIT®

<b>Article</b> <b>Numéro article</b>	VALUE barre de relèvement avec pied, montage fixe R1101000
<b>Couleur</b>  <b>Description</b>	<p>VVS:615722400 NRF:6191641 EAN:5708590176413 HMI: 25412 NBS:N13:436 DB: 2076621 FDA:ILS/D135866 Blanc</p>  <p>VALUE barre de relèvement avec pied, pour montage fixe, rabattables, longueur 850 mm, hauteur 850 mm. Le design ergonomique permet une prise ferme et confortable et donne une bonne sensation de la limite de l'appui. Matériaux : acier à revêtement Rilsan, aluminium laqué par poudrage, matière synthétique. Vis de montage incluses. Chevilles à commander séparément.</p>
<b>Réglage</b>  <b>Capacité du produit</b>	<p>Montage fixe</p> <p>Charge maximale : 135 kg. Lorsque le barre de relèvement est chargé de 135 kg, chaque vis de montage est chargé de 81 kg.</p>
<b>Matériaux</b>  <b>Ergonomie</b>	<p>La matière de base: Acier</p> <p>La matière de surface: Rilsan</p> <p>L'extrémité des barres: Nylon(PA)</p> <p>Pour un appui optimal en position assise ou debout, et lorsqu'on se relève ou s'assied.</p> <p>Large surface pour poser le main et le bras, et forme arrondie pour une préhension stable et agréable.</p>



# PRESSALIT®

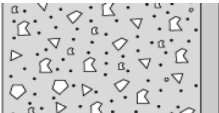
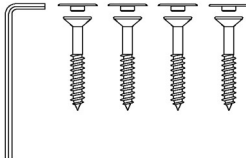

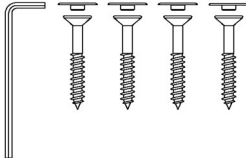
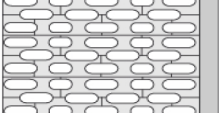
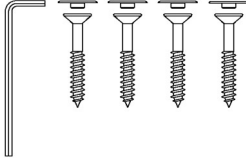
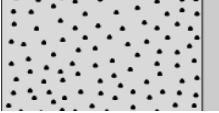
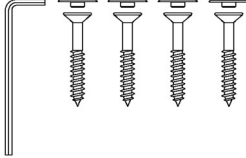
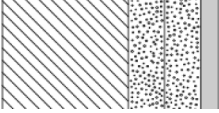
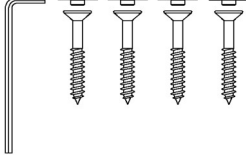
<b>Article</b>	VALUE barre de relèvement avec pied, montage fixe
<b>Numéro article</b>	R1101000
<b>Fonctions</b>	Rabattable en cas de non-utilisation ou pour libérer de l'espace  Avec pied pour support supplémentaire
<b>Garantie</b>	Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 5 ans à partir de la date de facturation.
<b>Nettoyage</b>	<p>Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs et corrosifs, car cela pourrait endommager la surface.</p> <p>Pour désinfecter la surface, des désinfectants peuvent être utilisés en tenant compte des caractéristiques et des précautions de sécurité liées à ces produits.</p> <p>Les nettoyants suivants ont été testés par Pressalit et peuvent être utilisés, s'ils sont dilués conformément aux indications notées sur l'emballage.</p> <p><b>NETTOYANTS DÉSINFECTANTS :</b></p> <p>Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% WipeClean UniversalCleaning Chloroline Disinfection Wipes Klorilli (Kiilto Clean)</p> <p><b>NETTOYANTS NON-DÉSINFECTANTS :</b></p> <p>Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Il importe d'insister qu'il faut toujours essuyer le produit avec un chiffon doux plissé dans l'eau propre immédiatement après le nettoyage, car certains matériaux seront progressivement tachetés et perdront leur couleur initiale, et le laquage de surface sera rongé.</p>



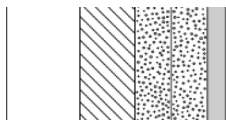
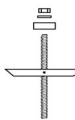

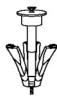
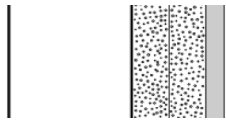
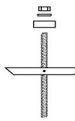

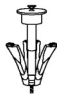
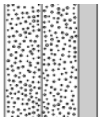

PRESSALIT®

Article	VALUE barre de relèvement avec pied, montage fixe
Numéro article	R1101000

## Installation dans de différents types de mur

	<p><b>Béton &gt;B25</b></p> <p>V8593 - 4 vis fraisées Ø10 x 80, avec couvercles à vis blancs inclus. Chevilles doivent être commandé séparément.</p>	
	<p><b>Brique pleine &gt;= Mz12</b></p> <p>V8593 - 4 vis fraisées Ø10 x 80, avec couvercles à vis blancs inclus. Chevilles doivent être commandé séparément.</p>	
	<p><b>Parpaing plein &gt;= Hlz12</b></p> <p>V8593 - 4 vis fraisées Ø10 x 80, avec couvercles à vis blancs inclus. Chevilles doivent être commandé séparément.</p>	
	<p><b>Béton cellulaire P4</b></p> <p>V8593 - 4 vis fraisées Ø10 x 80, avec couvercles à vis blancs inclus. Chevilles doivent être commandé séparément.</p>	
	<p><b>Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée de bois</b></p> <p>V8593 - 4 vis fraisées Ø10 x 80, avec couvercles à vis blancs inclus. Chevilles doivent être commandé séparément.</p>	



Article Numéro article	VALUE barre de relèvement avec pied, montage fixe R1101000		
	<b>Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée de contreplaqué 22 mm</b> Vis de montage (4 pièces) doivent être acheté séparément. Pour les cloisons sèches imperméables, les chevilles bascule KD8 de fischer ou similaire peuvent être utilisées.		 
	<b>Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée d'acier 2 mm</b> Vis de montage (4 pièces) doivent être acheté séparément. Pour les cloisons sèches imperméables, les chevilles bascule KD8 de fischer ou similaire peuvent être utilisées.		 
	<b>Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable</b> Montage dans ce type de mur n'est pas recommandé - risque de blessure mortelle pour des personnes.		

Vis de montage pour mur incluses. C'est la responsabilité de l'installateur d'assurer l'usage des chevilles appropriées. Veuillez voir le notice de montage.