




PRESSALIT®

| | |
|--|--|
| Article Numéro article | VALUE IV siège rabattable pour la douche avec piètement support, montage fixe R1622000112 |
| Couleur | VVS: 777525412 NRF: 6314098 RSK: 8162782 EAN: 5708590377728 HMI: 124486 DB: 2510921 FDA: INN/D135865 Gris anthracite |
| Description |  <p>Le siège et le dossier de douche pliants VALUE IV créent une solution simple pour les utilisateurs qui ont besoin de s'asseoir pendant la douche.</p> <p>VALUE IV siège de douche. Hauteur fixe. Le siège est rabattable. Matériaux : aluminium moulé sous pression, acier inoxydable avec revêtement Rilsan et polyéthylène (PE) moulé sous vide. Vis de montage incluses. Chevilles à commander séparément.</p> |
| Réglage Capacité du produit | Montage fixe Poids maximum de l'utilisateur : 135 kg. Lorsque le siège est chargé de 135 kg, chaque vis de montage est chargé de 125 kg. <i>Les VALUE sièges de douche ont été testé statiquement avec un facteur de sécurité de 1,5, ce qui est exigé par les normes appliquées.</i> |
| Matériaux Ergonomie Fonctions | La charnière murale est fait d'aluminium moulé sous pression. Le cadre et le piètement support sont fait en acier inoxydable avec un revêtement Rilsan qui protège contre la corrosion, est agréable au toucher et facile à nettoyer. Le siège est fait de polyéthylène (PE) moulé sous vide. Une assise de forme ergonomique avec une surface agréable. Rabattable en cas de non-utilisation ou pour libérer de l'espace Avec piètement support |
| Garantie | Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 5 ans à partir de la date de facturation. |

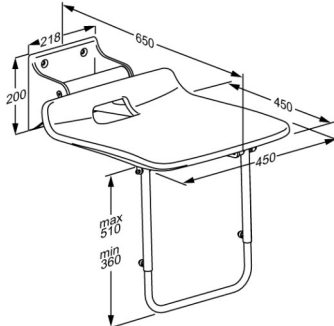

| | |
|-----------------------|---|
| Article | VALUE IV siège rabattable pour la douche avec piètement support, montage fixe |
| Numéro article | R1622000112 |
| Nettoyage | <p>Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs et corrosifs, car cela pourrait endommager la surface.</p> <p>Pour désinfecter la surface, des désinfectants peuvent être utilisés en tenant compte des caractéristiques et des précautions de sécurité liées à ces produits.</p> <p>Les nettoyants suivants ont été testés par Pressalit et peuvent être utilisés, s'ils sont dilués conformément aux indications notées sur l'emballage.</p> <p>NETTOYANTS DÉSINFECTANTS :</p> <ul style="list-style-type: none">Clinimax Difficil-SErisan OXY+Sprit (husholdningssprit)Suma Bac D10VirkonRodalon DesinfektionssprayLysoformin SpezialCaviCideSufanios PremiumTvättspnit 70%WipeClean UniversalCleaningChlorine Disinfection WipesKlorilli (Kiilto Clean) <p>NETTOYANTS NON-DÉSINFECTANTS :</p> <ul style="list-style-type: none">Suma Star free D1Taski 100Taski 200Milizid Citro <p>Il importe d'insister qu'il faut toujours essuyer le produit avec un chiffon doux plissé dans l'eau propre immédiatement après le nettoyage, car certains matériaux seront progressivement tachetés et perdront leur couleur initiale, et le laquage de surface sera rongé.</p> |



PRESSALIT®

| | |
|-----------------------|---|
| Article | VALUE IV siège rabattable pour la douche avec piètement support, montage fixe |
| Numéro article | R1622000112 |

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®