




Produkt Produktnummer	VALUE Stützklappgriff, 850 mm R1085000
Farbe	Weiß
Produktbeschreibung	<p>VVS:615892502 NRF:6191056 EAN:5708590346861 HMI: 138199</p>  <p>VALUE und VALUE II Stützklappgriffe mit ALBA-Flügel Montageprofil sind für die Verwendung mit SELECT TL3 und TL4 WC-Liftern entwickelt. Die elektrische Höhenverstellung des WC-Lifters ist nur mit dem Bedienpanel auf dem Stützklappgriff möglich.</p> <p>VALUE Stützklappgriff, 850 mm, hochklappbar, höhenverstellbar 150 mm ohne Werkzeug (linksbedient). Eine gute Hilfe beim Sitzen, Stehen oder Transferieren auf der Toilette. Materialien: Rilsan-beschichteter Stahl, Aluminiumdruckguss, Endkappen in Nylon (PA). Für die Nachmontage auf TL3/TL4 manuellem WC-Lifter, ALBA-Flügel Montageprofil mitgeliefert. Rechts vom Benutzer montiert.</p>
Verstellung Höhenverstellung Produktkapazität	Höhenverstellbar 150 mm Maximale belastbarkeit: 120 kg
Materialien	Der Stützklappgriff besteht aus Stahl, mit einer Rilsan© (ein Hochleistungs-Polyamid auf Bio Basis) Beschichtung. Die Oberfläche ist ausgezeichnete gegen Korrosion geschützt und leicht zu reinigen. Die Endkappen werden aus PA Nylon (teilkristalliner Thermoplast) mit herausragender Verschleißfestigkeit hergestellt und das Befestigungsprofil besteht einem Aluminiumdruckguss.
Garantie	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.



Produkt	VALUE Stützklappgriff, 850 mm
Produktnummer	R1085000
Reinigung	<p>Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden oder ätzenden Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Zur Desinfektion der Oberflächen können chlorbasierte Desinfektionsmittel verwendet werden. Beachten Sie dabei die Produktspezifikationen und Sicherheitshinweise des Produkts.</p> <p>Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist.</p> <p>DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningsprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% WipeClean UniversalCleaning Chlorine Disinfection Wipes Klorilli (Kiihto Clean)</p> <p>NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abtrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können.</p> <p>Diese Produkt ist gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert worden.</p>
Konformitäts- erklärung	

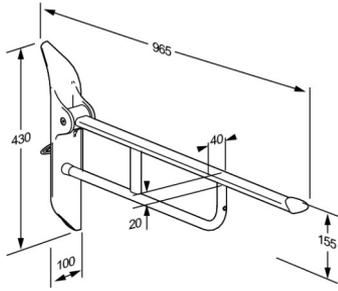

PRESSALIT®

Produkt	VALUE Stützklappgriff, 850 mm
Produktnummer	R1085000

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®